


InfinityLab Quick Change Solvent Purifier – T&B

- Solvent Purifier je čistící kazeta na rozpouštědla navržená tak, aby snižovala problémy způsobené nečistotami pocházejícím z mobilní fáze a eliminovala utajené píky ghost peaks
- výměna po 6 měsících nebo pokud pokusy o proplachování selžou
- výměna při změně mobilní fáze, nebo při přechodu na metodu s vyšší eluční silou



**do 30. 4. 2025
s 30% slevou**

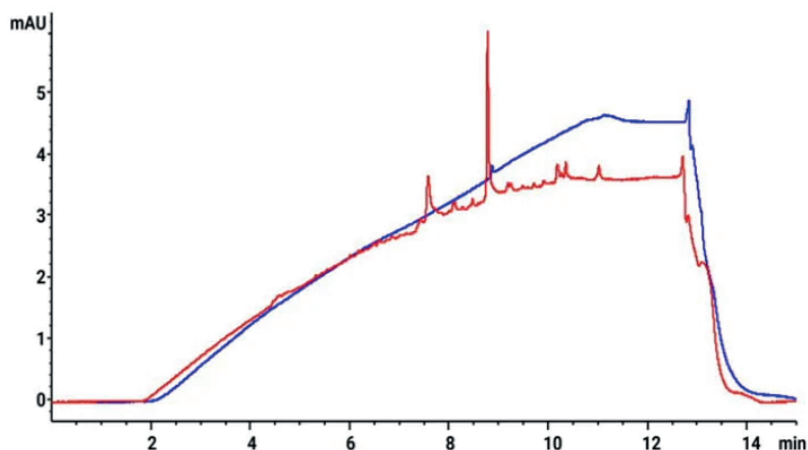

Složení mobilní fáze: A - voda, B - AcN

Gradient:

0-1 min 5% B

1-10 min 5-95% B

10 -12 min 95% B


12 - 12.5 min 95-5% B

Teplota: RT

Kolona: InfinityLab Poroshell 120 EC-C18,
2,1 x 100 mm, 2,7 um (kat.č.695575-902)


- **Modrá čára:** Zachycování nečistot pomocí instalovaného InfinityLab Quick Change Solvent Purifier, 2,1 x 20 mm, pro gradient acetonitril/voda.
- **Červená čára:** Bez nainstalovaného Quick Change Solvent Purifier. Nečistoty viditelné jako „utajené píky“.

Součásti Solvent Purifier Agilent InfinityLab

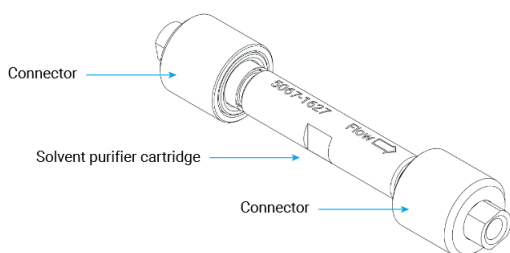

Umístění Solvent Purifier

Agilent InfinityLab Quick Change solvent purifier

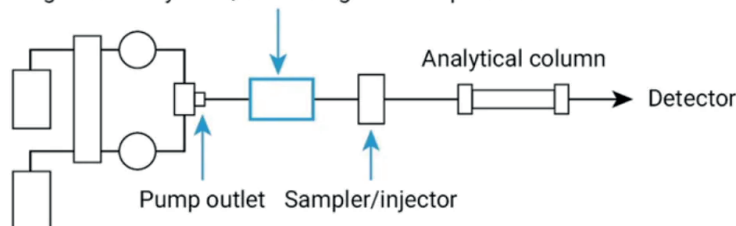

Technická specifikace

Maximální tlak	1,300 bar (130 MPa)
Rozsah pH	1 až 13
Systémový objem (dwell time)	2.1 × 20 mm 75 µL 3.0 × 75 mm 350 µL 4.6 × 50 mm 550 µL
Plnicí materiál	uhlík (carbon)
Konektor	10-32, female, coned
Rozsah teplot	Viz specifikace pumpy HPLC



Zde uvádíme přehled dostupných produktů:

Kat.č.	Popis produktu
Kity	
5067-1620	InfinityLab Quick Change Solvent Purifier Assembly, 2.1 × 20 mm
5067-1621	InfinityLab Quick Change Solvent Purifier Assembly, 3.0 × 75 mm
5067-1622	InfinityLab Quick Change Solvent Purifier Assembly, 4.6 × 50 mm
Kartridže	
5067-1623	InfinityLab Quick Change Solvent Purifier Cartridge, 2.1 × 20 mm, 1/pk
5067-1625	InfinityLab Quick Change Solvent Purifier Cartridge, 3.0 × 75 mm, 1/pk
5067-1627	InfinityLab Quick Change Solvent Purifier Cartridge, 4.6 × 50 mm, 1/pk
5067-1624	InfinityLab Quick Change Solvent Purifier Cartridge, 2.1 × 20 mm, 5/pk
5067-1626	InfinityLab Quick Change Solvent Purifier Cartridge, 3.0 × 75 mm, 5/pk
5067-1628	InfinityLab Quick Change Solvent Purifier Cartridge, 4.6 × 50 mm, 5/pk
Spojení kapilár (doporučení)	
5005-0057	Capillary, Stainless Steel, 0.17 × 160 mm, SL/SL
5004-0011	Capillary, Stainless Steel, 0.12 × 160 mm, SL/SL
Volitelné	
54320062	InfinityLab Cartridge Holder Clip for Use with InfinityLab LC Series Pumps

Agilent InfinityLab Quick Change Solvent Purifier User Guide

Nabízíme Vám možnost vyzkoušení produktu ZDARMA!

Try & Buy