

S novými 5Q Ultra Low-Bleed GC/MS kolonami

- ultra-low bleed provedení – zvyšuje přesnost dat a stabilitu základní linie
- vysoce inertní provedení – zvýšená odezva reaktivních, termolabilních látek, ideální pro stopové analýzy
- krátká doba pro kondicionaci kolony
- identická selektivita se stávajícími 5ms kolonami od Agilentu – jednoduché převedení původní metody na novou kolonu



Sleva 35 % promo kód: DB-5Q

Se spotřebním materiálem a kolonami špičkové kvality


- platí na celý sortiment spotřebního zboží pro GC a GC/MS systémy, včetně GC kolon
- představujeme **novou elektronickou publikaci GC and GC/MS Frequently Asked Questions** – nabízí odpovědi Agilent expertů na často kladené otázky GC a GCMS uživatelů od základních principů, pravidelné údržby systému až po vývoj metod a jejich optimalizaci, včetně užitečných tipů a triků při řešení běžných uživatelských potíží



Sleva 30 % promo kód: GC25

Kolony s pevným jádrem Poroshell

- HPLC a UHPLC kolony s povrchově porézními částicemi a pevným jádrem.
- víc jak 20 unikátních fází a velikosti částic 4 μm , 2.7 μm a 1.9 μm umožňuje
- široký výběr selektivity od tradiční HPLC až k UHPLC, včetně preparativních kolon

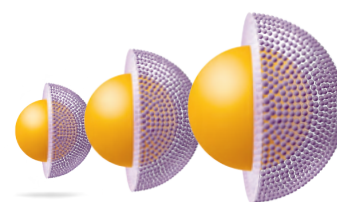

1.9 μm 2.7 μm 4.0 μm



Sleva 30 % promo kód: shell25

S V-groove nebulizérem s nepřekonatelnou robustností

- téměř žádné riziko ucpání či poškození
- ideální pro práci s nejnáročnějšími vzorky – s vysokou hodnotou TDS (30%) a/nebo s velkými nerozpuštěnými částicemi až do velikosti 350 um
- vyšší produktivita – snižuje se nebo úplně odpadá potřeba čištění po analýze
- inertní – PEEK tělo a keramická špička – kompatibilita i se vzorky obsahujícími HF
- snadná instalace – jednoduchá záměna za stávající nebulizér bez dalších úprav parametrů metody

- plně kompatibilní s dávkovacím systémem AVS 4/6/7


kat.č. G8020-69001

Sleva 30 % promo kód: Vneb

NOVINKY!

S plně rozebíratelnými hořáky pro ICP-OES série 5000

- možnost výměny jak injektoru, tak vnější trubice (outer tube set)
- flexibilita – s injektory různých velikostí a použitého materiálu – ideální pro náročné a různorodé aplikační požadavky bez ztráty citlivosti a robustnosti
- vyšší produktivita – snadná instalace injektoru a také údržba bez nutnosti vyjmutí hořáku ze systému
- snadná manipulace – rozebíratelné části hořáku bez zbytečných těsnění a o-kroužků


Sleva 30 % promo kód: 5000H

InfinityLab Quick Change Solvent Purifier – T&B

- čisticí kazeta na rozpouštědla navržena tak, aby snižovala problémy způsobené nečistotami pocházejícím z mobilní fáze a eliminovala utajené píky (ghost peaks)
- výměna po 6 měsících nebo pokud pokusy o proplachování selžou
- doporučené umístění kazety mezi výstup z pumpy a injektor


Kat.č.
5067-1620
5067-1621
5067-1622

Sleva 30 % promo kód: TB25