



KATALOG



Altium International s.r.o.

Na Jetelce 69/2 | 190 00 Praha 9 | Česká republika | t: +420 244 001 231

Obsah

Přístroje.....	3
Myčky laboratorního skla	3
Řada New CONCEPT – myčky šířky 60 cm	4
Řada New CONCEPT – myčky šířky 60 cm – sušící systém	10
Řada New CONCEPT – myčky šířky 90 cm – sušící systém	13
Řada Professional – myčky šířky 60 cm	16
Řada Professional – myčky šířky 90 cm se sušícím systémem	22
Řada Professional – velkokapacitní myčky.....	30
Řada Professional – dvoudvěřové laboratorní myčky	38
Autoklávy	46
Doplňky myček.....	47
Soklové a nosné rámy.....	64
Pomocná čerpadla na demineralizovanou vodu	66
Přídavná peristaltická čerpadla	70
Sledovatelnost.....	79
Příslušenství k myčkám	86
Úprava vody: Demineralizátory	87
Vozíky	89
Základní vozíky a vložky pro podpultové přístroje	89
Vstřikovací vozíky na sklo s úzkým hrdlem pro podpultové přístroje	92
Vozíky pro mytí pipet <i>pro podpultové přístroje</i>	115
Kombinované vstřikovací vozíky (pipety + úzké hrdlo) <i>pro podpultové přístroje</i>	117
Vozíky se vstřikováním pro velké sklo <i>pro podpultové přístroje</i>	119
Vozíky se vstřikováním pro vialky a konické centrifugační zkumavky <i>pro podpultové přístroje</i>	121
Základní vozíky a inserty <i>pro velkokapacitní přístroje</i>	124
Vozíky se vstřikováním pro sklo s úzkým hrdlem <i>pro velkokapacitní přístroje</i>	129
Vstřikovací vozíky na pipety <i>pro velkokapacitní přístroje</i>	140
Kombinované vozíky se vstřikováním (pipety + úzké hrdlo) <i>pro velkokapacitní myčky</i>	142
Vozíky se vstřikováním pro velké sklo	145
Vozíky se vstřikováním pro vialky a konické centrifugační zkumavky <i>pro velkokapacitní přístroje</i>	151
Systémy pro přenos	153
Stojany a košíky	155
Stojany pro lahve a kádinky	155
Stojánky na sklíčka a desky	157
Stojany na lahve.....	158
Stojany na zkumavky	160

Stojan na Petrihoisky	161
Spodní přihrádky na malé sklo a síťovina	162
SPECIÁLNÍ STOJANY	165
Košíky	166
Příslušenství pro vodu	167
Spotřební materiál	169
Detergenty a aditiva	172
Náhradní díly	174

Přístroje

Myčky laboratorního skla

Řada New CONCEPT – myčky šířky 60 cm

GW0260-00-00J (č. 850037)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA

- myčka pro mytí a dezinfekci skla a různého laboratorního materiálu
- mytí do 85 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- uživatelské rozhraní s dotykovým barevným displejem, současné zobrazení třech nezávislých úrovní provozních parametrů (program, stav průběhu, teplota/zbývající čas/A0/dávkování peristaltických čerpadel atd.)
- přední panel ze skla s LCD displejem a USB předním portem
- vybavena vizuálním a akustickým komunikačním systémem a alarmy
- dostupné programy: 7 výchozích + 1 servisní
- mikroprocesorové elektronické řízení se 3 bezpečnostními úrovněmi pro editaci a nastavování parametrů
- vnitřní paměť pro ukládání dat cyklů, parametrů a alarmů
- dodávána se softwarem pro připojení zařízení a monitorování cyklů a parametrů
- mycí komora a vnitřní dveře z nerez oceli AISI 304
- vnější panely z nerez oceli AISI 304
- 2 nezávislé úrovně mytí pomocí teleskopických tyčí
- aktivní termodynamické sušení
- dávkovač alkalického prášku
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro neutralizátor kyselých kapalin
- integrovaný vysoce účinný změkčovač vody se senzorem soli
- komunikace prostřednictvím zobrazení progresivního stavu mycího cyklu
- možnost chlazení odpadní vody až na 65 °C
- elektronický systém dveřního zámku
- připojení studené vody a demineralizované vody jako výchozí konfigurace
- výchozí elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max
- jednofázově konvertibilní: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 2,8 kW max.
- třífázově konvertibilní bez nulového vodiče: 230V 3~ - 50Hz - 19A - 7 kW max.
- k dispozici verze 60 Hz
- dodává se bez vozíků
- vnitřní pracovní rozměry Š x H x V: 525 x 490 x 570 mm
- vnější rozměry Š x H x V: 600 x 600 x 850 mm
- kapacita komory 147 litrů



DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE

GW0260-S0-00J
(č. 850040)

- **MYČKA LABORATORNÍHO SKLA S DRUHÝM DÁVKOVACÍM ČERPADLEM**
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro tekutý mycí prostředek

Volitelné příslušenství

- AS4060 - SADA PRO ZASTAVENÍ ÚNIKU VODY AQUA STOP
- B6040L - NEREZOVÝ SOKL PRO PŘÍSTROJE 60 CM SE ZÁMKEM
- IRCP - STROPNÍ STŘÍKACÍ RAMENO
- KITSOND - SOUPRAVA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ
- KITSUPPR – SADA PODPŮRNÝCH KOLEČEK HORNÍHO VOZÍKU V PODPULTU
- P14060 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÝ MYCÍ PROSTŘEDEK
- PAD1 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2R - SADA RELÉ PAD2
- PAD2X - NEREZOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- T6040 - NEREZOVÝ RÁM PRO PŘÍSTROJE 60 CM
- TOP60I – HORNÍ VESTAVBA 60 CM
- WD-EC-1 – JEDNOFÁZOVÉ ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
- WD-EC-3 – TŘÍFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ BEZ NULOVÉHO VODIČE

GW1245-S0-100 (č. 850055)**MYČKA LABORATORNÍHO SKLA**

- myčka skla pro mytí a dezinfekci skla a dalšího laboratorního materiálu
- mytí do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- uživatelské rozhraní s dotykovým barevným displejem, současné zobrazení třech nezávislých úrovní provozních parametrů (program, stav průběhu, teplota/zbývající čas/A0/dávkování peristaltických čerpadel atd.)
- přední panel ze skla s LCD displejem a USB předním portem
- vybavena vizuálním a akustickým komunikačním systémem a alarmy
- dostupné programy: 20 výchozích + 20 vlastních + 1 pro servis
- mikroprocesorové elektronické řízení se 3 bezpečnostními úrovněmi pro editaci a nastavování parametrů
- vnitřní paměť pro ukládání dat cyklů, parametrů a alarmů
- dodávána se softwarem pro připojení zařízení a monitorování cyklů a parametrů
- připravena k připojení Wi-Fi a Bluetooth
- mycí komora a vnitřní dveře z nerez oceli AISI 316L
- vnější panely z nerez oceli AISI 304
- 2 nezávislé úrovně mytí prostřednictvím teleskopických tyčí
- aktivní termodynamické sušení
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro tekutý mycí prostředek
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro neutralizátor kyselých kapalin
- možnost instalace 1 dalšího peristaltického čerpadla
- integrovaný vysoce účinný změkčovač vody se senzorem soli
- komunikace prostřednictvím zobrazení progresivního stavu mycího cyklu
- možnost chlazení odpadní vody až na 65 °C
- elektronický zámek dveří
- připojení studené vody a demineralizované vody jako výchozí konfigurace
- připravena na připojení teplé vody (nutno zakoupit jako volitelné příslušenství, č. T4260AC)
- vnější rozměry D x H x V: 450 x 620 x 850 mm
- vnitřní pracovní rozměry D x H x V: 370 x 480 x 570 mm
- elektrické připojení: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 3,3 kW max.
- k dispozici verze 60 Hz
- včetně zástrčky Schuko 16 A - 250 V
- včetně horního a spodního vozíku D-CS1 a D-CS2



Volitelné příslušenství

- KITSOND - SOUPRAVA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ
- KITSUPPR – SADA PODPŮRNÝCH KOLEČEK HORNÍHO VOZÍKU V PODPULTU
- P12145 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÝ MYCÍ PROSTŘEDEK
- PAD1 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU (NÁDRŽ > 85 CM)
- PAD2 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU (PODLAHOVÁ NÁDRŽ)
- PAD2-60 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU (PODLAHOVÁ NÁDRŽ)
- PAD2R - SADA RELÉ PAD2
- PAD2X - ST. NEREZOVÉ PŘÍDAVNÉ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU (PODLAHOVÁ NÁDRŽ)
- PAD2X-60 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU - 60 HZ (PODLAHOVÁ NÁDRŽ)
- TOP45I – HORNÍ VESTAVBA 45 CM
- WD-232PRINT – SÉRIOVÝ PORT RS232
- WD-LANI2 – KOMUNIKAČNÍ LAN KARTA
- WD-LS3060 – SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINTE – EXTERNÍ TISKÁRNA

GW1260-SC-000 (č. 850039)**LABORATORNÍ MYČKA SKLA S KONDENZÁTOREM PÁRY A DRUHÝM DÁVKOVACÍM ČERPADLEM**

- myčka skla pro mytí a dezinfekci skla a dalšího laboratorního materiálu
- mytí do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- uživatelské rozhraní s dotykovým barevným displejem, současné zobrazení na třech nezávislých úrovních provozních parametrů (program, stav průběhu, teplota/zbývající čas/A0/dávkování peristaltických čerpadel atd.)
- přední panel ze skla s LCD displejem a USB předním portem
- vybavena vizuálním a akustickým komunikačním systémem a alarmy
- dostupné programy: 20 výchozích + 20 vlastních + 1 pro servis
- mikroprocesorové elektronické řízení se 3 bezpečnostními úrovněmi pro editaci a nastavování parametrů
- vnitřní paměť pro ukládání dat cyklů, parametrů a alarmů
- dodávána se softwarem pro připojení zařízení a monitorování cyklů a parametrů
- připravena k připojení Wi-Fi a Bluetooth
- mycí komora a vnitřní dveře z nerez oceli AISI 316L
- vnější panely z nerez oceli AISI 304
- 2 nezávislé úrovně mytí prostřednictvím teleskopických tyčí
- aktivní termodynamické sušení
- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro tekutý mycí prostředek
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro neutralizátor kyselých kapalin
- možnost instalace 1 dalšího peristaltického čerpadla
- integrovaný vysoce účinný změkčovač vody se senzorem soli
- komunikace prostřednictvím zobrazení progresivního stavu mycího cyklu
- možnost chlazení odpadní vody až na 65 °C
- elektronický zámek dveří
- připojení studené vody a demineralizované vody jako výchozí konfigurace
- připravena na připojení teplé vody (nutno zakoupit jako volitelné příslušenství, č. T4260AC)
- výchozí elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max
- jednofázově konvertibilní: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 2,8 kW max.
- třífázově konvertibilní bez nulového vodiče: 230V 3~ - 50Hz - 19A - 7 kW max.
- k dispozici verze 60 Hz
- dodává se bez vozíků
- vnitřní pracovní rozměry Š x H x V: 525 x 490 x 570 mm
- vnější rozměry Š x H x V: 600 x 600 x 850 mm
- kapacita komory 147 litrů



DALŠÍ MOŽNÍ KONFIGURACE

GW1260-00-000
(č. 850004)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA

- zásobník na práškový mycí prostředek

GW1260-S0-000
(č. 850016)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA S DRUHÝM DÁVKOVACÍM ČERPADLEM

- peristaltická dávkovací pumpa pro tekutý mycí prostředek

GW1260-0C-000
(č. 850044)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA S KONDENZÁTOREM PÁRY

- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody
- zásobník na práškový mycí prostředek

Volitelné příslušenství

- AS4060 - SADA PRO ZASTAVENÍ ÚNIKU VODY AQUA STOP
- B6040L - NEREZOVÝ SOKL PRO PŘÍSTROJE 60 CM SE ZÁMKEM
- FLUX4060 - OVLÁDÁNÍ DÁVKOVÁNÍ PRO PŘÍDAVNÁ PERISTALTICKÁ ČERPADLA
- IRCP - STROPNÍ STŘÍKACÍ RAMENO
- KITSOND - SOUPRAVA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ
- KITSUPPR – SADA PODPŮRNÝCH KOLEČEK HORNÍHO VOZÍKU V PODPULTU
- P14060 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÝ MYCÍ PROSTŘEDEK
- P34260 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAUSTICKOU SODU (HYDROXID SODNÝ)
- P44260 – PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÉ ODPĚŇOVAČE
- PAD1 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2R - SADA RELÉ PAD2
- PAD2X - NEREZOVÉ PŘÍDAVNÉ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- T4260AC - SYSTÉM DODÁVKY TEPLÉ VODY
- T6040 - NEREZOVÝ RÁM PRO PŘÍSTROJE 60 CM
- TOP60I – HORNÍ VESTAVBA 60 CM
- WD-232PRINT – SÉRIOVÝ PORT RS232
- • WD-EC-1 – JEDNOFÁZOVÉ ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
- • WD-EC-3 – TŘÍFÁZOVÉ ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ BEZ NULOVÉHO VODIČE
- • WD-LANI2- KOMUNIKAČNÍ LAN KARTA
- • WD-LS3060 – SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- • WD-PRINTE2 – EXTERNÍ TISKÁRNA

Řada New CONCEPT – myčky šířky 60 cm – sušící systém

GW4260-SC-00G (č. 850056)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SYSTÉMEM SUŠENÍ, DRUHÝM DÁVKOVACÍM ČERPADLEM, KONDENZÁTOREM PÁRY A SKLENĚNÝMI DVÍŘKY

- myčka pro mytí a dezinfekci skla a dalšího laboratorního materiálu
- mytí do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- uživatelské rozhraní s dotykovým barevným displejem, současné zobrazení na třech nezávislých úrovních provozních parametrů (program, stav průběhu, teplota/zbývající čas/AO/dávkování peristaltických čerpadel atd.)
- přední panel ze skla s LCD displejem a USB předním portem
- vybavena vizuálním a akustickým komunikačním systémem a alarmy
- dostupné programy: 20 výchozích + 20 vlastních + 1 pro servis
- mikroprocesorové elektronické řízení se 3 bezpečnostními úrovněmi pro editaci a nastavování parametrů
- vnitřní paměť pro ukládání dat cyklů, parametrů a alarmů
- dodávána se softwarem pro připojení zařízení a monitorování cyklů a parametrů
- připravena k připojení Wi-Fi a Bluetooth
- mycí komora a vnitřní dveře z nerez oceli AISI 316L
- vnější panely z nerez oceli AISI 304
- dveře se skleněným průzorem
- 2 nezávislé úrovně mytí prostřednictvím teleskopických tyčí
- systém nuceného sušení horkým vzduchem se vzduchovým filtrem 98% DOP
- připravena pro absolutní HEPA filtr H14 (lze zakoupit jako volitelná vybava č. AF4060)
- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro tekutý mycí prostředek
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro neutralizátor kyselých kapalin
- možnost instalace 1 dalšího peristaltického čerpadla
- integrovaný vysoce účinný změkčovač vody se senzorem soli
- komunikace prostřednictvím zobrazení progresivního stavu mycího cyklu
- možnost chlazení odpadní vody až na 65 °C
- elektronický zámek dveří
- připojení studené vody a demineralizované vody jako výchozí konfigurace
- připravena na připojení teplé vody (nutno zakoupit jako volitelné příslušenství, č. T4260AC)
- výchozí elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max
- jednofázově konvertibilní: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 2,8 kW max.
- třífázově konvertibilní bez nulového vodiče: 230V 3~ - 50Hz - 19A - 7 kW
- k dispozici verze 60 Hz



- dodává se bez vozíků
- vnitřní pracovní rozměry Š x H x V: 525 x 490 x 570 mm
- vnější rozměry Š x H x V: 600 x 600 x 850 mm
- kapacita komory 147 litrů

DALŠÍ MOŽNÍ KONFIGURACE

GW4260-00-000
(č. 850026)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SYSTÉMEM SUŠENÍ

- zásobník na práškový mycí prostředek

GW4260-S0-000
(č. 850005)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SYSTÉMEM SUŠENÍ A DRUHÝM DÁVKOVACÍM ČERPADLEM

- peristaltické dávkovací čerpadlo pro tekutý mycí prostředek

GW4260-0C-000
(č. 850044)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SYSTÉMEM SUŠENÍ A KONDENZÁTOREM PÁRY

- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody
- zásobník na práškový mycí prostředek

GW4260-SC-000
(č. 850036)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SYSTÉMEM SUŠENÍ, DRUHÝM DÁVKOVACÍM ČERPADLEM A KONDENZÁTOREM PÁRY

- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro tekutý mycí prostředek

Volitelné příslušenství

- AF4060 - ABSOLUTNÍ HEPA FILTR
- AS4060 - SADA PRO ZASTAVENÍ ÚNIKU VODY AQUA STOP
- B6040L - NEREZOVÝ SOKL PRO PŘÍSTROJE 60 CM SE ZÁMKEM
- FLUX4060 - OVLÁDÁNÍ DÁVKOVÁNÍ PRO PŘÍDAVNÁ PERISTALTICKÁ ČERPADLA
- IRCP - STROPNÍ STŘÍKACÍ RAMENO
- KITSOND - SOUPRAVA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ
- KITSUPPR – SADA PODPŮRNÝCH KOLEČEK HORNÍHO VOZÍKU V PODPULTU
- P14060 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÝ MYCÍ PROSTŘEDEK
- P34260 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAUSTICKOU SODU (HYDROXID SODNÝ)
- P44260 – PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÉ ODPĚŇOVAČE
- PAD1 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2R - SADA RELÉ PAD2
- PAD2X - NEREZOVÉ PŘÍDAVNÉ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- T4260AC - SYSTÉM DODÁVKY TEPLÉ VODY
- T6040 - NEREZOVÝ RÁM PRO PŘÍSTROJE 60 CM
- TOP60I - VESTAVBA TOP 60 CM
- WD-232PRINT – SÉRIOVÝ PORT RS232
- WD-EC-1 – JEDNOFÁZOVÉ ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
- WD-EC-3 – TŘÍFÁZOVÉ ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ BEZ NULOVÉHO VODIČE
- WD-LAN12 – KOMUNIKAČNÍ LAN KARTA
- WD-LS3060 – SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINTE2 – EXTERNÍ TISKÁRNA

Řada New CONCEPT – myčky šířky 90 cm – sušící systém

GW4290-SC-00G (č. 850064)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SYSTÉMEM SUŠENÍ, DRUHÝM DÁVKOVACÍM ČERPADLEM, KONDENZÁTOREM PÁRY A SK. DVEŘMI

- myčka pro mytí a dezinfekci skla a různého laboratorního materiálu
- mytí do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- uživatelské rozhraní s dotykovým barevným displejem, současné zobrazení na třech nezávislých úrovních provozních parametrů (program, stav průběhu, teplota/zbývající čas/AO/dávkování peristaltických čerpadel atd.)
- přední panel ze skla s LCD displejem a USB předním portem
- vybavena vizuálním a akustickým komunikačním systémem a alarmy
- dostupné programy: 20 výchozích + 20 vlastních + 1 pro servis
- mikroprocesorové elektronické řízení se 3 bezpečnostními úrovněmi pro editaci a nastavování parametrů
- vnitřní paměť pro ukládání dat cyklů, parametrů a alarmů
- dodávána se softwarem pro připojení zařízení a monitorování cyklů a parametrů
- připravena k připojení Wi-Fi a Bluetooth
- mycí komora a vnitřní dveře z nerez oceli AISI 316L
- vnější panely z nerez oceli AISI 304
- dveře se skleněným průzorem
- přihrádka na mycí prostředek s předním teleskopickým otvorem, kapacita nádrží 2 x 5 litrů (až 4 s volitelným příslušenstvím č. TANKBSK)
- 2 nezávislé úrovně mytí prostřednictvím teleskopických tyčí
- systém nuceného sušení horkým vzduchem se vzduchovým filtrem 98% DOP
- připravena pro absolutní HEPA filtr H14 (lze zakoupit jako volitelná vybava č. AF4060)
- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro tekutý mycí prostředek
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro neutralizátor kyselých kapalin
- možnost instalace 2 dalších peristaltických čerpadel
- integrovaný vysoce účinný změkčovač vody se senzorem soli
- komunikace prostřednictvím zobrazení progresivního stavu mycího cyklu
- možnost chlazení odpadní vody až na 65 °C
- elektronický dveřní zámek pro bezpečnost uživatele
- připojení studené vody a demineralizované vody jako výchozí konfigurace
- připravena na připojení teplé vody (nutno zakoupit jako volitelné příslušenství, č. T4260AC)
- výchozí elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max
- jednofázově konvertibilní: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 2,8 kW max.
- třífázově konvertibilní bez nulového vodiče: 230V 3~ - 50Hz - 19A - 7 kW
- k dispozici verze 60 Hz



- dodává se bez vozíků
- vnitřní pracovní rozměry Š x H x V: 525 x 490 x 570 mm
- vnější rozměry Š x H x V: 900 x 600 x 850 mm
- kapacita komory 147 litrů

DALŠÍ MOŽNÍ KONFIGURACE

GW4290-00-000
(č. 850027)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SYSTÉMEM SUŠENÍ

- Zásobník na práškový mycí prostředek

GW4290-S0-000
(č. 850042)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SYSTÉMEM SUŠENÍ A DRUHÝM DÁVKOVACÍM ČERPADLEM

- Peristaltické dávkovací čerpadlo pro tekutý mycí prostředek

GW4290-0C-000
(č. 850010)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SYSTÉMEM SUŠENÍ A KONDENZÁTOREM PÁRY

- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody
- zásobník na práškový mycí prostředek

GW4290-SC-000
(č. 850048)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SYSTÉMEM SUŠENÍ, DRUHÝM DÁVKOVACÍM ČERPADLEM A KONDENZÁTOREM PÁRY

- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody
- peristaltické dávkovací čerpadlo pro tekutý mycí prostředek

Volitelné příslušenství

- AF4060 - ABSOLUTNÍ HEPA FILTR
- AS4190 - SADA PRO ZASTAVENÍ ÚNIKU VODY AQUA STOP
- B9040L – NEREZOVÝ SOKL PRO MYČKY 90 CM SE ZÁMKEM
- FLUX4060 - OVLÁDÁNÍ DÁVKOVÁNÍ PRO PŘÍDAVNÁ PERISTALTICKÁ ČERPADLA
- IRCP - STROPNÍ STŘÍKACÍ RAMENO
- KITSOND - SOUPRAVA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ
- KITSUPPR – SADA PODPŮRNÝCH KOLEČEK HORNÍHO VOZÍKU V PODPULTU
- P14190 – PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO TEKUTÝ MYCÍ PROSTŘEDEK
- P34290 – PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAUSTICKOU SODU (HYDROXID SODNÝ)
- P44290 – PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAPALNÉ ODPĚŇOVAČE
- PAD1 – POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2R - SADA RELÉ PAD2
- PAD2X - NEREZOVÉ PŘÍDAVNÉ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- T4260AC - SYSTÉM DODÁVKY TEPLÉ VODY
- T9040 - NEREZOVÝ RÁM PRO PŘÍSTROJE 90 CM
- TANKBSK – DRŽÁK NA HORNÍ KOŠÍK NA KANYSTRY
- TOP90IC – HORNÍ VESTAVBA 90 CM
- WD-EC4290-1 - JEDNOFÁZOVÉ ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
- WD-EC4290-3 - TŘÍFÁZOVÉ ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ BEZ NULOVÉHO VODIČE
- WD-LAN4290 - KOMUNIKAČNÍ LAN KARTA
- WD-LS4190 - SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINT4290 - EXTERNÍ TISKÁRNA

Řada Professional – myčky šířky 60 cm

GW3060BX (č. 860141)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA

- mytí do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- programy: 20 výchozích + 10 vlastních
- 3 mikroprocesory programovatelné elektronické řízení
- sériový port RS232 pro připojení k externí tiskárně nebo PC
- grafický displej 128 x 64 pixelů pro zprávy v různých jazycích
- aktivní termodynamické sušení
- dávkovač alkalického prášku
- peristaltické čerpadlo pro neutralizátor kapalin
- možnost instalace až 3 přídatných peristaltických čerpadel
- mycí komora a vnitřní dveře z nerez oceli AISI 316L
- vnější panely z nerez oceli AISI 304
- 2 nezávislé úrovně mytí pomocí teleskopických tyčí
- vnější rozměry D x H x V: 600 x 640 x 850 mm
- vnitřní pracovní rozměry D x H x V: 525 x 490 x 570 mm
- zabudovaný změkčovač vody se senzorem soli
- připojení studené vody, horké vody a demineralizované vody
- elektronický systém dveřního zámku pro bezpečnost uživatele
- elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max (přepínatelné na jednofázové 230 V)
- k dispozici verze 60 Hz
- bez vozíků



DALŠÍ MOŽNÍ KONFIGURACE

GW3060BXC (č. 860241)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA

- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody

GW3060BXCA (č. 860700)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA

- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody
- pomocné čerpadlo pro beztlakou demineralizovanou vodu

GW3060BXA (č. 860699)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA

- pomocné čerpadlo pro beztlakou demineralizovanou vodu

Volitelné příslušenství

- ADU - UNIVERZÁLNÍ PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÁ ADITIVA
- B6040L - NEREZOVÝ SOKL PRO STROJE 60 CM SE ZÁMKEM
- IC5090 - KONTROLA VODIVOSTI KVALITY MYTÍ
- IRCP - STROPNÍ STŘÍKACÍ RAMENO
- KITSOND - SOUPRAVA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ
- KITSUPPR - SADA PODPŮRNÝCH KOLEČEK HORNÍHO VOZÍKU V PODPULTU
- PAD - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2-60 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X - NEREZOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X-60 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU - 60 HZ
- T6040 - NEREZOVÝ RÁM PRO STROJE 60 CM
- TOP60I – HORNÍ VESTAVBA 60 CM
- WD-LANE - DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ KARTA
- WD-LS3060 - SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINTE - EXTERNÍ TISKÁRNA
- WD-VDS - DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

GW3060P (č. 860190)**MYČKA LABORATORNÍHO SKLA - PETROCHEMIE**

- mytí do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- programy: 20 výchozích + 10 vlastních
- 3 mikroprocesory programovatelné elektronické řízení
- sériový port RS232 pro připojení k externí tiskárně nebo PC
- grafický displej 128 x 64 pixelů pro zprávy v různých jazycích
- aktivní termodynamické sušení
- peristaltické čerpadlo pro tekutý mycí prostředek
- peristaltické čerpadlo pro tekutý neutralizátor
- peristaltické čerpadlo pro roztok kaustické sody
- peristaltické čerpadlo pro přísadu proti pění
- mycí komora a vnitřní dveře z nerez oceli AISI 316L
- vnější panely z nerez oceli AISI 304
- 2 nezávislé úrovně mytí pomocí teleskopických tyčí
- vnější rozměry D x H x V: 600 x 640 x 850 mm
- vnitřní pracovní rozměry D x H x V: 525 x 490 x 570 mm
- zabudovaný změkčovač vody se senzorem soli
- připojení studené vody, horké vody a demineralizované vody
- elektronický systém dveřního zámku pro bezpečnost uživatele
- elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max (přepínatelné na jednofázové 230 V)
- k dispozici verze 60 Hz
- sada náhradních dílů pro petrochemii
- bez vozíků

**DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE**

GW3060PA
(č. 860701)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA

- posilovací čerpadlo na beztlakovou demineralizovanou vodu

Volitelné příslušenství

- B6040L - NEREZOVÝ SOKL PRO PŘÍSTROJE 60 CM SE ZÁMKEM
- IC5090 - KONTROLA VODIVOSTI KVALITY MYTÍ
- IRCP - STROPNÍ STŘÍKACÍ RAMENO
- KITSOND - SOUPRAVA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ
- KITSUPPR - SADA KOLEČEK PODPOR HORNÍHO VOZÍKU V PODPULTU
- PAD - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2-60 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X – NEREZOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X-60 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU - 60 HZ
- T6040 - NEREZOVÝ RÁM PRO PŘÍSTROJE 60 CM
- TOP60I – HORNÍ VESTAVBA 60 CM
- WD-LANE - DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ KARTA
- WD-LS3060 - SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINTE - EXTERNÍ TISKÁRNA
- WD-VDS - DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

GW3060S (č. 860189)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA

- mytí do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- programy: 20 výchozích + 10 vlastních
- 3 mikroprocesory programovatelné elektronické řízení
- sériový port RS232 pro připojení k externí tiskárně nebo PC
- grafický displej 128 x 64 pixelů pro zprávy v různých jazycích
- aktivní termodynamické sušení
- peristaltické čerpadlo pro tekutý mycí prostředek
- peristaltické čerpadlo pro tekutý neutralizátor
- možnost instalace až 2 dalších peristaltických čerpadel
- mycí komora a vnitřní dveře z nerez oceli AISI 316L
- vnější panely z nerez oceli AISI 304
- 2 nezávislé úrovně mytí pomocí teleskopických tyčí
- vnější rozměry D x H x V: 600 x 640 x 850 mm
- vnitřní pracovní rozměry D x H x V: 525 x 490 x 570 mm
- zabudovaný změkčovač vody se senzorem soli
- připojení studené vody, horké vody a demineralizované vody
- elektronický systém dveřního zámku pro bezpečnost uživatele
- elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max (přepínatelné na jednofázové 230 V)
- k dispozici verze 60 Hz
- bez vozíků



DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE

GW3060SA
(č. 860702)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA

- posilovací čerpadlo na beztlakovou demineralizovanou vodu

GW3060SC
(č. 860210)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA

- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody

GW3060SCA
(č. 860703)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA

- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody
- posilovací čerpadlo na beztlakovou demineralizovanou vodu

Volitelné příslušenství

- ADU - UNIVERZÁLNÍ PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO TEKUTÁ ADITIVA
- B6040L - NEREZOVÝ SOKL PRO PŘÍSTROJE 60 CM SE ZÁMKEM
- IC5090 – KONTROLA VODIVOSTI KVALITY MYTÍ
- IRCP - STROPNÍ STŘÍKACÍ RAMENO
- KITSOND - SOUPRAVA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ
- KITSUPPR - SADA KOLEČEK PODPOR HORNÍHO VOZÍKU V PODPULTU
- PAD - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2-60 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X - NEREZOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X-60 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU - 60 HZ
- T6040 - NEREZOVÝ RÁM PRO PŘÍSTROJE 60 CM
- TOP60I - HORNÍ VESTAVBA 60 CM
- WD-LANE - DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ KARTA
- WD-LS3060 - SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINTE - EXTERNÍ TISKÁRNA
- WD-VDS - DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

Řada Professional – myčky šířky 90 cm se sušicím systémem

GW4090 (č. 860139)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠICÍM SYSTÉMEM

- mytí do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- programy: 20 výchozích + 10 vlastních
- 3 mikroprocesory programovatelné elektronické řízení
- sériový port RS232 pro připojení k externí tiskárně nebo PC
- grafický displej 128 x 64 pixelů pro zprávy v různých jazycích
- systém nuceného sušení horkým vzduchem se vzduchovým filtrem 98% DOP
- peristaltické čerpadlo pro tekutý mycí prostředek
- peristaltické čerpadlo pro tekutý neutralizátor
- možnost instalace až 2 dalších peristaltických čerpadel
- mycí komora a vnitřní dveře z nerez oceli AISI 316L
- vnější panely z nerez oceli AISI 304
- skříň na mycí prostředek vyrobená z nerez oceli AISI 304 2 x 5 litrové kanystry nebo 4 x 2 litrové kanystry
- 2 nezávislé úrovně mytí pomocí teleskopických tyčí
- vnější rozměry D x H x V: 900 x 640 x 850 mm
- vnitřní pracovní rozměry D x H x V: 525 x 490 x 570 mm
- zabudovaný změkčovač vody se senzorem soli
- připojení studené vody, horké vody a demineralizované vody
- elektronický systém dveřního zámku pro bezpečnost uživatele
- elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max (přepínatelné na jednofázové 230 V)
- k dispozici verze 60 Hz
- bez vozíků



DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE

GW4090A (č. 860236)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠICÍM SYSTÉMEM

- posilovací čerpadlo na beztlakovou demineralizovanou vodu

GW4090C (č. 860191)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠICÍM SYSTÉMEM

- vysoce účinný parní kondenzátor se vstřikováním studené vody

GW4090CA (č. 860709)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠICÍM SYSTÉMEM

- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody
- posilovací čerpadlo na beztlakovou demineralizovanou vodu

Volitelné příslušenství

- ADU - UNIVERZÁLNÍ PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO TEKUTÁ ADITIVA
- AF4050 - ABSOLUTNÍ HEPA FILTR
- B9040L - NEREZOVÝ SOKL PRO PŘÍSTROJE 90 CM SE ZÁMKEM
- IC5090 - KONTROLA VODIVOSTI KVALITY MYTÍ
- IRCP - STROPNÍ STŘÍKACÍ RAMENO
- KITSOND - SOUPRAVA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ
- KITSUPPR - SADA KOLEČEK PODPOR HORNÍHO VOZÍKU V PODPULTU
- P34090 – PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAUSTICKOU SODU
- P44090 – PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO TEKUTÝ ODPĚŇOVAČ
- PAD - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2-60 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X – NEREZOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X-60 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU - 60 HZ
- T9040 - NEREZOVÝ RÁM PRO PŘÍSTROJE 90 CM
- TOP90I - HORNÍ VESTAVBA 90 CM
- WD-LANI - DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ KARTA
- WD-LS5090 - SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINT - PANEL TISKÁRNY
- WD-PRINTE - EXTERNÍ TISKÁRNA

GW4090BXC (č. 860314)**MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠICÍM SYSTÉMEM A KONDENZÁTOREM PÁRY**

- mytí do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- programy: 20 výchozích + 10 vlastních
- 3 mikroprocesory programovatelné elektronické řízení
- sériový port RS232 pro připojení k externí tiskárně nebo PC
- grafický displej 128 x 64 pixelů pro zprávy v různých jazycích
- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody
- systém nuceného sušení horkým vzduchem se vzduchovým filtrem 98% DOP
- dávkovač alkalického prášku
- peristaltické čerpadlo pro tekutý neutralizátor
- možnost instalace až 3 dalších peristaltických čerpadel
- mycí komora a vnitřní dveře z nerez oceli AISI 316L
- vnější panely z nerez oceli AISI 304
- skříň na mycí prostředek vyrobená z nerez oceli AISI 304 2 x 5 litrové kanystry nebo 4 x 2 litrové kanystry
- 2 nezávislé úrovně mytí pomocí teleskopických tyčí
- vnější rozměry D x H x V: 900 x 640 x 850 mm
- vnitřní pracovní rozměry D x H x V: 525 x 490 x 570 mm
- zabudovaný změkčovač vody se senzorem soli
- připojení studené vody, horké vody a demineralizované vody
- elektronický systém dveřního zámku pro bezpečnost uživatele
- elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max (přepínatelné na jednofázové 230 V)
- k dispozici verze 60 Hz
- bez vozíků

**DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE**

GW4090BXCA
(č. 860708)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠICÍM SYSTÉMEM A KONDENZÁTOREM PÁRY

- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim se vstřikováním studené vody
- posilovací čerpadlo na beztlakovou demineralizovanou vodu

Volitelné příslušenství

- ADU - UNIVERZÁLNÍ PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO TEKUTÁ ADITIVA
- AF4050 - ABSOLUTNÍ HEPA FILTR
- B9040L - NEREZOVÝ SOKL PRO PŘÍSTROJE 90 CM SE ZÁMKEM
- IC5090 - KONTROLA VODIVOSTI KVALITY MYTÍ
- IRCP - STROPNÍ STŘÍKACÍ RAMENO
- KITSOND - SOUPRAVA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ
- KITSUPPR - SADA KOLEČEK PODPOR HORNÍHO VOZÍKU V PODPULTU
- P34090 – PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAUSTICKOU SODU
- P44090 – PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO TEKUTÝ ODPĚŇOVAČ
- PAD - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2-60 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X – NEREZOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X-60 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU - 60 HZ
- T9040 - NEREZOVÝ RÁM PRO PŘÍSTROJE 90 CM
- TOP90I - HORNÍ VESTAVBA 90 CM
- WD-LANI - DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ KARTA
- WD-LS5090 - SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINT - PANEL TISKÁRNY
- WD-PRINTE - EXTERNÍ TISKÁRNA

GW4090BXP (č. 860637)**MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠICÍM SYSTÉMEM**

- mytí do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- programy: 20 výchozích + 10 vlastních
- 3 mikroprocesory programovatelné elektronické řízení
- sériový port RS232 pro připojení k externí tiskárně nebo PC
- grafický displej 128 x 64 pixelů pro zprávy v různých jazycích
- systém nuceného sušení horkým vzduchem se vzduchovým filtrem 98% DOP
- dávkovač alkalického prášku
- peristaltické čerpadlo pro tekutý mycí prostředek
- peristaltické čerpadlo pro neutralizátor kapalin
- peristaltické čerpadlo pro roztok hydroxidu sodného
- peristaltické čerpadlo pro přísadu proti pění
- mycí komora a vnitřní dveře z nerez oceli AISI 316L
- vnější panely z nerez oceli AISI 304
- skříň na mycí prostředek vyrobená z nerez oceli AISI 304 2 x 5 litrové kanystry nebo 4 x 2 litrové kanystry
- 2 nezávislé úrovně mytí pomocí teleskopických tyčí
- vnější rozměry D x H x V: 900 x 640 x 850 mm
- vnitřní pracovní rozměry D x H x V: 525 x 490 x 570 mm
- zabudovaný změkčovač vody se senzorem soli
- připojení studené vody, horké vody a demineralizované vody
- elektronický systém dveřního zámku pro bezpečnost uživatele
- elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max (přepínatelné na jednofázové 230 V)
- k dispozici verze 60 Hz
- sada náhradních dílů pro petrochemii
- bez vozíků

**Volitelné příslušenství**

- ADU - UNIVERZÁLNÍ PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO TEKUTÁ ADITIVA
- AF4050 - ABSOLUTNÍ HEPA FILTR
- B9040L - NEREZOVÝ SOKL PRO PŘÍSTROJE 90 CM SE ZÁMKEM
- IC5090 - KONTROLA VODIVOSTI KVALITY MYTÍ
- IRCP - STROPNÍ STŘÍKACÍ RAMENO
- KITSOND - SOUPRAVA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ
- KITSUPPR - SADA KOLEČEK PODPOR HORNÍHO VOZÍKU V PODPULTU
- P34090 – PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAUSTICKOU SODU
- P44090 – PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO TEKUTÝ ODPĚŇOVAČ

- PAD - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2-60 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X – NEREZOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X-60 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU - 60 HZ
- T9040 - NEREZOVÝ RÁM PRO PŘÍSTROJE 90 CM
- TOP90I - HORNÍ VESTAVBA 90 CM
- WD-LANI - DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ KARTA
- WD-LS5090 - SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINT - PANEL TISKÁRNY
- WD-PRINTE - EXTERNÍ TISKÁRNA
- WD-VDS - DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

GW4090P (č. 860634)**MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠICÍM SYSTÉMEM - PETROCHEMIE**

- mytí do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- programy: 20 výchozích + 10 vlastních
- 3 mikroprocesory programovatelné elektronické řízení
- sériový port RS232 pro připojení k externí tiskárně nebo PC
- grafický displej 128 x 64 pixelů pro zprávy v různých jazycích
- systém nuceného sušení horkým vzduchem se vzduchovým filtrem 98% DOP
- dávkovač alkalického prášku
- peristaltické čerpadlo pro tekutý mycí prostředek
- peristaltické čerpadlo pro neutralizátor kapalin
- peristaltické čerpadlo pro roztok hydroxidu sodného
- peristaltické čerpadlo pro přísadu proti pění
- mycí komora a vnitřní dveře z nerez oceli AISI 316L
- vnější panely z nerez oceli AISI 304
- skříň na mycí prostředek vyrobená z nerez oceli AISI 304 2 x 5 litrové kanystry nebo 4 x 2 litrové kanystry
- 2 nezávislé úrovně mytí pomocí teleskopických tyčí
- vnější rozměry D x H x V: 900 x 640 x 850 mm
- vnitřní pracovní rozměry D x H x V: 525 x 490 x 570 mm
- zabudovaný změkčovač vody se senzorem soli
- připojení studené vody, horké vody a demineralizované vody
- elektronický systém dveřního zámku pro bezpečnost uživatele
- elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max (přepínatelné na jednofázové 230 V)
- k dispozici verze 60 Hz
- sada náhradních dílů pro petrochemii
- bez vozíků

**DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE**

GW4090PA
(č. 860710)

MYČKA LABORATORNÍHO SKLA SE SUŠICÍM SYSTÉMEM

- posilovací čerpadlo na beztlakovou demineralizovanou vodu

Volitelné příslušenství

- ADU - UNIVERZÁLNÍ PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO TEKUTÁ ADITIVA
- AF4050 - ABSOLUTNÍ HEPA FILTR
- B9040L - NEREZOVÝ SOKL PRO PŘÍSTROJE 90 CM SE ZÁMKEM
- IC5090 - KONTROLA VODIVOSTI KVALITY MYTÍ
- IRCP - STROPNÍ STŘÍKACÍ RAMENO
- KITSOND - SOUPRAVA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ

- KITSUPPR - SADA KOLEČEK PODPOR HORNÍHO VOZÍKU V PODPULTU
- P34090 – PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO KAUSTICKOU SODU
- P44090 – PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO TEKUTÝ ODPĚŇOVAČ
- PAD - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2-60 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X – NEREZOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X-60 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU - 60 HZ
- T9040 - NEREZOVÝ RÁM PRO PŘÍSTROJE 90 CM
- TOP90I - HORNÍ VESTAVBA 90 CM
- WD-LANI - DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ KARTA
- WD-LS5090 - SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINT - PANEL TISKÁRNY
- WD-PRINTE - EXTERNÍ TISKÁRNA
- WD-VDS - DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

Řada Professional – velkokapacitní myčky

GW6010ML (č. 860830)

VELKOKAPACITNÍ LABORATORNÍ MYČKA S JEDNODÍLNÝMI SKLENĚNÝMI DVEŘMI (234 LT)

- mytí do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- až 5 nastavitelných úrovní kapacity
- programy: 20 výchozích + 20 vlastních
- vícejazyčný TFT barevný dotykový displej
- proces chráněný heslem různých úrovní
- integrovaná vestavěná tiskárna (volitelně)
- USB port pro stahování protokolu mycích cyklů
- ethernetový port pro připojení LAN (volitelné)
- 1 rozkládací celoskleněná dvířka
- elektronický dveřní zámek pro bezpečnost uživatele
- vysokotlaký systém sušení horkým vzduchem
- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim (volitelně)
- peristaltické čerpadlo pro tekutý mycí prostředek
- peristaltické čerpadlo pro neutralizátor kapalin
- možnost instalace až 2 dalších peristaltických čerpadel
- skříňka na mycí prostředek s odnímatelným tácem pro uložení až 3 x 5 litrových kanystrů + 1 x 1 litrový kanystr
- mycí komora z nerez oceli AISI 316L
- vnější panely z nerez oceli AISI 304
- vnější rozměry D x H x V: 650 x 720 x 1950 mm
- vnitřní pracovní rozměry D x H x V: 550 x 620 x 685 mm
- připojení studené vody, horké vody a demineralizované vody
- připojení podlahové vpusti
- vypouštěcí čerpadlo (volitelné)
- elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 13 kW max
- k dispozici verze 60 Hz
- bez vozíků
- kompatibilní s inserty typu „R“



DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE

GW6010MLX
(č. 860807)

VELKOKAPACITNÍ LABORATORNÍ MYČKA S JEDNODÍLNÝMI NEREZOVÝMI DVEŘMI (234 LT)

- Nerezové vnitřní dveře

Volitelné příslušenství

- AF4050 - ABSOLUTNÍ HEPA FILTR
- DRAINP6010 - VYPOUŠTĚCÍ ČERPADLO NA STĚNU
- ESVC10 - JISTIČ VÝFUKU 6010-7010
- IC6010 – SENSOR KONTROLY VODIVOSTI KVALITY MYTÍ
- KITSOND10 - SADA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ
- LED6010 - LED OSVĚTLENÍ PRO MYCÍ KOMORU
- P46010L - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO DÁVKOVÁNÍ ROZTOKU KAPALNÝCH PŘÍRAD PROTI PĚNĚNÍ
- PAD26010 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X6010 - NEREZOVÉ PŘÍDAVNÉ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- STEAMCO60 - KONDENZÁTOR PÁRY ECOSLIM
- WD-EMS - ABSORBED POWER MANAGEMENT SYSTEM
- WD-FLUX6010 - KONTROLA DÁVKOVÁNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU PRO PŘÍDAVNÁ PERISTALTICKÁ ČERPADLA
- WD-LAN60 - DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ KARTA
- WD-LS6010 - SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINTEINK - EXTERNÍ NÁRAZOVÁ TISKÁRNA
- WD-PRINTS6010 – TISKÁRNA BOČNÍHO PANELU
- WD-VDS6010 - DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

GW6290DSG (č. 860993)**VWLKOKAPACITNÍ LABORATORNÍ MYČKA SE SUŠICÍM SYSTÉMEM A SKLENĚNÝMI DVÍŘKY (405 LT)**

- antibakteriální termická dezinfekce
- programy: 20 výchozích + 20 vlastních
- vícejazyčný TFT barevný dotykový displej
- funkce chráněné heslem různých úrovní
- USB port pro stahování protokolu mycích cyklů
- dvoumotorový systém nuceného sušení horkým vzduchem
- peristaltické čerpadlo pro tekutý mycí prostředek
- peristaltické čerpadlo pro neutralizátor kapalin
- možnost instalace až 3 přídatných peristaltických čerpadel
- dvířka z nerez oceli s průzorem z tvrzeného skla
- mycí komora z nerez oceli AISI 316L
- veškeré vnitřní potrubí je vyrobeno z nerez oceli AISI 304
- vnější panely z nerez oceli AISI 304
- skříňka na mycí prostředek z nerez oceli AISI 304 pro kanystry 4 x 5 litrů
- mytí do 3 úrovní
- vnější rozměry D x H x V: 900 x 800 x 1950 mm
- vnitřní pracovní rozměry D x H x V: 600 x 620 x 830 mm
- vnitřní LED osvětlovací systém
- 2 nezávislá mycí čerpadla
- vysoce účinné vypouštěcí čerpadlo
- vestavěný bojler pro rychlé cykly předehřevu vody
- přípojky studené vody, horké vody a demineralizované vody
- dvojitý elektronický dveřní zámek pro bezpečnost uživatele
- systém nouzového otevírání
- elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 18 kW max
- k dispozici verze 60 Hz
- bez vozíků

**DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE**

GW6290DS
(č. 860683)

VELKOKAPACITNÍ LABORATORNÍ MYČKA (405 LITRŮ)

- dvoumotorový systém nuceného sušení horkým vzduchem

Volitelné příslušenství

- AF7015 - ABSOLUTNÍ HEPA FILTR
- ESVC6290 - JISTIČ VÝFUKU 6290
- IC6290 - SNÍMAČ VODIVOSTI PRO KONTROLU KVALITY MYTÍ
- P36290 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÁ ADITIVA

- P46290 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÁ ADITIVA
- P56090B - PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÁ ADITIVA
- PAD2 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2-60 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X - NEREZOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X-60 - POSILOVACÍ ČERPADLO PRO BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU - 60 HZ
- WD-FLUX6290 - KONTROLA DÁVKOVÁNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU PRO PŘÍDAVNÁ PERISTALTICKÁ ČERPADLA
- WD-LAN60 - DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ KARTA
- WD-LS6010 - SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINT6290 – PANELOVÁ TISKÁRNA
- WD-VDS - DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

GW7010M (č. 860598)**VELKOKAPACITNÍ JEDNODVĚŘOVÁ LABORATORNÍ MYČKA
(234 LT)**

- mytí do 95°C - antibakteriální termická dezinfekce
- kapacita až 5 nastavitelných úrovní
- programy: 20 výchozích + 20 vlastních
- vícejazyčný TFT barevný dotykový displej
- fungování chráněné heslem různých úrovní
- integrovaná vestavěná panelová tiskárna (volitelně)
- USB port pro stahování protokolu mycích cyklů
- ethernet port pro LAN připojení (volitelně)
- posuvné celoskleněné dveře
- elektronický dveřní zámek pro bezpečnost uživatele
- vysokotlaký systém sušení horkým vzduchem
- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim (volitelně)
- peristaltické čerpadlo pro tekutý mycí prostředek
- peristaltické čerpadlo pro neutralizátor kapalin
- možnost instalace až 2 dalších peristaltických čerpadel
- skříňka na mycí prostředek s odnímatelným táčem pro uložení až 3 x 5 litrových kanystrů + 1 x 1 litrové kanystry
- mycí komora z nerez oceli AISI 316L
- vnější panely z nerez oceli AISI 304
- vnější rozměry D x H x V: 780 x 800 x 1950 mm
- vnitřní pracovní rozměry D x H x V: 550 x 620 x 685 mm
- připojení studené vody, horké vody a demineralizované vody
- připojení podlahové vpusti
- vypouštěcí čerpadlo (volitelné)
- elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 13 kW max
- k dispozici verze 60 Hz
- průchozí otvor pro vložení externích teplotních sond – maximální dostupný průměr 9,5 mm (3/8")
- bez vozíků

**DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE****GW7010TM
(č. 860645)****VELKOKAPACITNÍ LABORATORNÍ MYČKA (234 LITRŮ)**

- vybavena rychlými (FAST) cykly (max. 33 minut)
- systém vnitřního osvětlení se 4 LED světly v mycí komoře

Volitelné příslušenství

- AF4050 - ABSOLUTNÍ HEPA FILTR
- DRAINP6010 - VYPOUŠTĚCÍ ČERPADLO NA STĚNU
- ESVC10 - JISTIČ VÝFUKU 6010-7010
- IC6010 – KONTROLA VODIVOSTI KVALITY MYTÍ
- LED6010 - LED OSVĚTLENÍ PRO MYCÍ KOMORU
- P36010 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÁ ADITIVA
- P46010 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÉ ODPĚŇOVAČE
- PAD26010 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X6010 - NEREZOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- STEAMCO60 - KONDENZÁTOR PÁRY ECOSLIM
- STEAMFEED70 - HYBRIDNÍ PARNÍ OHŘEV
- WD-CODESCAN – ČTEČKA ČÁROVÝCH KÓDŮ
- WD-EMS – ABSORBED POWER MANAGEMENT SYSTEM
- WD-FLUX6010 – KONTROLA DÁVKOVÁNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU PRO PŘÍDAVNÁ PERISTALTICKÁ ČERPADLA
- WD-LAN60 – DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ KARTA
- WD-LS6010 – SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINTEINK – EXTERNÍ TISKÁRNA
- WD-PRINTS7010 – TISKÁRNA BOČNÍHO PANELU
- WD-SIGNBOX15 – BEZPLATNÁ SCHRÁNKA KONTAKTŮ PRO DÁLKOVÝ SIGNÁL
- WD-SIGNBOXIN – BEZPLATNÁ SCHRÁNKA KONTAKTŮ Z EXTERNÍHO VSTUPU
- WD-VDS6010 - DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

GW7015M (č. 860681)**VELKOKAPACITNÍ LABORATORNÍ MYČKA S
JEDNODUCHÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI (348 LITRŮ)**

- mytí do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- kapacita až 6 nastavitelných úrovní
- programy: 20 výchozích + 20 vlastních
- vícejazyčný TFT barevný dotykový displej na obou stranách
- fungování chráněné heslem různých úrovní
- integrovaná vestavěná panelová tiskárna (volitelně)
- USB port pro stahování protokolu mycích cyklů
- dvoumotorový systém nuceného sušení horkým vzduchem
- ethernetový port pro LAN připojení (volitelně)
- 1 posuvné celoskleněné dveře
- elektronický dveřní zámek pro bezpečnost uživatele
- vysokotlaký systém sušení horkým vzduchem
- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim (volitelně)
- peristaltické čerpadlo pro tekutý mycí prostředek
- peristaltické čerpadlo pro neutralizátor kapalin
- možnost instalace až 3 přídavných peristaltických čerpadel
- skříňka na mycí prostředek s odnímatelným tácem pro uložení až 4 kanystrů o objemu 5 litrů a jednoho o objemu 2 litrů
- mycí komora z nerez oceli AISI 316L
- vnější panely z nerez oceli AISI 304
- vnější rozměry D x H x V: 900 x 1000 x 1942 mm
- vnitřní pracovní rozměry D x H x V: 626 x 812 x 685 mm
- připojení studené vody, horké vody a demineralizované vody
- 2 nezávislá mycí čerpadla
- připojení podlahové vpusti
- vypouštěcí čerpadlo (volitelné)
- elektrické připojení: 3/N/PE 380-400 V - 50 Hz - 20 kW max.
- k dispozici verze 60 Hz
- průchozí otvor pro vložení externích teplotních sond – maximální dostupný průměr 9,5 mm (3/8")
- bez vozíků



Volitelné příslušenství

- AF7015 - ABSOLUTNÍ SADA FILTRŮ HEPA
- DRAINP7015 - VYPOUŠTĚCÍ ČERPADLO NA STĚNU
- ESVC15 - JISTIČ VÝFUKU 7015
- IC6010 – KONTROLA VODIVOSTI KVALITY MYTÍ
- LED6010 - LED OSVĚTLENÍ PRO MYCÍ KOMORU
- P36010 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÁ ADITIVA
- P46010 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÉ ODPĚŇOVAČE
- P57015 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÁ ADITIVA
- PAD26010 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X6010 - NEREZOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- STEAMCO15 - KONDENZÁTOR PÁRY ECOSLIM
- STEAMFEED15 - HYBRIDNÍ PARNÍ OHŘEV PRO KOMORU
- WD-CHECK15 - OBVOD PRO ODBĚR VZORKU VODY
- WD-CODESCAN – ČTEČKA ČÁROVÝCH KÓDŮ
- WD-DRAIN15 - VYPOUŠTĚCÍ OKRUH MYCÍHO ČERPADLA
- WD-EMS – ABSORBED POWER MANAGEMENT SYSTEM
- WD-FLUX6010 – KONTROLA DÁVKOVÁNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU PRO PŘÍDAVNÁ PERISTALTICKÁ ČERPADLA
- WD-LAN60 – DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ KARTA
- WD-LS6010 – SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINTEINK – EXTERNÍ TISKÁRNA
- WD-PRINTS7010 – TISKÁRNA BOČNÍHO PANELU
- WD-SIGNBOX15 – BEZPLATNÁ SCHRÁNKA KONTAKTŮ PRO DÁLKOVÝ SIGNÁL
- WD-SIGNBOXIN – BEZPLATNÁ SCHRÁNKA KONTAKTŮ Z EXTERNÍHO VSTUPU
- WD-VDS6010 - DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

Řada Professional – dvoudvéřové laboratorní myčky

GW6010L (č. 860828)

VELKOKAPACITNÍ DVOUDVĚŘOVÁ LABORATORNÍ MYČKA (234 LT)

- mytí do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- kapacita až 5 nastavitelných úrovní
- programy: 20 výchozích + 20 vlastních
- vícejazyčný TFT barevný dotykový displej na obou stranách
- fungování chráněné heslem různých úrovní
- integrovaná vestavěná panelová tiskárna (volitelně)
- USB port pro stahování protokolu mycích cyklů
- ethernetový port pro LAN připojení (volitelně)
- 2 sklopná celoskleněná dvířka
- elektronický dveřní zámek pro bezpečnost uživatele
- vysokotlaký systém sušení horkým vzduchem
- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim (volitelně)
- peristaltické čerpadlo pro tekutý mycí prostředek
- peristaltické čerpadlo pro neutralizátor kapalin
- možnost instalace až 2 dalších peristaltických čerpadel
- skříňka na mycí prostředek s odnímatelným táčem pro uložení až 3 x 5litrových kanystrů + 1 x 1litrový kanystr
- mycí komora z nerez oceli AISI 316L
- vnější panely z nerez oceli AISI 304
- vnější rozměry D x H x V: 650 x 720 x 1950 mm
- vnitřní pracovní rozměry D x H x V: 550 x 620 x 685 mm
- připojení studené vody, horké vody a demineralizované vody
- připojení podlahové vpusti
- vypouštěcí čerpadlo (volitelně)
- elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 13 kW max
- k dispozici verze 60 Hz
- bez vozíků



DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE

GW6010LX
(č. 860829)

**VELKOKAPACITNÍ LABORATORNÍ MYČKA SE DVĚMA NEREZOVÝMI
DVEŘMI (234 LITRŮ)**

- dveře z nerez oceli

Volitelné příslušenství

- AF4050 - ABSOLUTNÍ HEPA FILTR
- DRAINP6010 - VYPOUŠTĚCÍ ČERPADLO NA STĚNU
- ESVC10 - JISTIČ VÝFUKU 6010-7010
- IC6010 – KONTROLA VODIVOSTI KVALITY MYTÍ
- KITSOND10 - SADA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ
- LED6010 - LED OSVĚTLENÍ PRO MYCÍ KOMORU
- P46010L - PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO DÁVKOVÁNÍ ROZTOKU KAPALNÝCH PŘÍRAD PROTI PĚNĚNÍ
- PAD26010 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X6010 - NEREZOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- STEAMCO60 - KONDENZÁTOR PÁRY ECOSLIM
- WD-EMS – ABSORBED POWER MANAGEMENT SYSTEM
- WD-FLUX6010 – KONTROLA DÁVKOVÁNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU PRO PŘÍDAVNÁ PERISTALTICKÁ ČERPADLA
- WD-LAN60 – DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ KARTA
- WD-LS6010 – SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINTEINK – EXTERNÍ TISKÁRNA
- WD-PRINTP6010 – TISKÁRNA BOČNÍHO PANELU
- WD-PRINTS6010 – TISKÁRNA BOČNÍHO PANELU
- WD-VDS - DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

GW6010T (č. 860595)**VELKOKAPACITNÍ DVOUDVĚŘOVÁ LABORATORNÍ MYČKA (234 LITRŮ) S RYCHLÝMI CYKLY**

- mytí do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- kapacita až 5 nastavitelných úrovní
- programy: 20 výchozích + 20 vlastních
- vybavena rychlými cykly (max. 33 minut)
- vícejazyčný TFT barevný dotykový displej na obou stranách
- fungování chráněné heslem různých úrovní
- integrovaná vestavěná panelová tiskárna (volitelně)
- USB port pro stahování protokolu mycích cyklů
- ethernetový port pro LAN připojení (volitelně)
- 2 sklopná celoskleněná dvířka
- elektronický dveřní zámek pro bezpečnost uživatele
- vysokotlaký systém sušení horkým vzduchem
- systém vnitřního osvětlení se 4 LED světly pro mycí komoru
- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim (volitelně)
- peristaltické čerpadlo pro tekutý mycí prostředek
- peristaltické čerpadlo pro neutralizátor kapalin
- možnost instalace až 2 dalších peristaltických čerpadel
- skříňka na mycí prostředek s odnímatelným tácem pro uložení až 3 x 5litrových kanystrů + 1 x 1litrovou nádobu
- mycí komora z nerez oceli AISI 316L
- vnější panely z nerez oceli AISI 304
- vnější rozměry D x H x V: 650 x 720 x 1950 mm
- vnitřní pracovní rozměry D x H x V: 550 x 620 x 685 mm
- připojení studené vody, horké vody a demineralizované vody
- přípojka pro odtok
- vypouštěcí čerpadlo (volitelné)
- elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 13 kW max
- k dispozici verze 60 Hz
- průchozí otvor pro vložení externích teplotních sond – maximální dostupný průměr 9,5 mm (3/8")
- bez vozíků

**DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE**

GW6010TM
(č. 860596)

VELKOKAPACITNÍ JEDNODVĚŘOVÁ LABORATORNÍ MYČKA (234 LITRŮ)

- jedny dveře

Volitelné příslušenství

- AF4050 - ABSOLUTNÍ HEPA FILTR
- DRAINP6010 - VYPOUŠTĚCÍ ČERPADLO NA STĚNU
- ESVC10 - JISTIČ VÝFUKU 6010-7010
- IC6010 – KONTROLA VODIVOSTI KVALITY MYTÍ
- P36010 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÁ ADITIVA
- P46010 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÉ ODPĚŇOVAČE
- PAD26010 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X6010 - NEREZOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- STEAMCO60 - KONDENZÁTOR PÁRY ECOSLIM
- WD-EMS – ABSORBED POWER MANAGEMENT SYSTEM
- WD-FLUX6010 – KONTROLA DÁVKOVÁNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU PRO PŘÍDAVNÁ PERISTALTICKÁ ČERPADLA
- WD-LAN60 – DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ KARTA
- WD-LS6010 – SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINTEINK – EXTERNÍ TISKÁRNA
- WD-PRINTP6010 – TISKÁRNA BOČNÍHO PANELU
- WD-PRINTS6010 – TISKÁRNA BOČNÍHO PANELU
- WD-VDS6010 - DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

GW7010 (č. 860599)**VELKOKAPACITNÍ LABORATORNÍ MYČKA S DVOJITÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI (234 LT)**

- mytí do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- kapacita až 5 nastavitelných úrovní
- programy: 20 výchozích + 20 vlastních
- vícejazyčný TFT barevný dotykový displej na obou stranách
- fungování chráněné heslem různých úrovní
- integrovaná vestavěná panelová tiskárna (volitelně)
- USB port pro stahování protokolu mycích cyklů
- ethernetový port pro LAN připojení (volitelně)
- 2 posuvné celoskleněné dveře
- elektronický dveřní zámek pro bezpečnost uživatele
- vysokotlaký systém sušení horkým vzduchem
- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim (volitelně)
- peristaltické čerpadlo pro tekutý mycí prostředek
- peristaltické čerpadlo pro neutralizátor kapalin
- možnost instalace až 2 dalších peristaltických čerpadel
- skříňka na mycí prostředek s odnímatelným táčem pro uložení až 3 x 5litrových kanistrů + 1 x 1litrové nádoby
- mycí komora z nerez oceli AISI 316L
- vnější panely z nerez oceli AISI 304
- vnější rozměry D x H x V: 780 x 800 x 1950 mm
- vnitřní pracovní rozměry D x H x V: 550 x 620 x 685 mm
- připojení studené vody, horké vody a demineralizované vody
- připojení podlahové vpusti
- vypouštěcí čerpadlo (volitelné)
- elektrické připojení: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 13 kW max
- k dispozici verze 60 Hz
- průchozí otvor pro vložení externích teplotních sond – maximální dostupný průměr 9,5 mm (3/8")
- bez vozíků

**DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE**

GW7010T
(č. 860646)

VELKOKAPACITNÍ LABORATORNÍ MYČKA S DVOJITÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI (234 LT)

- vybavena rychlými cykly (max. 33 minut)
- vnitřní osvětlovací systém se 4 LED světly v mycí komoře

Volitelné příslušenství

- AF4050 - ABSOLUTNÍ HEPA FILTR
- DRAINP6010 - VYPOUŠTĚCÍ ČERPADLO NA STĚNU
- ESVC10 - JISTIČ VÝFUKU 6010-7010
- IC6010 – KONTROLA VODIVOSTI KVALITY MYTÍ
- LED6010 - LED OSVĚTLENÍ PRO MYCÍ KOMORU
- P36010 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÁ ADITIVA
- P46010 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÉ ODPĚŇOVAČE
- PAD26010 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X6010 - NEREZOVÉ PŘÍDAVNÉ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- STEAMCO60 - KONDENZÁTOR PÁRY ECOSLIM
- STEAMFEED70 - HYBRIDNÍ PARNÍ OHŘEV
- WD-CODESCAN – ČTEČKA ČÁROVÝCH KÓDŮ
- WD-EMS – ABSORBED POWER MANAGEMENT SYSTEM
- WD-FLUX6010 – KONTROLA DÁVKOVÁNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU PRO PŘÍDAVNÁ PERISTALTICKÁ ČERPADLA
- WD-LAN60 – DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ KARTA
- WD-LS6010 – SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINTEINK – EXTERNÍ TISKÁRNA
- WD-PRINTP7010 – TISKÁRNA BOČNÍHO PANELU
- WD-PRINTS7010 – TISKÁRNA BOČNÍHO PANELU
- WD-SIGNBOX15 – BEZPLATNÁ SCHRÁNKA KONTAKTŮ PRO DÁLKOVÝ SIGNÁL
- WD-SIGNBOXIN – BEZPLATNÁ SCHRÁNKA KONTAKTŮ Z EXTERNÍHO VSTUPU
- WD-VDS6010 - DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

GW7015 (č. 860681)**VELKOKAPACITNÍ LABORATORNÍ MYČKA S DVOJITÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI (348 LITRŮ)**

- mytí do 95 °C - antibakteriální termická dezinfekce
- kapacita až 6 nastavitelných úrovní
- programy: 20 výchozích + 20 vlastních
- vícejazyčný TFT barevný dotykový displej na obou stranách
- fungování chráněné heslem různých úrovní
- integrovaná vestavěná panelová tiskárna (volitelně)
- USB port pro stahování protokolu mycích cyklů
- dvoumotorový systém nuceného sušení horkým vzduchem
- ethernetový port pro LAN připojení (volitelně)
- 2 posuvné celoskleněné dveře
- elektronický dveřní zámek pro bezpečnost uživatele
- vysokotlaký systém sušení horkým vzduchem
- vysoce účinný parní kondenzátor Ecoslim (volitelně)
- peristaltické čerpadlo pro tekutý mycí prostředek
- peristaltické čerpadlo pro neutralizátor kapalin
- možnost instalace až 3 přídatných peristaltických čerpadel
- skříňka na mycí prostředek s odnímatelným tácem pro uložení až 4 kanystrů o objemu 5 litrů a jedné nádoby o objemu 2 litrů
- mycí komora z nerez oceli AISI 316L
- vnější panely z nerez oceli AISI 304
- vnější rozměry D x H x V: 900 x 1000 x 1942 mm
- vnitřní pracovní rozměry D x H x V: 626 x 812 x 685 mm
- připojení studené vody, horké vody a demineralizované vody
- 2 nezávislá mycí čerpadla
- připojení podlahové vpusti
- vypouštěcí čerpadlo (volitelné)
- elektrické připojení: 3/N/PE 380-400 V - 50 Hz - 20 kW max.
- k dispozici verze 60 Hz
- průchozí otvor pro vložení externích teplotních sond – maximální dostupný průměr 9,5 mm (3/8")
- bez vozíků

**DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE**

GW7015T
(č. 860921)

VELKOKAPACITNÍ MYČKA LABORATORNÍHO SKLA S DVOJITÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI S RYCHLÝMI CYKLY

- vybavena dvojitým předehřívacím zásobníkem na horkou a demineralizovanou vodu
- vybavena rychlými cykly
- systém vnitřního osvětlení se 4 LED světly v mycí komoře

Volitelné příslušenství

- AF7015 - ABSOLUTNÍ SADA FILTRŮ HEPA
- DRAINP7015 - VYPOUŠTĚCÍ ČERPADLO NA STĚNU
- ESVC15 - JISTIČ VÝFUKU 7015
- IC6010 – KONTROLA VODIVOSTI KVALITY MYTÍ
- LED6010 - LED OSVĚTLENÍ PRO MYCÍ KOMORU
- P36010 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÁ ADITIVA
- P46010 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÉ ODPĚŇOVAČE
- P57015 - PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÁ ADITIVA
- PAD26010 - POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- PAD2X6010 - NEREZOVÉ POSILOVACÍ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU
- STEAMCO15 - KONDENZÁTOR PÁRY ECOSLIM
- STEAMFEED15 - HYBRIDNÍ PARNÍ OHŘEV PRO KOMORU
- WD-CHECK15 - OBVOD PRO ODBĚR VZORKU VODY
- WD-CODESCAN – ČTEČKA ČÁROVÝCH KÓDŮ
- WD-DRAIN15 - VYPOUŠTĚCÍ OKRUH MYCÍHO ČERPADLA
- WD-EMS – ABSORBED POWER MANAGEMENT SYSTEM
- WD-FLUX6010 – KONTROLA DÁVKOVÁNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU PRO PŘÍDAVNÁ PERISTALTICKÁ ČERPADLA
- WD-LAN60 – DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ KARTA
- WD-LS6010 – SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU
- WD-PRINTEINK – EXTERNÍ TISKÁRNA
- WD-PRINTP7010 – TISKÁRNA BOČNÍHO PANELU
- WD-PRINTS7010 – TISKÁRNA BOČNÍHO PANELU
- WD-SIGNBOX15 – BEZPLATNÁ SCHRÁNKA KONTAKTŮ PRO DÁLKOVÝ SIGNÁL
- WD-SIGNBOXIN – BEZPLATNÁ SCHRÁNKA KONTAKTŮ Z EXTERNÍHO VSTUPU
- WD-VDS6010 - DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

Autoklávy

AVS23L (art. 901785)

AUTOKLÁV 23 LITRŮ S KOŠÍKEM A TISKÁRNOU

- objem komory: 23 litrů
- programy: 7 výchozích (pro kapaliny a pro pevné látky) + 1 volný
- programy s přirozeným a rychlým chlazením
- komora z nerez oceli AISI 304 bez svárů, tloušťka 20/10 mm
- víko ze slitiny Anticorodal™, tloušťka 30 mm
- provozní teplota nastavitelná od 105 °C do 135 °C
- maximální provozní tlak: relativní 2,3 bar
- kontrola a regulace teploty pomocí PT1000
- oddělený snímač tlaku
- rozptyl tepla 5,76 MJ/h max (1370 kCal/h)
- vnější rozměry D x H x V: 395 x 460 x 930 mm
- vnitřní pracovní rozměry PRŮMĚR x V: 236 x 530 mm
- koš z nerez oceli AISI 304
- rozměry koše PRŮMĚR x V: 220 x 390 mm
- přední panel s klávesnicí a LCD obrazovkou
- zprávy o průběhu cyklu s indikací programu, počítadla cyklů, data, času, teploty, aktuálního a skutečného tlaku, zbývajících času
- akustický alarm na konci cyklu
- indikace poruchy zobrazené na displeji s odlišným kódem alarmu
- zvukové a vizuální alarmy
- interní archiv pro tisk posledních 10 cyklů
- integrovaná tiskárna pro tisk následujících parametrů: sériové číslo sterilizátoru, program, počítadlo cyklů, datum, čas, teplota, tlak (každá minuta během fáze sterilizace), poruchy
- automatický elektrický zámek dveří tlakovou sondou
- odemčení a otevření dveří, pokud je vnitřní teplota nižší než 94 °C
- mechanický bezpečnostní zámek dveří kontrolou vnitřního tlaku
- hadice pro manuální odvod kondenzátu
- hmotnost 55 kg
- elektrické připojení: 230 V / 50-60 Hz - 2,5 KW
- výjimka pro kontrolu ISPESL
- v souladu s 2014/30/EU; 2014/35/EU; CEI EN 61010; CEI EN61326-1



DALŠÍ MOŽNÉ KONFIGURACE

AVS23LPV
(č. 902637)

AUTOKLÁV 23 LITRŮ S VAKUOVOU PUMPOU, KOŠÍKEM A TISKÁRNOU

- automatický odvod páry před otevřením dvířek

Doplňky myček

AF4050 (č. 900670)

ABSOLUTNÍ HEPA FILTR

- absolutní sada HEPA filtrů třídy EN 1822-5 H14 99,995 % pro sušení vzduchu



Určeno pro:

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW6010L
GW6010LX	GW6010ML	GW6010MLX	GW6010T	GW6010TM
GW7010	GW7010M	GW7010T	GW7010TM	

AF4060 (č. 902814)

ABSOLUTNÍ HEPA FILTR

- absolutní sada HEPA filtrů třídy EN 1822-5 H14 99,995 % pro sušení vzduchu



Určeno pro:

GW4260-00-000	GW4260-S0-000	GW4260-S0-060	GW4260-SC-000
GW4290-00-000	GW4290-S0-000	GW4290-SC-000	

AF7015 (art. 904569)

ABSOLUTNÍ HEPA FILTR - SADA

- 2 absolutní HEPA filtry
- třída EN 1822-5 H14 99.995% pro sušení vzduchu



Určeno pro:

GW6290DS

GW7015

GW7015T

AS4060 (č. 902897)

SADA PROTI ÚNKU VODY AQUA STOP

- zabráňuje náhodnému úniku vody
- detekuje únik vody ze stroje a zastaví jej



Určeno pro:

GW0260-00-00J

GW0260-S0-00J

GW1260-00-000

GW1260-S0-000

GW1260-SC-000

GW4260-00-000

GW4260-S0-000

GW4260-S0-060

GW4260-SC-000

GW4290-00-000

GW4290-S0-000

AS4190 (č. 903079)

SADA PROTI ÚNKU VODY AQUA STOP

- zabráňuje náhodnému úniku vody
- detekuje únik vody ze stroje a zastaví jej



Určeno pro:

GW4290-00-000

GW4290-S0-000

DRAINP6010 (č. 903465)**VYPOUŠTĚCÍ ČERPADLO NA STĚNU**

- přídatné čerpadlo pro odtok na stěnu
- k použití, pokud není k dispozici standardní podlahová vpust'
- průměr hadice: 21 mm

**Určeno pro:**

GW6010L

GW6010LX

GW6010ML

GW6010MLX

GW6010T

GW6010TM

GW7010


GW7010M

GW7010T

GW7010TM

DRAINP7015 (č. 904265)**VYPOUŠTĚCÍ ČERPADLO NA STĚNU**

- přídatné čerpadlo pro odtok na stěnu
- k použití, pokud není k dispozici standardní podlahová vpust'
- průměr hadice: 21 mm

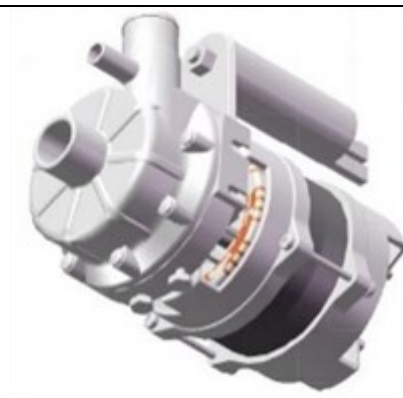**Určeno pro:**

GW7015

GW7015T

ESVC10 (č. 904961)**JISTIČ VÝFUKU 6010-7010**

- odpojovač komínového průduchu, který se instaluje na kouřový průduch v horní části strojů
- zabraňuje přenosu kolísání tlaku do stroje a následné signalizaci alarmu
- speciální tvar je navržen tak, aby zabránil návratu kondenzace dovnitř stroje
- vhodný pro stroje řady 6010/7010

**Určeno pro:**

GW6010L	GW6010LX	GW6010ML	GW6010MLX	GW6010T
GW6010TM	GW7010	GW7010M	GW7010T	GW7010TM

ESVC15 (č. 904962)**JISTIČ VÝFUKU 7015**


- odpojovač komínového průduchu, který se instaluje na kouřový průduch v horní části strojů
- zabraňuje přenosu kolísání tlaku do stroje a následné signalizaci alarmu
- speciální tvar je navržen tak, aby zabránil návratu kondenzace dovnitř stroje
- vhodný pro stroje řady 7015

**Určeno pro:**

GW7015	GW7015T
--------	---------

ESVC6290 (č. 904963)**JISTIČ VÝFUKU 6290**

- odpojovač komínových průduchů, které se instalují na kouřový průduch v horní části strojů
- zabraňuje přenosu kolísání tlaku do stroje a následné signalizaci alarmu
- speciální tvar je navržen tak, aby zabránil návratu kondenzace dovnitř stroje
- vhodný pro stroje řady 6290

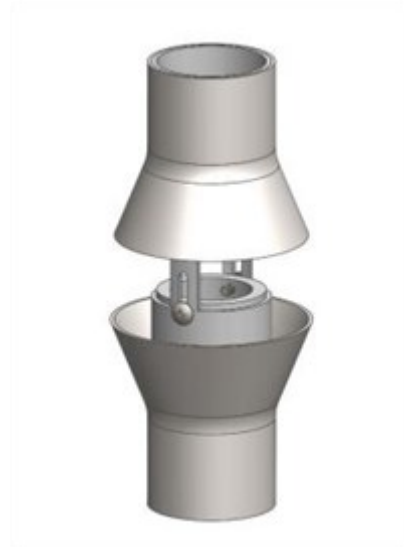**Určeno pro:**

GW6290DS

GW6290DSG

IC5090 (č. 901737)**SENSOR KONDUKTIVITY PRO KONTROLU KVALITY MYTÍ**

- umožňuje detekovat nečistoty v mycím louhu
- aktivuje další fáze oplachu pro dosažení dokonalého oplachu

**Určeno pro:**

GW3060BX

GW3060BXA

GW3060BXC

GW3060BXCA

GW3060P

GW3060PA

GW3060S

GW3060SA

GW3060SC

GW3060SCA

GW4090

GW4090A

GW4090BXC

GW4090BXCA

GW4090BXP

GW4090C

GW4090CA

GW4090P

GW4090PA

IC6010 (č. 903527)**SENSOR KONDUKTIVITY PRO KONTROLU KVALITY MYTÍ**

- umožňuje detekovat nečistoty v mycím louhu
- aktivuje další fáze oplachu pro dosažení dokonalého oplachu

**Určeno pro:**

GW6010L	GW6010LX	GW6010ML	GW6010MLX	GW6010T
GW6010TM	GW7010	GW7010M	GW7010T	GW7010TM
GW7015	GW7015T			

IC6290 (č. 904554)**SENSOR KONDUKTIVITY PRO KONTROLU KVALITY MYTÍ**

- umožňuje detekovat nečistoty v mycím louhu
- aktivuje další fáze oplachu pro dosažení dokonalého oplachu

**Určeno pro:**

GW6290DS

IRCP (č. 903000)**STROPNÍ STŘÍKACÍ RAMENO**

- přidavné stropní ostříkovací rameno
- zlepšuje účinnost mytí složitých tvarů skla
- vyrobeno z nerez oceli AISI 316L
- není kompatibilní s vozíky CSK6B, CSK8B, LM40S, LB16S, CSK4BMIC

**Určeno pro:**

GW0260-00-00J	GW0260-S0-00J	GW1260-00-000	GW1260-S0-000
GW1260-SC-000	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC
GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S
GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA	GW4090

GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA
GW4260-00-000	GW4260-S0-000	GW4260-S0-060	GW4260-SC-000
GW4290-00-000	GW4290-S0-000		

KITSUPPR (č. 904886)

SADA KOLEČEK - PODPORA HORNÍHO VOZÍKU V PODPULTU

- sada zesílené podpěry pro kolečka horního koše do podpultových strojů
- kompatibilní se všemi modely podpultových strojů vybavených vnitřními koly horní úrovně
- lepší a rychlejší výměna „plug and play“ vnitřních kol ve fázi běžné údržby stroje



Určeno pro:

GW0260-00-00J	GW0260-S0-00J	GW1260-00-000	GW1260-S0-000
GW1260-SC-000	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC
GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S
GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA	GW4090
GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA
GW4260-00-000	GW4260-S0-000	GW4260-S0-060	GW4260-SC-000
GW4290-00-000	GW4290-S0-000		

LED6010 (č. 903409)

LED OSVĚTLENÍ PRO MYCÍ KOMORU

- 4 LED světla zajišťující kompletní osvětlení komory
- umožňují kontrolu komory během mycího cyklu
- světla lze vyměnit zevnitř komory



Určeno pro:

GW6010L	GW6010LX	GW6010ML	GW6010MLX	GW7010
GW7010M	GW7015			

STEAMCO15 (č. 904267)**KONDENZÁTOR PÁRY ECOSLIM**

- vysoce účinný kondenzátor
- postřík se studenou vodou
- použití pro odstranění par odpadního vzduchu
- zabraňuje spojení s potrubím odpadního vzduchu

Určeno pro:

GW7015

GW7015T

STEAMCO60 (č. 903466)**KONDENZÁTOR PÁRY ECOSLIM**

- vysoce účinný kondenzátor
- postřík se studenou vodou
- použití pro odstranění par odpadního vzduchu
- zabraňuje spojení s potrubím odpadního vzduchu

Určeno pro:

GW6010L

GW6010LX

GW6010ML

GW6010MLX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

STEAMFEED15 (č. 904313)**HYBRIDNÍ PARNÍ OHŘEV PRO KOMORU**

- parní topné těleso pro mycí komoru
- účinně snižuje spotřebu elektrické energie
- hybridní systém elektrický + parní
- opatřeno "smyčkou" kondenzované páry
- vyrobeno z nerez oceli

Určeno pro:

GW7015

GW7015T

STEAMFEED15T (č. 904314)

HYBRIDNÍ PARNÍ OHŘEV PRO KOMORU A PŘEDEHŘÍVACÍ NÁDRŽE

- parní topné těleso pro mycí komoru a předeřívací nádrže
- účinně snižuje spotřebu elektrické energie
- hybridní systém elektrický + parní
- opatřen "smyčkou" kondenzované páry
- vyroben z nerez oceli

Určeno pro:

GW7015T

STEAMFEED70 (č. 904016)

HYBRIDNÍ PARNÍ OHŘEV

- parní topné těleso pro mycí komoru
- účinně snižuje spotřebu elektrické energie
- hybridní systém elektrický + parní
- opatřen "smyčkou" kondenzované páry
- vyroben z nerez oceli

Určeno pro:

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

T4260AC (č. 905442)

SYSTÉM PŘÍVODU TEPLÉ VODY

- volitelný systém pro zásobování horkovodním automatem
- dodáván s hadicí na vodu, včetně bezpečnostního systému AquaStop



Určeno pro:

GW0260-00-00J

GW0260-S0-00J

GW1260-00-000

GW1260-S0-000

GW1260-SC-000

GW4260-00-000

GW4260-S0-000

GW4260-S0-060

GW4260-SC-000

GW4290-00-000

GW4290-S0-000

TOP45I (č. 902032)**HORNÍ VESTAVBA 45 CM**

- pro vestavěné montážní řešení
- snižuje výšku stroje na 830 mm

**Určeno pro:**

GW2145

GW2145A

TOP60I (č. 902033)**HORNÍ VESTAVBA 60 CM**

- pro vestavěné montážní řešení
- snižuje výšku stroje na 830 mm

**Určeno pro:**

GW0260-00-00J

GW0260-S0-00J

GW1260-00-000

GW1260-S0-000

GW1260-SC-000

GW3060BX

GW3060BXA

GW3060BXC

GW3060BXCA

GW3060P

GW3060PA

GW3060S

GW3060SA

GW3060SC

GW3060SCA

GW4260-00-000

GW4260-S0-000

GW4260-S0-060

GW4260-SC-000

GW4290-00-000

GW4290-S0-000

TOP90I (č. 902034)**HORNÍ VESTAVBA 90 CM**

- pro vestavěné montážní řešení
- snižuje výšku stroje na 830 mm

**Určeno pro:**

GW4090

GW4090A

GW4090BXC

GW4090BXCA

GW4090BXP

GW4090C

GW4090CA

GW4090P

GW4090PA

TOP90IC (č. 903523)

HORNÍ VESTAVBA 90 CM

- pro vestavěné montážní řešení
- snižuje výšku stroje na 830 mm

Určeno pro:

GW4290-00-000

GW4290-SC-000



WD-CHECK15 (č. 905102)

OKRUH PRO ODBĚR VZORKU VODY

- speciální okruh pro odběr vzorků, pro odběr vzorků vody z mycí nádrže
- odběrný kohout je umístěn na vkladací straně, přístupný po otevření dvířek prostoru nádrže
- k dispozici pro stroje řady 7015

Určeno pro:

GW7015

GW7015T



WD-CODESCAN (č. 905103)

ČTEČKA ČÁROVÝCH KÓDŮ

- čtečka čárových kódů CODE128
- připojena ke stroji kabelem
- umístěna na vkladací straně
- k dispozici pro stroje řady 7010-7015 – není kompatibilní s tiskárnou na straně vkládání

Určeno pro:

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM


GW7015

GW7015T



WD-DRAIN15 (č. 905101)**VYPOUŠTĚCÍ OKRUH MYCÍHO ČERPADLA**

- vypouštěcí okruh mycích čerpadel
- působí na konci každé fáze mycího cyklu
- zaručuje úplné vyprázdnění čerpadla
- k dispozici pro stroje řady 7015

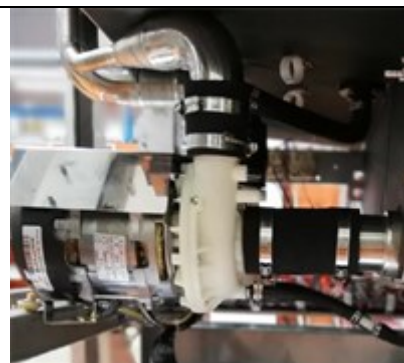**Určeno pro:**

GW7015

GW7015T

WD-EC-1 (č. 905558)**JEDNOFÁZOVÉ ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ**

- pro přestavbu stroje ze standardní konfigurace (3/N/PE 400 V – 50 nebo 60 Hz) na jednofázovou konfiguraci 1/N/PE 230 V – 50 nebo 60 Hz
- POZNÁMKA: Instalace mimo výrobní závod vyžaduje autorizovaného technika

Určeno pro:

GW0260-00-00J

GW0260-S0-00J

GW1260-00-000

GW1260-S0-000

GW1260-SC-000

GW4260-00-000

GW4260-S0-000

GW4260-S0-060

GW4260-SC-000

WD-EC-3 (č. 905559)**TŘÍFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ BEZ NULOVÉHO VODIČE**

- pro přestavbu stroje ze standardní konfigurace (3/N/PE 400 V – 50 nebo 60 Hz) na třífázové bez nulového vodiče 3/PE 230 V - 50 nebo 60 Hz
- POZNÁMKA: Instalace mimo výrobní závod vyžaduje autorizovaného technika

Určeno pro:

GW0260-00-00J

GW0260-S0-00J

GW1260-00-000

GW1260-S0-000

GW1260-SC-000

GW4260-00-000

GW4260-S0-000

GW4260-S0-060

GW4260-SC-000

WD-EC-1UK (č. 905726)**JEDNOFÁZOVÉ ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ S UK ZÁSTRČKOU**

- pro přestavbu stroje ze standardní konfigurace (3/N/PE 400 V – 50 Hz) na jednofázovou konfiguraci, s UK zástrčkou a 13A ochranou
- POZNÁMKA: Instalace mimo výrobní závod vyžaduje zásah autorizovaného technika

Určeno pro:

GW4260-00-000

GW4260-0C-000

GW4260-S0-000

GW4260-S0-060

GW4260-SC-000

GW4260-SC-00G

WD-EC4290-1 (č. 905614)**JEDNOFÁZOVÉ ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ**

- Sada součástek potřebných k přestavbě stroje ze standardní konfigurace (3/N/PE 400 V – 50 nebo 60 Hz) do jednofázové konfigurace 1/N/PE 230 V – 50 nebo 60 Hz
- komponenty jsou SPECIFICKÉ pro GW a WD4290
- POZNÁMKA: Instalace vyžaduje technika

Určeno pro:

GW4290-00-000

GW4290-S0-000

GW4290-SC-000

WD-EC4290-3 (č. 905615)**TŘÍFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ BEZ NULOVÉHO VODIČE**

- sada komponent potřebných k přestavbě stroje ze standardní konfigurace (3/N/PE 400 V – 50 nebo 60 Hz) do třífázové konfigurace bez nulového vodiče 3/PE 230 V - 50 nebo 60 Hz
- komponenty jsou SPECIFICKÉ pro GW a WD4290
- POZNÁMKA: Instalace vyžaduje technika

Určeno pro:

GW4290-00-000

GW4290-S0-000

GW4290-SC-000

WD-EMS (č. 905104)

SYSTÉM ŘÍZENÍ ABSORBOVANÉ ENERGIE

- aplikace EMS - Energy Management System - pro řízení výkonu absorbovaného stroji instalovanými v baterii ve sterilizační jednotce nebo velkými laboratořemi
- zobrazuje průběh cyklů při provádění připojených strojů
- k dispozici pro stroje řady 6010/7010/7015



Určeno pro:

GW6010L	GW6010LX	GW6010ML	GW6010MLX	GW6010T
GW6010TM	GW7010	GW7010M	GW7010T	GW7010TM
GW7015	GW7015T			

WD-LAN4290 (č. 905443)

KOMUNIKAČNÍ LAN KARTA

- datová komunikační karta
- pro stroje řady 4290
- vybaven sériovým portem RS232 pro připojení k externí tiskárně
- vybaven portem LAN pro ethernetové připojení, který umožňuje komunikaci a sledování stroje z libovolného přístupového bodu v místní síti
- nastavení podle pokynů v instalační příručce



WD-SIGNBOX15 (č. 905135)

BEZPLATNÁ SCHRÁNKA KONTAKTŮ PRO DÁLKOVÝ SIGNÁL

- box obsahující 3 volné kontakty
- 1 obecný poplachový kontakt
- 1 výstražný kontakt
- 1 kontakt, který identifikuje, zda cyklus probíhá
- umístěna na horní straně stroje
- dostupná pro řady 7010 a 7015



Určeno pro:

GW7010	GW7010M	GW7010T	GW7010TM	GW7015
GW7015T				

WD-SIGNBOXIN (č. 905184)**BEZPLATNÁ SCHRÁNKA KONTAKTŮ Z EXTERNÍHO VSTUPU**

- box s 1 externím čistým kontaktem napájeným elektrickým generátorem, pro řady 7015 a 7010
- pokud je kontakt volný -> generátor vypnutý
- pokud je kontakt sepnutý -> generátor zapnutý
- K připojení k WD-EMS pro automatické spuštění

**Určeno pro:**

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

GW7015

GW7015T

WD-VDS (č. 902592)**DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL**

- odděluje a odvádí znečištěnou odpadní vodu použitou v prvním mycím cyklu pro závěrečné oplachování

**Určeno pro:**

GW3060BX

GW3060BXA

GW3060BXC

GW3060BXCA

GW3060P

GW3060PA

GW3060S

GW3060SA

GW3060SC

GW3060SCA

GW4090

GW4090A

GW4090BXC

GW4090BXCA

GW4090BXP

GW4090C

GW4090CA

GW4090P

GW4090PA

GW6010L

GW6010LX

GW6290DS

WD-VDS6010 (č. 903671)**DVOJITÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL**

- odděluje a odvádí znečištěnou odpadní vodu použitou v prvním mycím cyklu pro závěrečné oplachování
- nutno kombinovat s nástěnným vypouštěcím čerpadlem (DRAINP6010)

**Určeno pro:**

GW6010ML

GW6010MLX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

GW7015

GW7015T

WD-WS6010 (č. 905553)**6010 ZMĚKČOVAČ VODY**

- zabudovaný změkčovač vody s automatickou regenerací řízenou procesorem
- senzor nedostatku soli s vizuálním signálem na displeji
- vlákna a brzdy přizpůsobené pro řadu GW a WD6010
- volitelně nainstalované ve výrobě

Určeno pro:

GW6010L

GW6010LX

GW6010ML

GW6010MLX

GW6010T

GW6010TM

WD-WS7010 (č. 905553)**7010 ZMĚKČOVAČ VODY**

- zabudovaný změkčovač vody s automatickou regenerací řízenou procesorem
- senzor nedostatku soli s vizuálním signálem na displeji
- vlákna a brzdy přizpůsobené pro řadu GW a WD7010
- volitelně nainstalované ve výrobě

Určeno pro:

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

WD-IP216010 (č. 905707)**IP21 ÚROVEŇ OCHRANY**

- umožňuje dosažení stupně krytí IP21: ochrana proti kapající vodě
- pro verzi WD6010
- volitelně z výroby

**Určeno pro:**

GW6010L

GW6010LX

GW6010ML

GW6010MLX

WD-IP216010T (č. 905708)

IP21 ÚROVEŇ OCHRANY

- umožňuje dosažení stupně krytí IP21: ochrana proti kapající vodě
- pro verzi WD6010T
- volitelně z výroby



Určeno pro:

GW6010T

GW6010TM

WD-IP217010 (č. 905709)

IP21 ÚROVEŇ OCHRANY

- umožňuje dosažení stupně krytí IP21: ochrana proti kapající vodě
- pro verzi 7010/7010T
- volitelně z výroby



Určeno pro:

GW7010

GW7010M

Soklové a nosné rámy

B6040L (č. 902487)

NEREZOVÝ SOKL PRO PŘÍSTROJE 60 CM SE ZÁMKEM

- rozměry D x H x V: 600 x 530 x 400 mm
- zvýší výšku přístroje na 70 cm od podlahy
- skříňka na mycí prostředek s předními dvířky
- vybavený nastavitelnými nožičkami
- skříňka vybavena miskou proti úniku kapaliny
- přední dvířka se zámkem
- vyroben z nerez oceli



Určeno pro:

GW0260-00-00J	GW0260-S0-00J	GW1260-00-000	GW1260-S0-000	GW1260-SC-000
GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060BXCA	GW3060P
GW3060PA	GW3060S	GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA
GW4260-00-000	GW4260-S0-000	GW4260-S0-060	GW4260-SC-000	GW4290-00-000
GW4290-S0-000				

B9040L (č. 902813)

NEREZOVÝ SOKL PRO PŘÍSTROJE 90 CM SE ZÁMKEM

- rozměry D x H x V: 900 x 530 x 400 mm
- zvýší výšku stroje na 70 cm od podlahy
- skříňka na mycí prostředek s předními dvířky
- vybavený nastavitelnými nožičkami
- skříňka vybavena miskou proti úniku kapaliny
- přední dvířka se zámkem
- vyroben z nerez oceli



Určeno pro:

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4290-00-000
GW4290-S0-000	GW4290-SC-000			

T6040 (č. 902416)**NEREZOVÝ RÁM PRO PŘÍSTROJE 60 CM**

- rozměry D x H x V: 600 x 530 x 400 mm
- zvýší pracovní úroveň stroje na 70 cm od podlahy
- usnadňuje čištění spodní části stroje
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW0260-00-00J	GW0260-S0-00J	GW1260-00-000	GW1260-S0-000	GW1260-SC-000
GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060BXCA	GW3060P
GW3060PA	GW3060S	GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA
GW4260-00-000	GW4260-S0-000	GW4260-S0-060	GW4260-SC-000	GW4290-00-000
GW4290-S0-000				

T9040 (č. 902415)**NEREZOVÝ RÁM PRO PŘÍSTROJE 90 CM**

- rozměry D x H x V: 900 x 530 x 400 mm
- zvýší pracovní úroveň stroje na 70 cm od podlahy
- usnadňuje čištění spodní části stroje
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4290-00-000
GW4290-S0-000	GW4290-SC-000			

Pomocná čerpadla na demineralizovanou vodu

PAD (č. 900644)

PŘÍDAVNÉ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU

- umožňuje strojní přívod demineralizované vody z beztlakové nádrže umístěné v minimální výšce od podlahy 85 cm



Určeno pro:

GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060BXCA	GW3060P
GW3060PA	GW3060S	GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA
GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	

PAD1 (č. 901394)

PŘÍDAVNÉ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU

- umožňuje strojní přívod demineralizované vody z beztlakové nádrže umístěné v minimální výšce od podlahy 85 cm



Určeno pro:

GW0260-00-00J	GW0260-S0-00J	GW1260-00-000	GW1260-S0-000	GW1260-SC-000
GW1245-S0-100	GW4260-00-000	GW4260-S0-000	GW4260-S0-060	GW4260-SC-000
GW4290-00-000	GW4290-S0-000			

PAD2 (č. 900989)

PŘÍDAVNÉ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU

- používá se u přístrojů pro doplňování demineralizované vody z nádrže umístěné na podlaze
- může vyžadovat sadu PAD2R



Určeno pro:

GW0260-00-00J	GW0260-S0-00J	GW1260-00-000	GW1260-S0-000	GW1260-SC-000
GW1245-S0-100	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060BXCA

GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA	GW3060SC
GW3060SCA	GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA
GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA
GW4260-00-000	GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000
GW6290DS				

PAD2-60 (č. 901789)

PŘÍDAVNÉ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU

- používá se u přístrojů pro doplňování demineralizované vody z nádrže umístěné na podlaze
- může vyžadovat sadu PAD2R



Určeno pro:

GW4260-S0-060	GW2145	GW2145A	GW3060BX	GW3060BXA
GW3060BXC	GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S
GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW6290DS		

PAD26010 (č. 903840)

PŘÍDAVNÉ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU

- používá se u přístrojů pro doplňování demineralizované vody z nádrže umístěné na podlaze



Určeno pro:

GW6010L	GW6010LX	GW6010ML	GW6010MLX	GW6010T
GW6010TM	GW7010	GW7010M	GW7010T	GW7010TM
GW7015	GW7015T			

PAD26010-60 (č. 904517)

PŘÍDAVNÉ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU - 60Hz

- používá se u přístrojů pro doplňování demineralizované vody z nádrže umístěné na podlaze



PAD2R (č. 903001)

PAD2 RELAY KIT

- ovládá čerpadlo PAD2 na základních strojích



Určeno pro:

GW0260-00-00J	GW0260-S0-00J	GW1260-00-000	GW1260-S0-000	GW1260-SC-000
GW1245-S0-100	GW4260-00-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000

PAD2X (č. 903330)

NEREZOVÉ PŘÍDAVNÉ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU DEMINERALIZOVANOU VODU

- používá se u přístrojů pro doplňování demineralizované vody z nádrže umístěné na podlaze
- hlava čerpadla z nerez oceli
- samonasávání
- může vyžadovat sadu PAD2R



Určeno pro:

GW0260-00-00J	GW0260-S0-00J	GW1260-00-000	GW1260-S0-000	GW1260-SC-000
GW1245-S0-100	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060BXCA
GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA	GW3060SC
GW3060SCA	GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA
GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA
GW4260-00-000	GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-S0-000
GW4290-SC-000	GW6290DS			

PAD2X-60 (č. 903332)**PŘÍDAVNÉ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU
DEMINERALIZOVANOU VODU - 60 HZ**

- používá se u přístrojů pro doplňování demineralizované vody z nádrže umístěné na podlaze
- samonasávání
- může vyžadovat sadu PAD2R

**Určeno pro:**

GW1245-S0-100	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060BXCA
GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA	GW3060SC
GW3060SCA	GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA
GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA
GW4260-S0-060	GW6290DS			

PAD2X6010 (č. 903841)**NEREZOVÉ PŘÍDAVNÉ ČERPADLO NA BEZTLAKOVOU
DEMINERALIZOVANOU VODU**

- používá se u přístrojů pro doplňování demineralizované vody z nádrže umístěné na podlaze
- samonasávání
- hlava čerpadla z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW6010L	GW6010LX	GW6010ML	GW6010MLX	GW6010T
GW6010TM	GW7010	GW7010M	GW7010T	GW7010TM
GW7015	GW7015T			

Přídavná peristaltická čerpadla

ADU (č. 902362)

UNIVERZÁLNÍ PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÁ ADITIVA

- pro dávkování tekutých přísad (např.: alkalický detergent, hydroxid sodný nebo odpěňovač)
- s trubicí z nerez oceli
- vhodné pro nádoby o objemu 2 litry, 5 litrů, 10 litrů



Určeno pro:

GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060BXCA	GW3060S
GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA			

FLUX4060 (č. 902900)

KONTROLA DÁVKOVÁNÍ PRO PŘÍDAVNÁ PERISTALTICKÁ ČERPADLA

- umožňuje dvojitou kontrolu správného dávkování mycího prostředku a tekutého neutralizátoru



Určeno pro:

GW4260-00-000	GW4260-S0-000	GW4260-00-000	GW4260-S0-000	GW4260-S0-060
GW4260-SC-000	GW1260-00-000	GW1260-S0-000	GW1260-SC-000	

P12145 (č. 903766)

PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÝ MYCÍ PROSTŘEDEK

- pro dávkování tekutého alkalického mycího prostředku
- s trubicí z nerez oceli
- vhodné pro nádoby o objemu 2 litry, 5 litrů, 10 litrů



Určeno pro:

GW1245-S0-100

P14060 (č. 902904)**PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÝ MYCÍ
PROSTŘEDEK**

- pro dávkování tekutého alkalického mycího prostředku
- s trubicí z nerez oceli
- vhodné pro nádoby o objemu 2 litry, 5 litrů, 10 litrů

**Určeno pro:**

GW0260-00-00J

GW0260-S0-00J

GW1260-00-000

GW1260-S0-000

GW1260-SC-000

GW4260-00-000

GW4260-S0-000

GW4260-S0-060

GW4260-SC-000

P14190 (č. 903418)**PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAPALNÝ MYCÍ
PROSTŘEDEK**

- pro dávkování tekutého alkalického mycího prostředku
- s trubicí z nerez oceli
- vhodné pro nádoby o objemu 2 litry, 5 litrů, 10 litrů

**Určeno pro:**

GW4290-00-000

GW4290-S0-000

GW4290-S0-000

P34090 (č. 904832)**PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAUSTICKOU SODU / HYDROXID
SODNÝ**

- pro dávkování roztoku hydroxidu sodného
- s trubicí z nerez oceli

Určeno pro:

GW4090

GW4090A

GW4090BXC

GW4090BXCA

GW4090BXP

GW4090C

GW4090CA

GW4090P

GW4090PA

P34260 (č. 905436)**PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAUSTICKOU SODU /
HYDROXID SODNÝ**

- pro dávkování roztoku hydroxidu sodného
- s vylepšenou trubicí z PVC pro vysokou chemickou odolnost
- vhodné pro nádoby o objemu 2 litry, 5 litrů, 10 litrů

Určeno pro:

GW4260-00-000

GW4260-S0-000

GW4260-S0-060

GW4260-SC-000

**P34290** (č. 905438)**PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA KAUSTICKOU SODU / HYDROXID
SODNÝ**

- pro dávkování roztoku hydroxidu sodného
- s vylepšenou trubicí z PVC pro vysokou chemickou odolnost
- vhodné pro nádoby o objemu 2 litry, 5 litrů

Určeno pro:

GW4290-00-000

GW4290-S0-000

**P36010** (č. 903531)**PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA TEKUTÁ ADITIVA**

- pro dávkování tekutých přísad (např.: alkalický detergent, hydroxid sodný nebo odpěňovač)
- s trubicí z nerez oceli
- vhodné pro nádoby o objemu 2 litry, 5 litrů, 10 litrů

Určeno pro:

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

GW7015

GW7015T



P36290 (č. 904769)**PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA TEKUTÁ ADITIVA**

- pro dávkování tekutých přísad (např.: alkalický detergent, hydroxid sodný nebo odpěňovač)
- s trubicí z nerezové oceli
- vhodné pro nádoby o objemu 2 litry, 5 litrů, 10 litrů

Určeno pro:

GW6290DS

GW6290DSG

P44090 (č. 904831)**PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA TEKUTÝ ODPĚŇOVAČ**

- pro dávkování tekutého odpěňovače
- s trubicí z nerez oceli

Určeno pro:

GW4090

GW4090A

GW4090BXC

GW4090BXCA

GW4090BXP

GW4090C

GW4090CA

GW4090P

GW4090PA

P44260 (art. 905440)**PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA TEKUTÝ ODPĚŇOVAČ**

- pro dávkování tekutého odpěňovače
- s vylepšenou trubicí z PVC pro vysokou chemickou odolnost
- vhodné pro nádoby o objemu 2 litry, 5 litrů

**Určeno pro:**

GW4260-00-000

GW4260-S0-000

GW4260-S0-060

GW4260-SC-000

P44290 (č. 905441)**PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA TEKUTÝ ODPĚŇOVAČ**

- pro dávkování tekutého odpěňovače
- s vylepšenou trubicí z PVC pro vysokou chemickou odolnost
- vhodné pro nádoby o objemu 2 litry, 5 litrů

**Určeno pro:**

GW4290-00-000

GW4290-S0-000

P46010 (č. 903530)**PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA TEKUTÝ ODPĚŇOVAČ**

- pro dávkování tekutého odpěňovače
- s trubicí z nerez oceli
- vhodné pro nádoby o objemu 2 litry, 5 litrů, 10 litrů

**Určeno pro:**

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

GW7015

GW7015T

P46010L (č. 905017)
**PERISTALTICKÉ ČERPADLO PRO DÁVKOVÁNÍ ROZTOKU
KAPALNÝCH PŘÍŠAD PROTI PĚNĚNÍ**

- peristaltické čerpadlo pro dávkování roztoku kapalných aditiv, proti tvorbě pěny
- s nerezovým odtokem
- vhodné pro nádoby o objemu 2 litry, 5 litrů a 10 litrů
- specifické pro přístroje řady GW6010L

Určeno pro:

GW6010L

GW6010LX

GW6010ML

GW6010MLX

P46290 (č. 904768)

PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA TEKUTÁ ADITIVA

- pro dávkování tekutých přísad (např.: alkalický detergent, hydroxid sodný nebo odpěňovač)
- s trubicí z nerezové oceli
- vhodné pro nádoby o objemu 2 litry, 5 litrů, 10 litrů

Určeno pro:

GW6290DS

GW6290DSG

P56090B (č. 903609)

PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA TEKUTÁ ADITIVA

- pro dávkování tekutých přísad (např.: alkalický detergent, hydroxid sodný nebo odpěňovač)
- s trubicí z nerez oceli
- vhodné pro nádoby o objemu 2 litry, 5 litrů, 10 litrů

Určeno pro:

GW6290DS

GW6290DSG

P57015 (č. 904266)

PERISTALTICKÉ ČERPADLO NA TEKUTÁ ADITIVA

- pro dávkování tekutých přísad (např.: alkalický detergent, hydroxid sodný nebo odpěňovač)
- s trubicí z nerez oceli
- vhodné pro nádoby o objemu 2 litry, 5 litrů, 10 litrů

Určeno pro:

GW7015

GW7015T



TANKBSK (č. 902591)

HORNÍ DRŽÁK KOŠÍKU NA NÁDOBY / KANYSTRY

- kapacita: 2 x 5litrové kanystry
- nutný v případě přídatných čerpadel WD-AD5HT nebo WD-AD6HT
- rozšiřuje kapacitu komory na mycí prostředek ze 2 na 4 x 5litrových kanystrů



Určeno pro:

GW4290-00-000

GW4290-S0-000

WD-FLUX (č. 901703)

PRŮTOKOMĚR PRO PŘÍDAVNÁ PERISTALTICKÁ ČERPADLA

- umožňuje redundantní kontrolu správného dávkování mycího prostředku a tekutého neutralizátoru



WD-FLUX6010 (č. 903459)

KONTROLA DÁVKOVÁNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU PRO PŘÍDAVNÁ PERISTALTICKÁ ČERPADLA

- umožňuje dvojitou kontrolu správného dávkování mycího prostředku a tekutého neutralizátoru



Určeno pro:

GW6010L

GW6010LX

GW6010ML

GW6010MLX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

GW7015

GW7015T

WD-FLUX6290 (č. 904770)

KONTROLA DÁVKOVÁNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU PRO PŘÍDAVNÁ PERISTALTICKÁ ČERPADLA

- umožňuje dvojitou kontrolu správného dávkování mycího prostředku a tekutého neutralizátoru

Určeno pro:

GW6290DS

WD-LS3060 (č. 902084)

SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU

- s nastavitelným senzorem pro nádoby různých výšek
- vhodné pro všechny modely od 45 do 60 cm



Určeno pro:

GW0260-00-00J	GW0260-S0-00J	GW1260-00-000	GW1260-S0-000	GW1260-SC-000
GW1245-S0-100	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060BXCA
GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA	GW3060SC
GW3060SCA	GW4260-00-000	GW4260-S0-000	GW4260-S0-060	GW4260-SC-000

WD-LS4190 (č. 903167)

SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU

- s nastavitelným senzorem pro nádoby různých výšek
- vhodné pro všechny modely 90 cm



Určeno pro:

GW4290-00-000	GW4290-S0-000	GW4290-SC-000
---------------	---------------	---------------

WD-LS5090 (č. 901710)

SNÍMAČ HLADINY MYCÍHO PROSTŘEDKU

- s nastavitelným senzorem pro nádoby různých výšek
- vhodné pro všechny modely 90 cm a velkokapacitní modely



Určeno pro:

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	

WD-LS6010 (č. 903525)

DETERGENT LEVEL SENSOR

- s nastavitelným senzorem pro nádoby různých výšek
- vhodné pro řady 6010/7010/6290



Určeno pro:

GW6010L	GW6010LX	GW6010ML	GW6010T	GW6010TM
GW6290DS	GW7010	GW7010M	GW7010T	GW7010TM
GW7015	GW7015T			

Sledovatelnost

KITCON232 (č. 903284)

RS232 PROPOJOVACÍ KIT

- RS232 – USB převodník
- male – female přímý propojovací kabel
- female - female křížený propojovací kabel



KITSOND (č. 905066)

SADA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ

- průchozí otvor pro přístup do mycí komory pro teplotní sondy
- normálně uzavřeno 3/8" uzávěrem, užitečný průměr 1/2"
- pro činnosti týkající se sledovatelnosti a ověřování
- umístěn pod horním krytem, v horní části stroje na pravé straně

Určeno pro:

GW0260-00-00J	GW0260-S0-00J	GW1260-00-000	GW1260-S0-000	GW1260-SC-000
GW1245-S0-100	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060BXCA
GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA	GW3060SC
GW3060SCA	GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA
GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA
GW4260-00-000	GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000

KITSOND10 (č. 904433)

SADA PRO PŘÍSTUP K TEPLOTNÍ SONDĚ

- průchozí otvor pro přístup do mycí komory pro teplotní sondy
- normálně uzavřeno 3/8" uzávěrem, užitečný průměr 1/2"
- pro činnosti týkající se sledovatelnosti a ověřování
- umístěn pod horním krytem, v horní části stroje na pravé straně

Určeno pro:

GW6010L

GW6010LX

GW6010ML

GW6010MLX

WD-232PRINT (č. 905557)

SÉRIOVÝ PORT RS232

- sériový port RS232 pro externí tiskárnu (art. WD-PRINTE)
- pro stroje produktové řady 1260, 4260



Určeno pro:

GW4260-00-000

GW4260-S0-000

GW4260-S0-060

GW4260-SC-000

GW1260-00-000

GW1260-S0-000

GW1260-SC-000

WD-LAN60 (č. 903460)

DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ KARTA

- zařízení pro LAN ethernetové připojení ke stroji
- umožňuje monitorování a komunikaci z každého přístupového bodu do sítě LAN
- konfigurace podle návodu k použití

Určeno pro:

GW6010L

GW6010LX

GW6010ML

GW6010MLX

GW6010T

GW6010TM

GW6290DS

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

GW7015

GW7015T

WD-LANE (č. 903091)

DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ KARTA

- zařízení pro LAN ethernetové připojení ke stroji
- umožňuje monitorování a komunikaci z každého přístupového bodu do sítě LAN
- konfigurace podle návodu k použití



Určeno pro:

GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060BXCA	GW3060P
GW3060PA	GW3060S	GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA

WD-LANI (č. 903090)

DATOVÁ KOMUNIKAČNÍ KARTA

- zařízení pro LAN ethernetové připojení ke stroji
- umožňuje monitorování a komunikaci z každého přístupového bodu do sítě LAN
- konfigurace podle návodu k použití



Určeno pro:

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	

WD-LANI2 (č. 905555)

LAN KOMUNIKAČNÍ KARTA

- datová komunikační karta
- pro stroje produktových řad 0260, 1260, 4260
- vybavena sériovým portem RS232 pro připojení k externí tiskárně
- vybavena portem LAN pro ethernetové připojení, který umožňuje komunikaci a sledování stroje z libovolného přístupového bodu v místní síti
- konfigurace podle návodu k použití



Určeno pro:

GW1245-S0-100	GW1260-00-000	GW1260-S0-000	GW1260-SC-000	GW4260-00-000
GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000	

WD-PRINT (č. 901702)**PANELOVÁ TISKÁRNA**

- jehličkový termální tisk
- hodiny reálného času
- pro upevnění na panel
- rozměry D x H x V: 120 x 170 x 40 mm
- průměr role termopapíru: 50 mm - šířka: 57 mm (kód. WD-PAPER)

**Určeno pro:**

GW4090

GW4090A

GW4090BXC

GW4090BXCA

GW4090BXP

GW4090C

GW4090CA

GW4090P

GW4090PA

WD-PRINT4290 (č. 905444)**4290 PANELOVÁ TISKÁRNA**

- jehličkový termální tisk
- hodiny reálného času
- pro upevnění na panel
- rozměry D x H x V: 120 x 170 x 40 mm
- průměr role termopapíru: 50 mm - šířka: 57 mm (kód. WD-PAPER)

**WD-PRINT6290 (č. 904555)****PANELOVÁ TISKÁRNA**

- jehličkový termální tisk
- hodiny reálného času
- pro upevnění na panel
- rozměry D x H x V: 120 x 170 x 40 mm
- průměr role termopapíru: 50 mm - šířka: 57 mm (kód. WD-PAPER)

Určeno pro:

GW6290DS

WD-PRINTE (č. 901783)**EXTERNÍ TISKÁRNA**

- jehličkový termální tisk
- hodiny reálného času
- průměr role termopapíru: 50 mm - šířka: 57 mm (kód. WD-PAPER)
- vybavená nezávislým napájením

**Určeno pro:**

GW1245-S0-100	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060BXCA
GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA	GW3060SC
GW3060SCA	GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA
GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA

WD-PRINTE2 (č. 905556)**EXTERNÍ TISKÁRNA**

- externí tiskárna (jako je WD-PRINTE)
- včetně karty sériového portu RS232
- pro jehličkový termální tisk
- kompletní s funkcí hodin
- pro role termopapíru průměru 50 mm - šířka 57 mm (art. WD-PAPER)
- vybavená nezávislým napájením
- POZNÁMKA: Instalace vyžaduje autorizovaného technika

**Určeno pro:**

GW4260-00-000	GW4260-S0-000	GW4260-S0-060	GW4260-SC-000	GW4290-00-000
GW4290-SC-000				

WD-PRINTEINK (č. 903740)

EXTERNÍ TISKÁRNA

- nárazová tiskárna
- průměr role papíru: 50 mm - šířka: 57 mm (č. CARTADP24)
- vybavená nezávislým napájením



Určeno pro:

GW6010L	GW6010LX	GW6010ML	GW6010MLX	GW6010T
GW6010TM	GW7010	GW7010M	GW7010T	GW7010TM
GW7015	GW7015T			

WD-PRINTP6010 (č. 903462)

TISKÁRNA PRO BOČNÍ PANEL V ČISTÉ ZÓNĚ

- jehličkový termální tisk
- hodiny s reálným časem
- namontovaná na bočním panelu čisté zóny
- rozměry D x H x V: 120 x 170 x 40 mm
- průměr role termopapíru: 50 mm - šířka: 57 mm (č. WD-PAPER)



Určeno pro:

GW6010L	GW6010LX	GW6010T
---------	----------	---------

WD-PRINTP7010 (č. 903463)**TISKÁRNA PRO BOČNÍ PANEL V ČISTÉ ZÓNĚ**

- jehličkový termální tisk
- hodiny s reálným časem
- namontovaná na bočním panelu čisté zóny
- rozměry D x H x V: 120 x 170 x 40 mm
- role termopapíru pr. 50 mm šířka 57 mm (č. WD-PAPER)

Určeno pro:

GW7010

GW7010T

GW7015

**WD-PRINTS6010** (č. 903407)**TISKÁRNA PRO BOČNÍ PANEL V NEČISTÉ ZÓNĚ**

- jehličkový termální tisk
- hodiny s reálným časem
- namontovaná na bočním panelu nečisté zóny
- rozměry D x H x V: 120 x 170 x 40 mm
- role termopapíru pr. 50 mm šířka 57 mm (č. WD-PAPER)

Určeno pro:

GW6010L

GW6010LX

GW6010ML

GW6010MLX

GW6010T

GW6010TM

**WD-PRINTS7010** (č. 903464)**TISKÁRNA PRO BOČNÍ PANEL V NEČISTÉ ZÓNĚ**

- jehličkový termální tisk
- hodiny s reálným časem
- namontovaná na bočním panelu nečisté zóny
- rozměry D x H x V: 120 x 170 x 40 mm
- role termopapíru pr. 50 mm šířka 57 mm (č. WD-PAPER)

Určeno pro:

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

GW7015



Příslušenství k myčkám

CP3050 (č. 900922)

SKŘÍŇKA NA MYCÍ PROSTŘEDKY A DEMINERALIZÁTORY


- skříňka pro uložení nádob a kanistrů čisticích nebo demineralizačních kolon
- možnost montáže vedle myčky
- rozměry D x H x V: 300 x 600 x 850 mm



KITWHEELS (č. 905145)

SADA PRO PŘESTAVBU VLOŽKY DO VOZÍKŮ

- Sada koleček pro přestavbu vložek pro vozíky CLB210, 310, 510 (např. INSxxyy) na odpovídající vložky pro přístroje s kolejkami do komory (např. INSxxyyR)
- návod k instalaci je součástí sady

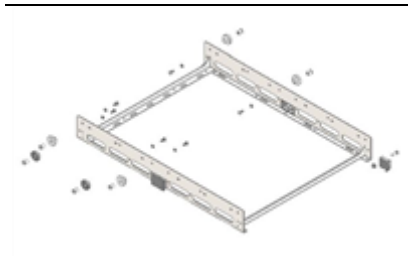

Úprava vody: Demineralizátory

WO-20-01 (č. 090012)

ČISTIČKA PRO REVERZNÍ OSMÓZU Z NEREZ OCELI

- elektronický ovládací panel s pokročilým programováním
- alarm vyčerpání filtru
- alarm nedostatku vody
- alarm úniku vody s automatickým blokovacím systémem
- automatické časované mytí membrán v případě delší nečinnosti
- počítadla hodin a litrů
- výstupní vodivost vody (min - max): 5 - 30 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- výkon za hodinu: 120 l/h při 15 °C (teplota vody) vypouštěcí průtok 480 l/h
- produkce a vodivost závisí jak na chemických vlastnostech přívodu vody, tak na zanášení membrán
- míra regenerace (max): 30 % při 30 °C
- předúprava na přívodu vody: filtr s aktivním uhlím
- vstupní tlak vody (min / max): 1,5 - 6 bar
- tvrdost vody na vstupu (max): 40 °f s pH max 7,5
- vstupní teplota vody (min - max): 5 - 30 °C
- vstupní vodivost vody (max): 2000 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- vnější rozměry Š x H x V: 150 x 490 x 550 mm
- hmotnost (netto/brutto): 25 / 26 kg
- elektrické připojení: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 690 W (max 3 A)



WO-30-01 (č. 090013)

ČISTIČKA PRO REVERZNÍ OSMÓZU Z NEREZ OCELI

- kapacita zásobníku 12 l
- elektronický ovládací panel s pokročilým programováním
- alarm vyčerpání filtru
- alarm nedostatku vody (ochrana proti vysychání čerpadla)
- alarm proti vyplavení s automatickým blokováním
- automatické časované mytí membrány v případě delší nečinnosti
- počítadlo hodin a počítadlo litrů
- vodivost výstupní vody (min - max): 5 - 30 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- výkon za hodinu: 240 l/h při 15° C (teplota vody)
- produkce a vodivost závisí na chemických vlastnostech přiváděné vody a stavu zanesení membrán
- míra regenerace (max): 35 % při 25 °C
- tlak vstupní vody (min - max): 1,5 - 6 bar
- tvrdost vstupní vody (max): 35 s max. pH 7,5
- teplota vstupní vody (min - max): 5-30 °C
- vodivost vstupní vody (max): 1200 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- vnější rozměry Š x H x V: 300 x 445 x 700 mm
- elektrické připojení: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 690 W (max 3 A)



WP3010 (č. 905041)

ČISTIČKA VODY - SMÍŠENÁ PRYSKYŘICE

- poskytuje demineralizovanou vodu z vodovodní vody
- senzor vodivosti součástí dodávky pro indikaci vyčerpané pryskyřice
- vnější rozměry D x H x V: 300 x 660 x 850 mm
- kompletní s kolonou CL3000
- sada pryskyřic MI700WP
- pomocný vypouštěcí ventil přístupný ze dveří skříně



Vozíky

Základní vozíky a vložky pro podpultové přístroje

CS1-1 (č. 901696)

HORNÍ VOZÍK S ROZSTŘIKOVAČEM

- vhodné pro uchycení podpěr a košů
- užitná plocha D x H: 460 x 450 mm
- použitelná výška nastavitelná ve dvou polohách: 190 mm nebo 240 mm
- vyroben z nerez oceli



Určeno pro:

GW0260-00-00J	GW0260-S0-00J	GW1260-00-000	GW1260-S0-000	GW1260-SC-000
GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060BXCA	GW3060P
GW3060PA	GW3060S	GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA
GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4260-00-000	GW4260-S0-000	GW4260-S0-060
GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000		

CS2 (č. 900032)

SPODNÍ VOZÍK

- vhodný pro uchycení podpěr a košů
- užitná plocha D x H: 480 x 500 mm
- užitná výška: 230 mm
- vyroben z nerez oceli



Určeno pro:

GW0260-00-00J	GW0260-S0-00J	GW1260-00-000	GW1260-S0-000	GW1260-SC-000
GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060BXCA	GW3060P
GW3060PA	GW3060S	GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA
GW4060	GW4060A	GW4060C	GW4060CA	GW4060S
GW4060SA	GW4060SC	GW4060SCA	GW4090	GW4090A
GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP	GW4090C	GW4090CA
GW4090P	GW4090PA	GW4260-00-000	GW4260-S0-000	GW4260-S0-060
GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000		

D-CS1 (č. 901204)**HORNÍ VOZÍK S ROZSTŘIKOVAČEM 45 CM**

- vhodný pro uchycení podpěr a košů
- užitná plocha D x H: 310 x 430 mm
- užitná výška: 250 mm
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW1245-S0-100

D-CS2 (č. 901205)**SPODNÍ VOZÍK 45 CM**

- vhodný pro uchycení podpěr a košů
- užitná plocha D x H: 330 x 450 mm
- užitná výška: 250 mm
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW1245-S0-100

M-CS1DUO (č. 905225)**HORNÍ "POLOVOZÍK" S DVOJITÝM ROZPRAŠOVAČEM**

- vhodný pro polohování podpěr a košů
- vybaven rozdělovačem se dvěma ostřikovacími rameny
- možnost verzí pomocí odpovídajícího příslušenství, které je součástí dodávky, za účelem připojení ke spodním vozíkům, stříkáním nebo vstříkváním
- užitná plocha D x H: 460 x 310 mm
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW0260-00-00J

GW0260-S0-00J

GW1260-00-000

GW1260-S0-000

GW1260-SC-000

GW3060BX

GW3060BXA

GW3060BXC

GW3060P

GW3060PA

GW3060S


GW3060SA

GW3060SC

GW3060SCA

M-CS1DUODS (č. 905226)**HORNÍ "POLOVOZÍK" S DVOJITÝM PŘIPOJENÍM
ROZSTŘIKOVAČE A SUŠENÍ**

- vhodné pro polohování podpěr a košů
- vybaven rozdělovačem se dvěma ostřikovacími rameny
- možnost verzí pomocí odpovídajícího příslušenství, které je součástí dodávky, za účelem připojení ke spodním vozíkům, stříkáním nebo vstřikováním
- užitná plocha D x H: 460 x 310 mm
- vyroben z nerez oceli

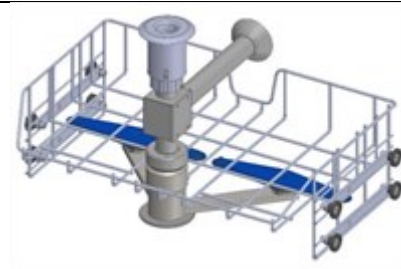**Určeno pro:**

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4260-00-000
GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000	

Vstřikovací vozíky na sklo s úzkým hrdlem pro podpultové přístroje

LB16 (č. 900606)

SPODNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK NA LAHVE

- vhodné pro mytí 16 kusů skleněného nádobí
- lahve s úzkým hrdlem široké 250 - 1000 ml s max. průměrem 101 mm - výškou 450 mm
- odměrné válce (průměr max. 101 mm - výška 495 mm)
- vybaven následujícími tryskami: 16 x U6170 (170 mm)
- umístěný na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli



Určeno pro:

GW0260-00-00J	GW0260-S0-00J	GW1260-00-000	GW1260-S0-000	GW1260-SC-000
GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060P	GW3060PA
GW3060S	GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA	

LB16DS (č. 900604)

SPODNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK NA LAHVE SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM

- vhodné pro mytí 16 kusů skleněného nádobí
- lahve s úzkým hrdlem široké 250 - 1000 ml s max. průměrem 101 mm - výškou 450 mm
- odměrné válce (průměr max. 101 mm - výška 495 mm)
- vybaven následujícími tryskami: 16 x U6170 (170 mm)
- umístěný na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli



Určeno pro:

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4260-00-000
GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000	

LB16DSBX (č. 904631)**SPODNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM**

- lze jej vybavit maximálně 16 vstřikovači, i mezi sebou odlišnými, pro mytí skleněného nádobí různých velikostí (maximální průměr 101 mm, výška 495 mm)
- nutno vybavit vložku požadovanými tryskami (nekryté pozice musí být uzavřeny krytkou TAPPOUG)
- vybaven obvodovým rámem a středovou mřížkou pro lepší stabilitu skla
- vybaven spodní sítí s oky 10 x 10 mm
- umístěný na nižší úrovni
- vyroben z nerez oceli
- pro konfiguraci trysek kontaktujte dodavatele

**Určeno pro:**

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4260-00-000
GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000	

LB16I (č. 900605)**SPODNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK SE SUŠÍCÍM SYSTÉMEM**

- vhodný pro mytí 16 lahví s úzkým / širokým hrdlem s max. průměrem 101 mm - výškou 200 mm
- možnost mytí různých druhů skla kompatibilních s maximálními povolenými rozměry
- vybaven následujícími tryskami: 16 x U6170 (170 mm)
- umístěný na spodní úrovni
- lze spojit do vstřikovacího vozíku na horní úrovni
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW0260-00-00J	GW0260-S0-00J	GW1260-00-000	GW1260-S0-000	GW1260-SC-000
GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060P	GW3060PA
GW3060S	GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA	

LB16S (art. 900607)**HORNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK NA LAHVE**

- vhodné pro mytí 16 lahví s úzkým / širokým hrdlem (prům. max. 101 mm - výška 200 mm)
- možné mýt různé sklo kompatibilní s maximálními povolenými rozměry
- vybaven následujícími tryskami: 16 x U6170 (170 mm)
- umístěný v horní úrovni
- ke spojení se vstřikovacím stojanem na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW0260-00-00J	GW0260-S0-00J	GW1260-00-000	GW1260-S0-000	GW1260-SC-000
GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060P	GW3060PA
GW3060S	GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA	

LB16S-DS (č. 900603)**HORNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK NA LAHVE SE SYSTÉMEM SUŠENÍ**

- vhodný pro mytí a sušení 16 lahví s úzkým / širokým hrdlem (prům. max. 101 mm - výška 200 mm)
- možné mýt jiné druhy skla kompatibilní s max. rozměry
- vybaven 16 tryskami U6170 (170 mm).
- umístěný na horní úrovni
- možné kombinovat se spodním vstřikovacím vozíkem
- vybaven konektorem sušicího systému
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4260-00-000
GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000	

LB32 (č. 900394)**DVOUÚROVNĚVÝ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK NA LAHVE**

- vhodný pro mytí 32 lahví s úzkým/ širokým hrdlem 250 - 1000 ml (průměr max. 101 mm - výška 230 mm)
- vybaven následujícími tryskami: 32 x U6170 (170 mm)
- umístěný na 2 úrovních
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW0260-00-00J

GW0260-S0-00J

GW1260-00-000

GW1260-S0-000

GW1260-SC-000

GW3060BX

GW3060BXA

GW3060BXC

GW3060P

GW3060PA

GW3060S

GW3060SA

GW3060SC

GW3060SCA

LB32DS (č. 900395)**DVOUÚROVNĚVÝ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK NA LAHVE SE SYSTÉMEM SUŠENÍ**

- vhodný pro mytí a sušení 32 lahví s úzkým / širokým hrdlem 250 – 1000 ml (průměr max. 101 mm – výška 230 mm)
- vybaven následujícími tryskami: 32 x U6170 (170 mm)
- umístěný na 2 úrovních
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW4090

GW4090A

GW4090BXC

GW4090BXCA

GW4090BXP

GW4090C

GW4090CA

GW4090P

GW4090PA

GW4260-00-000

GW4260-S0-000

GW4260-SC-000

GW4290-00-000

GW4290-SC-000

LB40 (č. 900566)**VOZÍK PRO BUTYROMETRY**

- vhodný pro mytí 40 butyrometrů
- při objednávce uveďte typ butyrometru
- umístěný na spodní úrovni
- vyrobený z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW0260-00-00J

GW0260-S0-00J

GW1260-00-000

GW1260-S0-000

GW1260-SC-000

GW3060BX

GW3060BXA

GW3060BXC

GW3060P

GW3060PA

GW3060S

GW3060SA

GW3060SC

GW3060SCA

LB40DS (č. 900567)**VOZÍK PRO BUTYROMETRY SE SYSTÉMEM SUŠENÍ**

- vhodné pro mytí a sušení 40 butyrometrů
- při objednávce uveďte typ butyrometru
- umístěný na spodní úrovni
- vyrobeno z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4260-00-000
GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000	

LB4B (č. 903669)**VOZÍK NA VELKÉ LAHVE**

- vhodný pro mytí lahví 4 x 10 litrů (h 227 x v 410 mm) nebo 4 x 5 litrů (h 182 x v 330 mm)
- vhodný pro mytí Erlenmeyerových baněk 4 x 5 litrů
- vybaven následujícími tryskami: 4 x speciální
- umístěný na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW0260-00-00J	GW0260-S0-00J	GW1260-00-000	GW1260-S0-000	GW1260-SC-000
GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060P	GW3060PA
GW3060S	GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA	

LB4BDS (č. 903670)**VOZÍK NA VELKÉ LAHVE**

- vhodný pro mytí lahví 4 x 10 litrů (h 227 x v 410 mm) nebo 4 x 5 litrů lahví (h 182 x v 330 mm)
- vhodný pro mytí Erlenmeyerových baněk 4 x 5 litrů
- vybaven 4 speciálními tryskami
- umístěný na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4260-00-000
GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000	

LB8 (č. 900236)**VOZÍK NA VELKOROZMĚROVÉ SKLO**

- vhodný pro mytí 8 velkých lahví max. průměr 160 mm, maximální výška 50 cm
- vybaven následujícími tryskami: 8 x U6260 (260 mm), 8 x speciální trysky
- umístěný na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW0260-00-00J	GW0260-S0-00J	GW1260-00-000	GW1260-S0-000	GW1260-SC-000
GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060P	GW3060PA
GW3060S	GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA	

LB8DS (č. 900363)**VOZÍK NA VELKÉ LAHVE SE SYSTÉMEM SUŠENÍ**

- vhodný pro mytí a sušení 8 velkých lahví max. výška 50 cm
- vybaven následujícími tryskami: 8 x U6260 (260 mm), 8 x U6310 (310 mm)
- umístěný na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4260-00-000
GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000	

LBT4DS (č. 902307)**VOZÍK PRO 5L Erlenmeyerovy BAŇKY SE SYSTÉMEM SUŠENÍ**

- vhodný pro mytí Erlenmeyerových baňek 4 x 5 litrů
- vybaven následujícími tryskami: 4 x speciální
- umístěný na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4260-00-000
GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000	

LBT5 (č. 901086)**VOZÍK NA LAHVE**

- vhodný pro mytí lahví 5 x 5 litrů (h 182 x v 500 mm, průměr hrdla max 80 mm)
- vybaven následujícími tryskami: 5 x speciální trysky
- umístěný na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli



Určeno pro:

GW0260-00-00J	GW0260-S0-00J	GW1260-00-000	GW1260-S0-000	GW1260-SC-000
GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060P	GW3060PA
GW3060S	GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA	

LBT5DS (č. 901085)

VOZÍK NA LAHVE SE SYSTÉMEM SUŠENÍ

- vhodný pro mytí a sušení 5 x 5litrových lahví (h 182 x v 500 mm, průměr hrdla max 80 mm)
- vybaven následujícími tryskami: 5 x speciální trysky
- umístěný na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli



Určeno pro:

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4260-00-000
GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000	

LM20 (č. 900234)

UNIVERZÁLNÍ MYTÍ BANĚK - 20 POZIC

- vhodné pro mytí skla s úzkým hrdlem do výšky 490 mm
- vybaven následujícími tryskami: 2 x U6260 (260 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x U6220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140 (140 mm), 3 x U3110 (110 mm), 4 x U390 (90 mm), 1 x UC6 (zakřivená)
- poloviční vozík pro volné nakládání, k doplnění košíky na zkumavky, držáky Erlenmeyerových baněk, košík CSK2
- umístěný na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli



Určeno pro:

GW0260-00-00J	GW0260-S0-00J	GW1260-00-000	GW1260-S0-000	GW1260-SC-000
GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060P	GW3060PA
GW3060S	GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA	

LM20BX (č. 903979)**FLEXIBILNÍ MYTÍ BANĚK - 20 POZIC**

- vhodné pro mytí skla s úzkým hrdlem do výšky 490 mm
- stojan s 20 pozicemi bez trysek
- může být vybaven 20 tryskami (nepoužité pozice musí být zakryty uzávěry TAPPOUG)
- poloviční vozík pro volné nakládání, k doplnění košíky na zkumavky, držáky Erlenmeyerových baněk, košík CSK2
- umístěný na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli
- pro konfiguraci trysek se obraťte prodejce

**Určeno pro:**

GW0260-00-00J

GW0260-S0-00J

GW1260-00-000

GW1260-S0-000

GW1260-SC-000

GW3060BX

GW3060BXA

GW3060BXC

GW3060P

GW3060PA

LM20BXDS (č. 903980)**FLEXIBILNÍ MYTÍ BANĚK SE SYSTÉMEM SUŠENÍ - 20 POZIC**

- vhodné pro mytí skla s úzkým hrdlem do výšky 490 mm
- stojan s 20 pozicemi bez trysek
- může být vybaven 20 tryskami (nepoužité pozice musí být zakryty uzávěry TAPPOUG)
- poloviční nosný stojan k uspořádání s držákem zkumavek, držákem baněk, košíkem CSK2
- umístěný na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli
- pro konfiguraci trysek se obraťte na prodejce

**Určeno pro:**

GW4090

GW4090A

GW4090BXC

GW4090BXCA

GW4090BXP

GW4090C

GW4090CA

GW4090P

GW4090PA

GW4260-00-000

GW4260-S0-000

GW4260-SC-000

GW4290-00-000

GW4290-SC-000

LM20DS (č. 900235)**UNIVERZÁLNÍ MYTÍ BANĚK SE SYSTÉMEM SUŠENÍ - 20 POZIC**

- vhodný pro mytí a sušení skla s úzkým hrdlem do výšky 490 mm
- vybaven následujícími tryskami: 2 x U6260 (260 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x U6220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140 (140 mm), 3 x U3110 (110 mm), 4 x U390 (90 mm), 1 x UC6 (zakřivená)
- poloviční vozík pro volné nakládání, může být doplněn košíky na zkumavky, držáky Erlenmeyerových baněk, košík CSK2
- umístěn na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4260-00-000
GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000	

LM22S (art. 901746)**UNIVERZÁLNÍ HORNÍ MYTÍ BANĚK – 22 POZIC**

- vhodný pro mytí skla s úzkým hrdlem do výšky 225 mm
- vybaven následujícími tryskami: 12 x U4140 (140 mm), 5 x U3110 (110 mm), 5 x U390 (90 mm)
- umístěn na horní úrovni vozíku D-CS1
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW1245-S0-100

LM24 (č. 901345)**UNIVERZÁLNÍ MYTÍ BANĚK - 24 POZIC**

- vhodný pro mytí skla s úzkým hrdlem do výšky 490 mm
- vybaven následujícími tryskami: 6 x U6240 (240 mm), 5 x U6220 (220 mm), 6 x U4160 (160 mm), 5 x U4140 (140 mm), 2 x U3110 (110 mm)
- umístěn na spodní úrovni vozíku D-CS2
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW1245-S0-100

LM40 (č. 900023)**UNIVERZÁLNÍ MYTÍ BANĚK - 40 POZIC**

- vhodný pro mytí skla s úzkým hrdlem do výšky 490 mm
- vybaven následujícími tryskami: 5 x U6260 (260 mm), 5 x U6240 (240 mm), 5 x U6220 (220 mm), 5 x U4180 (180 mm), 5 x U4160 (160 mm), 5 x U4140 (140 mm), 5 x U3110 (110 mm), 5 x U390 (90 mm), 1 x UC6 (zakřivená)
- umístěný na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW0260-00-00J

GW0260-S0-00J

GW1260-00-000

GW1260-S0-000

GW1260-SC-000

GW3060BX

GW3060BXA

GW3060BXC

GW3060P

GW3060PA

GW3060S

GW3060SA

GW3060SC

GW3060SCA

LM40BX (č. 902626)**FLEXIBILNÍ MYTÍ BANĚK - 40 POZIC**

- vhodný pro mytí skla s úzkým hrdlem do výšky 490 mm
- stojan se 40 pozicemi bez trysek
- může být vybaven 40 tryskami (nepoužité pozice musí být zakryty uzávěry TAPPOUG)
- umístěný na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli
- pro konfiguraci trysek se obraťte na prodejce

**Určeno pro:**

GW0260-00-00J

GW0260-S0-00J

GW1260-00-000

GW1260-S0-000

GW1260-SC-000

GW3060BX

GW3060BXA

GW3060BXC

GW3060P

GW3060PA

GW3060S

GW3060SA

GW3060SC

GW3060SCA

LM40BXDS (č. 903962)**FLEXIBILNÍ MYTÍ BANĚK SE SYSTÉMEM SUŠENÍ - 40 POZIC**

- vhodný pro mytí a sušení skla s úzkým hrdlem do výšky 490 mm
- stojan se 40 pozicemi bez trysek
- může být vybaven 40 tryskami (nepoužité pozice musí být zakryty uzávěry TAPPOUG)
- umístěn na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli
- pro konfiguraci trysek se obraťte na prodejce

**Určeno pro:**

GW4090

GW4090A

GW4090BXC

GW4090BXCA

GW4090BXP

GW4090C

GW4090CA

GW4090P

GW4090PA

GW4260-00-000

GW4260-S0-000

GW4260-SC-000

GW4290-00-000

GW4290-SC-000

LM40DS (č. 900027)

UNIVERZÁLNÍ MYTÍ BANĚK SE SYSTÉMEM SUŠENÍ - 40 POZIC

- vhodný pro mytí a sušení skla s úzkým hrdlem do výšky 490 mm
- vybaven následujícími tryskami: 5 x U6260 (260 mm), 5 x U6240 (240 mm), 5 x U6220 (220 mm), 5 x U4180 (180 mm), 5 x U4160 (160 mm), 5 x U4140 (140 mm), 5 x U3110 (110 mm), 5 x U390 (90 mm), 1 x UC6 (zakřivená)
- umístěný na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli




Určeno pro:

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4260-00-000
GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000	

LM40ICS1 (č. 905047)

DVOUÚROVNĚVÝ VOZÍK SE SMÍŠENÝM MYCÍM SYSTÉMEM, VSTŘIKOVÁNÍ NA SPODNÍ ÚROVNI A STŘÍKÁNÍ NA HORNÍ ÚROVNI

- dvouúrovňový vozík se smíšeným mycím systémem, vstřikování na spodní úrovni a postřikování na horní úrovni
- horní patro kompletní s rozprašovačem vhodným pro umístění podpěr pro sklo se širokým hrdlem a košíky
- spodní úroveň vstřiku vhodná pro mytí skla s úzkým hrdlem do max 205 mm
- může být doplněn 34 tryskami U4140, 1 zakřivenou tryskou UC6 a 6 uzávěry TAPPOUG
- vyroben z nerez oceli

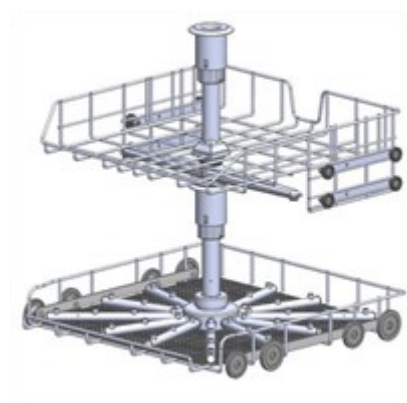


Určeno pro:

GW0260-00-00J	GW0260-S0-00J	GW1260-00-000	GW1260-S0-000	GW1260-SC-000
GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060P	GW3060PA
GW3060S	GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA	

LM40ICS1DS (č. 905048)

DVOUÚROVNĚVÝ VOZÍK SE SMÍŠENÝM MYCÍM SYSTÉMEM, VSTŘIKOVÁNÍ NA SPODNÍ ÚROVNI A STŘÍKÁNÍ NA HORNÍ ÚROVNI

- dvouúrovňový vozík se smíšeným mycím systémem, vstřikování na spodní úrovni a postřikování na horní úrovni
- horní patro kompletní s rozprašovačem vhodným pro umístění podpěr pro sklo se širokým hrdlem a koše, se sušákem
- spodní úroveň vstříku vhodná pro mytí skla s úzkým hrdlem do max 205 mm
- může být doplněno o 34 trysek U4140, 1 zakřivenou trysku UC6 a 6 uzávěrů TAPPOUG
- vyroben z nerez oceli

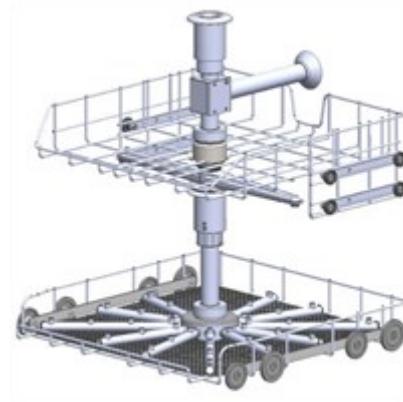

Určeno pro:

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4260-00-000
GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000	

LM40S (č. 900026)

HORNÍ MYTÍ BANĚK - 40 POZIC

- vhodný pro mytí skla s úzkým hrdlem do výšky 225 mm
- vybaven následujícími tryskami: 40 x U4140 (140 mm)
- umístěn na horní úrovni pro spojení s CS2
- vyroben z nerez oceli



Určeno pro:

GW0260-00-00J	GW0260-S0-00J	GW1260-00-000	GW1260-S0-000	GW1260-SC-000
GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060P	GW3060PA
GW3060S	GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA	

LM40SBX (č. 903668)**FLEXIBILNÍ MYTÍ BANĚK - 40 POZIC**

- vhodný pro mytí a sušení skla s úzkým hrdlem do výšky 200 mm
- stojan se 40 pozicemi bez trysek
- může být vybaven 40 tryskami (nepoužité pozice musí být zakryty uzávěry TAPPOUG)
- umístěn na horní úrovni
- vyroben z nerez oceli
- pro konfiguraci trysek se obraťte na prodejce

**Určeno pro:**

GW0260-00-00J

GW0260-S0-00J

GW1260-00-000

GW1260-S0-000

GW1260-SC-000

GW3060BX

GW3060BXA

GW3060BXC

GW3060P

GW3060PA

GW3060S

GW3060SA

GW3060SC

GW3060SCA

LM40SBXDS (č. 903986)**FLEXIBILNÍ MYTÍ BANĚK SE SYSTÉMEM SUŠENÍ - 40 POZIC**

- vhodný pro mytí a sušení skla s úzkým hrdlem do výšky 490 mm
- stojan se 40 pozicemi bez trysek
- může být vybaven 40 tryskami (nepoužité pozice musí být zakryty uzávěry TAPPOUG)
- umístěn na horní úrovni
- vyroben z nerez oceli
- pro konfiguraci trysek se obraťte na prodejce

**Určeno pro:**

GW4090

GW4090A

GW4090BXC

GW4090BXCA

GW4090BXP

GW4090C

GW4090CA

GW4090P

GW4090PA

GW4260-00-000

GW4260-S0-000

GW4260-SC-000

GW4290-00-000

GW4290-SC-000

LM40SDS (č. 900300)**HORNÍ MYTÍ BANĚK SE SYSTÉMEM SUŠENÍ - 40 POZIC**

- vhodný pro mytí a sušení skla s úzkým hrdlem do výšky 225 mm
- vybaven následujícími tryskami: 40 x U4140 (140 mm)
- umístěn na horní úrovni pro spojení s CS2
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4260-00-000
GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000	

LM46 (č. 903784)**UNIVERZÁLNÍ MYTÍ BANĚK - 46 POZIC**

- vhodné pro mytí skla s úzkým hrdlem do výšky 220 mm
- vložka horního koše vybavená následujícími tryskami: 12 x U4140 (140 mm), 6 x U390 (90 mm), 6 x U3110 (110 mm)
- vložka spodního koše vybavená tryskami: 6 x U4140 (140 mm), 2 x U390 (90 mm), 2 x U3110 (110 mm), 2 x U6220 (220 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x U6260 (260 mm), 2 x U4180 (160 mm), 6 x U4160 (160 mm), 1 x UC6 (zakřivený)
- umístěn na úrovni stojanu D-CS1 a D-CS2
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW1245-S0-100

LM80 (č. 900028)**UNIVERZÁLNÍ MYTÍ BANĚK, DVĚ ÚROVNĚ MYTÍ**

- vhodný pro mytí skla s úzkým hrdlem do výšky 225 mm
- kapacita: 68 kusů
- vybaven následujícími tryskami: 68 x U4140 (140 mm), 1 x UC6 (zakřivená)
- vybaven 12 uzávěry (TAPPOUG)
- umístěn na 2 nezávislých úrovních
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW0260-00-00J

GW0260-S0-00J

GW1260-00-000

GW1260-S0-000

GW1260-SC-000

GW3060BX

GW3060BXA

GW3060BXC

GW3060P

GW3060PA

GW3060S

GW3060SA

GW3060SC

GW3060SCA

LM80DS (č. 900029)**UNIVERZÁLNÍ MYTÍ BANĚK SE SYSTÉMEM SUŠENÍ - DVĚ ÚROVNĚ MYTÍ**

- vhodný pro mytí a sušení skla s úzkým hrdlem do výšky 225 mm
- kapacita: 68 kusů
- vybaven následujícími tryskami: 68 x U4140 (140 mm), 1 x UC6 (zakřivená)
- vybaven 12 uzávěry (č. TAPPOUG)
- umístěn na 2 nezávislých úrovních
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW4090

GW4090A

GW4090BXC

GW4090BXCA

GW4090BXP

GW4090C

GW4090CA

GW4090P

GW4090PA

GW4260-00-000

GW4260-S0-000

GW4260-SC-000

GW4290-00-000

GW4290-SC-000

LM80I (č. 904268)**SPODNÍ MYTÍ BANĚK - 34 POZIC**

- vhodný pro mytí a sušení skla s úzkým hrdlem do výšky 225 mm
- vybaven následujícími tryskami: 34 x U4140 (140 mm), 1 x UC6 (zakřivená)
- vybaven 6 uzávěry (č. TAPPOUG)
- umístěný na spodní úrovni
- lze kombinovat s horním vozíkem se systémem přívodu vody do vozíku spodní úrovně
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW0260-00-00J

GW0260-S0-00J

GW1260-00-000

GW1260-S0-000

GW1260-SC-000

GW3060BX

GW3060BXA

GW3060BXC

GW3060P

GW3060PA

GW3060S

GW3060SA

GW3060SC

GW3060SCA

LM80SBX (č. 903981)**FLEXIBILNÍ MYTÍ BANĚK - 40 POZIC**

- vhodný pro mytí a sušení skla s úzkým hrdlem do výšky 225 mm
- stojan se 40 pozicemi bez trysek
- může být vybaven 40 tryskami (nepoužité pozice musí být zakryty uzávěry č. TAPPOUG)
- 6 uzávěrů je součástí balení
- umístěn na horní úrovni
- vyroben z nerez oceli
- pro konfiguraci trysek se obraťte na dodavatele

**Určeno pro:**

GW4090

GW4090A

GW4090BXC

GW4090BXCA

GW4090BXP

GW4090C

GW4090CA

GW4090P

GW4090PA

GW4260-00-000

GW4260-S0-000

GW4260-SC-000

GW4290-00-000

GW4290-SC-000

LM80SBXDS (č. 903982)**FLEXIBILNÍ MYTÍ BANĚK SE SYSTÉMEM SUŠENÍ - 40 POZIC**

- vhodný pro mytí a sušení skla s úzkým hrdlem do výšky 225 mm
- stojan se 40 pozicemi bez trysek
- může být vybaven 40 tryskami (nepoužité pozice musí být zakryty uzávěry č. TAPPOUG)
- součástí balení je 6 uzávěrů
- umístěn na horní úrovni
- vyroben z nerez oceli
- pro konfiguraci trysek se obraťte na dodavatele

**Určeno pro:**

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4260-00-000
GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000	

LM80SDS (č. 903211)**HORNÍ MYTÍ BANĚK SE SYSTÉMEM SUŠENÍ - 34 POZIC**

- vhodný pro mytí a sušení skla s úzkým hrdlem do výšky 225 mm
- vybaven následujícími tryskami: 40 x U4140 (140 mm)
- vybaven 6 uzávěry (č. TAPPOUG)
- umístěn na horní úrovni
- ke spojení se vstříkovacím stojanem na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4260-00-000
GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000	

LM112 (č. ...)**UNIVERZÁLNÍ MYTÍ BANĚK - DVOUÚROVNĚ**

- vhodné pro mytí a sušení skla s úzkým hrdlem do výšky 225 mm
- kapacita: 136 kusů
- umístěný na 2 nezávislých úrovních
- horní úroveň složená z 68 pozic vybavených následujícími tryskami: 24 x U4140, 8 x U390, 12 x U4160, 12 x U3110 + 20 uzávěrů (č. TAPPOUG)
- spodní úroveň složená z 68 pozic vybavených následujícími tryskami: 24 x U4140, 8 x U390, 12 x U4160, 12 x U3110, 1 x UC6 (zakřivená) + 20 uzávěrů (č. TAPPOUG)
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW0260-00-00J	GW0260-S0-00J	GW1260-00-000	GW1260-S0-000	GW1260-SC-000
GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060P	GW3060PA
GW3060S	GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA	

LM112DS (č. 905659)**UNIVERZÁLNÍ MYTÍ BANĚK SE SYSTÉMEM SUŠENÍ - DVOUÚROVNĚ**

- vhodné pro mytí a sušení skla s úzkým hrdlem do výšky 225 mm
- kapacita: 136 kusů
- umístěn na 2 nezávislých úrovních
- horní úroveň složená z 68 pozic vybavených následujícími tryskami: 24 x U4140, 8 x U390, 12 x U4160, 12 x U3110 + 20 uzávěrů (č. TAPPOUG)
- spodní úroveň složená z 68 pozic vybavených následujícími tryskami: 24 x U4140, 8 x U390, 12 x U4160, 12 x U3110, 1 x UC6 (zakřivená) + 20 uzávěrů (č. TAPPOUG)
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4260-00-000
GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000	

LPM24 (č. 901379)**MYCÍ VOZÍK NA PIPETY/BAŇKY – 12 + 12 POZIC**

- vhodný pro mytí skleněných pipet s úzkým hrdlem do výšky 490 mm
- vybaven následujícími tryskami: 4 x U6240 (240 mm), 2 x U6220 (220 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140 (140 mm), 2 x U3110 (110 mm), 12 x ULB40
- umístěn na spodní úrovni vozíku D-CS2
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW2145

GW2145A

LR4 (č. 900237)**VOZÍK PRO MYTÍ REAKČNÍCH BANĚK**

- vhodný pro mytí 4 reakčních baněk se 3 / 5 hrdly po 3 litrech max. nebo až 12 kusů skla s úzkým hrdlem
- vybaven následujícími tryskami: 12 x U6260 (260 mm)
- umístěn na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW0260-00-00J

GW0260-S0-00J

GW1260-00-000

GW1260-S0-000

GW1260-SC-000

GW3060BX

GW3060BXA

GW3060BXC

GW3060P

GW3060PA

GW3060S

GW3060SA

GW3060SC

GW3060SCA

LR4DS (č. 900238)**VOZÍK PRO MYTÍ REAKČNÍCH BANĚK SE SYSTÉMEM SUŠENÍ**

- vhodný pro mytí a sušení 4 reakčních baněk s 3/5 hrdly po 3 litrech max. nebo až 12 kusů úzkého skla
- vybaven následujícími tryskami: 12 x U6260 (260 mm)
- umístěn na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4260-00-000
GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000	

LT20 (č. 900239)**VOZÍK NA FISCHER TRUBICE**

- vhodný pro mytí 12 fischerových trubic max. výška 550 mm a 6 kusů skla s úzkým hrdlem
- vybaven následujícími tryskami: 12 x U6370 (370 mm), 2 x U6220 (220 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U390 (90 mm)
- umístěný na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW0260-00-00J	GW0260-S0-00J	GW1260-00-000	GW1260-S0-000	GW1260-SC-000
GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060P	GW3060PA
GW3060S	GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA	

LT20DS (č. 900759)**VOZÍK NA FISCHER TRUBICE SE SYSTÉMEM SUŠENÍ**

- vhodný pro mytí a sušení 12 fischerových trubic max. výška 550 mm a 6 kusů skleněného nádobí s úzkým hrdlem
- vybaven následujícími tryskami: 12 x U6370 (370 mm), 2 x U6220 (220 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U390 (90 mm)
- umístěn na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli

**Určeno pro:**

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4260-00-000
GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000	

Vozíky pro mytí pipet *pro podpultové přístroje*

LPT100 (č. 900220)

VOZÍK PRO MYTÍ PIPET

- vhodný pro mytí 100 standardních pipet max. výška 450 mm max. průměr 8,5 mm
- umístěn na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli



Vhodné pro:

GW0260-00-00J

GW0260-S0-00J

GW1260-00-000

GW1260-S0-000

GW1260-SC-000

GW3060BX

GW3060BXA

GW3060BXC

GW3060P

GW3060PA

GW3060S

GW3060SA

GW3060SC

GW3060SCA

LPT100DS (č. 900219)

VOZÍK PRO MYTÍ PIPET SE SYSTÉMEM SUŠENÍ

- vhodný pro mytí a sušení 100 standardních pipet max. výška 450 mm max. průměr 8,5 mm
- umístěn na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli



Vhodné pro:

GW4090

GW4090A

GW4090BXC

GW4090BXCA

GW4090BXP

GW4090C

GW4090CA

GW4090P

GW4090PA

GW4260-00-000

GW4260-S0-000

GW4260-SC-000

GW4290-00-000

GW4290-SC-000

LPV40 (č. 900242)**VOZÍK PRO MYTÍ PIPET**

- vhodný pro mytí 20 volumetrických pipet max. výška 550 mm + 20 standardních pipet max. výška 490 mm
- umístěn na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli

**Vhodné pro:**

GW0260-00-00J

GW0260-S0-00J

GW1260-00-000

GW1260-S0-000

GW1260-SC-000

GW3060BX

GW3060BXA

GW3060BXC

GW3060P

GW3060PA

GW3060S

GW3060SA

GW3060SC

GW3060SCA

LPV40DS (č. 900243)**VOZÍK PRO MYTÍ PIPET SE SYSTÉMEM SUŠENÍ**

- vhodný pro mytí 20 volumetrických pipet max. výška 550 mm + 20 standardních pipet max. výška 490 mm
- umístěn na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli

**Vhodné pro:**

GW4090

GW4090A

GW4090BXC

GW4090BXCA

GW4090BXP

GW4090C

GW4090CA

GW4090P

GW4090PA

GW4260-00-000

GW4260-S0-000

GW4260-SC-000

GW4290-00-000

GW4290-SC-000

Kombinované vstřikovací vozíky (pipety + úzké hrdlo) pro podpultové přístroje

LPM20/20 (č. 900240)

KOMBINOVANÝ VOZÍK PRO BAŇKY/PIPETY – 20 + 20 POZIC

- vhodný pro mytí 20 pipet do 550 mm + 20 kusů skla s úzkým hrdlem
- vybaven následujícími tryskami: 2 x U6260 (260 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x U6220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140 (140 mm), 3 x U4140 (140 mm), 9019 mm, 901993 mm), 1 x UC6 (zakřivená), 20 x ULB40 pro pipety max. výška 550 mm
- umístěn na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli



Vhodné pro:

GW0260-00-00J	GW0260-S0-00J	GW1260-00-000	GW1260-S0-000	GW1260-SC-000
GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060P	GW3060PA
GW3060S	GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA	

LPM2010 (č. 902891)

KOMBINOVANÝ VOZÍK PRO BAŇKY/PIPETY/ZKUMAVKY - 20 POZIC

- vhodný pro mytí 10 pipet do 550 mm + 20 kusů skleněných nádob s úzkým hrdlem + 1/4 volného stojanu, doplňte košíčky na zkumavky řady CP
- vybaven následujícími tryskami: 2 x U6260 (260 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x U6220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140 (140 mm), 3 x U4140 (140 mm), 9019 mm, 901993 mm), 1 x UC6 (zakřivená), 10 x ULB40 pro pipety max. výška 550 mm
- umístěn na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli



Vhodné pro:

GW0160	GW0160A	GW0160S	GW0160SA	GW0260-00-00J
GW0260-S0-00J	GW1160	GW1160A	GW1160C	GW1160CA
GW1160S	GW1160SA	GW1160SC	GW1160SCA	GW1260-00-000
GW1260-S0-000	GW1260-SC-000	GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC
GW3060BXCA	GW3060P	GW3060PA	GW3060S	GW3060SA
GW3060SC	GW3060SCA			

LPM2010DS (č. 902051)**KOMBINOVANÝ VOZÍK PRO BAŇKY/PIPETY/ZKUMAVKY - 20 POZIC SE SYSTÉMEM SUŠENÍ**

- vhodný pro mytí a sušení 10 pipet do 550 mm + 20 ks skleněných nádob s úzkým hrdlem + 1/4 volného stojanu, doplnit košíčky na zkumavky řady CP
- vybaven následujícími tryskami: 2 x U6260 (260 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x U6220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140 (140 mm), 3 x U4140 (140 mm), 9019 mm, 901993 mm), 1 x UC6 (zakřivená), 10 x ULB40 pro pipety max. výška 550 mm
- umístěn na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli

**Vhodné pro:**

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4260-00-000
GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000	

LPM2020DS (č. 900241)**KOMBINOVANÝ VOZÍK PRO BAŇKY/PIPETY – 20 + 20 POZIC SE SYSTÉMEM SUŠENÍ**

- vhodný pro mytí a sušení 20 pipet do 550 mm + 20 kusů skla s úzkým hrdlem
- vybaven následujícími tryskami: 2 x U6260 (260 mm), 2 x U6240 (240 mm), 2 x U6220 (220 mm), 3 x U4180 (180 mm), 2 x U4160 (160 mm), 2 x U4140 (140 mm), 3 x U4140 (140 mm), 9019 mm, 901993 mm), 1 x UC6 (zakřivená), 20 x ULB40 pro pipety max. výška 550 mm
- umístěn na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli

**Vhodné pro:**

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4260-00-000
GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000	

Vozíky se vstřikováním pro velké sklo *pro podpultové přístroje*

LB1-20DS (č. 902605)

VOZÍK PRO JEDNU VELKOU LAHEV NEBO SOUDEK

- vstřikovací vozík pro mytí a sušení jedné velké láhve a/nebo soudku
- maximální rozměry lahve PRŮMĚR x V: 300 x 350 mm
- vyroben z nerez oceli




Vhodné pro:

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4260-00-000
GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000	

LC8M8 (č. 905227)

VOZÍK SE VSTŘIKOVÁNÍM PRO VÁLCE A DALŠÍ SKLO

- vhodný pro současně mytí 8 středně velkých válců a 8 dalšího skla, jako jsou baňky, lahve
- maximální upravitelné objemy lahví současně: 2 lahve po 2 litrech + 2 válce po 1 litru + 4 po 0,5 litru
- vybaven následujícími tryskami: 8 x U6300 (300 mm), 8 x U490 (90 mm)
- umístěn na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli

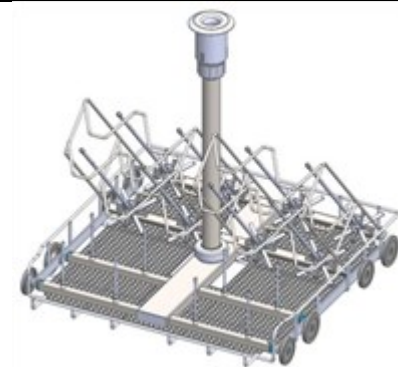


Vhodné pro:

GW0260-00-00J	GW0260-S0-00J	GW1260-00-000	GW1260-S0-000	GW1260-SC-000
GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060P	GW3060PA
GW3060S	GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA	

LC8M8DS (č. 905228)**VOZÍK SE VSTŘIKOVÁNÍM PRO VÁLCE A DALŠÍ SKLO SE SYSTÉMEM SUŠENÍ**

- vhodný pro současné mytí 8 středně velkých válců a 8 kusů dalšího skla, jako jsou baňky, lahve
- maximální upravitelné objemy lahví současně: 2 lahve po 2 litrech + 2 válce po 1 litru + 4 po 0,5 litru
- vybaven následujícími tryskami: 8 x U6300 (300 mm), 8 x U490 (90 mm)
- umístěn na nižší úrovni
- vyroben z nerez oceli

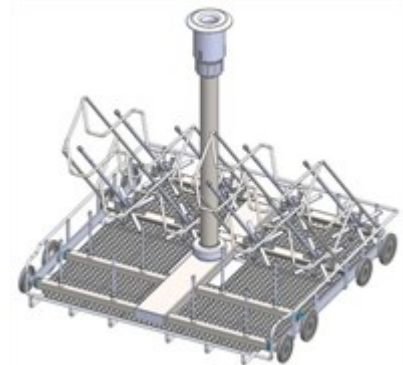**Vhodné pro:**

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4260-00-000
GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000	

Vozíky se vstřikováním pro vialky a konické centrifugační zkumavky pro podpultové přístroje

KP100 (č. 900244)

HORNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK PRO ZKUMAVKY

- vhodný pro mytí vialek, kónických centrifugačních zkumavek, rotorů centrifug
- vybaven následujícími tryskami: 104 x U390 (90 mm)
- umístěn na horní úrovni
- vyroben z nerez oceli



Vhodné pro:

GW0260-00-00J	GW0260-S0-00J	GW1260-00-000	GW1260-S0-000	GW1260-SC-000
GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060P	GW3060PA
GW3060S	GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA	

KP100DS (č. 900245)

HORNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK PRO ZKUMAVKY SE SYSTÉMEM SUŠENÍ

- vhodný pro mytí vialek, kónických centrifugačních zkumavek, rotorů centrifug
- vybaven následujícími tryskami: 104 x U390 (90 mm)
- umístěn na horní úrovni
- vyroben z nerez oceli



Vhodné pro:

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4260-00-000
GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000	

KP200 (č. 900246)**DVOUÚROVNĚVÝ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK PRO ZKUMAVKY**

- vhodný pro mytí vialek, kónických centrifugačních zkumavek, rotorů centrifug
- vybaven následujícími tryskami: 208 x U390 (90 mm)
- umístěn ve dvou úrovních
- vyroben z nerez oceli

Vhodné pro:

GW0260-00-00J

GW0260-S0-00J

GW1260-00-000

GW1260-S0-000

GW1260-SC-000

GW3060BX

GW3060BXA

GW3060BXC

GW3060P

GW3060PA

GW3060S

GW3060SA

GW3060SC

GW3060SCA

**KP200DS** (č. 900247)**DVOUÚROVNĚVÝ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK PRO ZKUMAVKY SE SYSTÉMEM SUŠENÍ**

- vhodný pro mytí vialek, kónických centrifugačních zkumavek, rotorů centrifug
- vybaven následujícími tryskami: 208 x U390 (90 mm)
- umístěn ve dvou úrovních
- vyroben z nerez oceli

Vhodné pro:

GW4090

GW4090A

GW4090BXC

GW4090BXCA

GW4090BXP

GW4090C

GW4090CA

GW4090P

GW4090PA

GW4260-00-000

GW4260-S0-000

GW4260-SC-000

GW4290-00-000

GW4290-SC-000

**KP200-U355** (č. 905657)**DVOUÚROVNĚVÝ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK PRO VIALKY**

- vhodný pro mytí velmi malých vialek, kónických centrifugačních zkumavek, rotorů centrifug
- vybaven následujícími tryskami: 208 x U355 (55 mm)
- umístěn ve dvou úrovních
- vyroben z nerez oceli

Vhodné pro:

GW0260-00-00J

GW0260-S0-00J

GW1260-00-000

GW1260-S0-000

GW1260-SC-000

GW3060BX

GW3060BXA

GW3060BXC

GW3060P

GW3060PA

GW3060S

GW3060SA

GW3060SC

GW3060SCA



KP200DS-U355 (č. 905658)**DVOUÚROVNĚVÝ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK PRO VIALKY SE SYSTÉMEM SUŠENÍ**

- vhodný pro mytí i malých vialek, kónických centrifugačních zkumavek, rotorů centrifug
- vybaven následujícími tryskami: 208 x U355 (55 mm)
- umístěn ve dvou úrovních
- vyroben z nerez oceli

**Vhodné pro:**

GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4260-00-000
GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000	

KP60 (č. 901872)**HORNÍ VOZÍK SE VSTŘIKOVÁNÍM PRO ZKUMAVKY**

- vhodný pro mytí vialek, kónických centrifugačních zkumavek, rotorů centrifug
- vybaven následujícími tryskami: 60 x U390 (90 mm)
- umístěn na horní úrovni
- vyroben z nerez oceli

**Vhodné pro:**

GW1245-S0-100

Základní vozíky a inserty pro velkokapacitní přístroje

C61 (č. 900934)

VOZÍK PRO ÚROVEŇ I (SPODNÍ)

- k použití jako základ pro sprejové mytí a jako podpora pro systémy s více tryskami
- vybaven spodním postřikovačem
- kompletní se spodním roštem ze síťoviny z nerezové oceli
- vyroben z nerez oceli

Vhodné pro:

GW6290DS

GW6290DSG



C62B (č. 905548)

ZÁKLADNÍ INSERT S ROZPRAŠOVAČEM PRO ÚROVEŇ II A III (STŘEDNÍ A HORNÍ)

- insert vybavený rozprašovacím ramenem
- pro úroveň mytí 2 a 3 (střední a horní)
- s vyššími bočními okraji pro lepší bezpečné umístění podpěr a skleněného nádobí
- vyroben z nerez oceli

Vhodné pro:

GW6290DS

GW6290DSG



C63 (č. 900936)

UNIVERZÁLNÍ PODPORA PRO VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM

- vozík pro úroveň II a III (střední a horní)
- k použití jako teleskopický nosný rám pro uchycení vstřikovacích systémů
- vyroben z nerez oceli

Vhodné pro:


GW6290DS

GW6290DSG



CL7015 (č. 905704)**ZÁKLADNÍ MYCÍ INSERT**

- police pro použití jako základ pro sprejovací mytí na základní úrovni strojů řady GW7015
- slouží jako postřikovač na dně komory
- vyroben z nerez oceli, kompletní se dvěma uzávěry pro boční přívodní přípojky

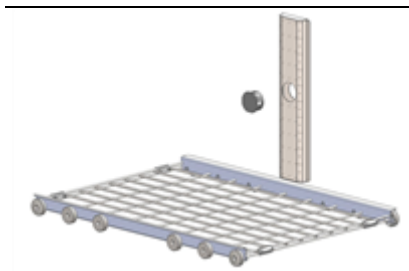**Vhodné pro:**

GW7015

GW7015M

GW7015T

CL6010 (č. 905163)**ZÁKLADNÍ INSERT PRO SPREJOVACÍ MYTÍ**

- insert vhodný pro GW6010L-GW6010LX-GW6010T a GW7010-GW7010T
- police, která se používá jako základ pro sprejovací mytí
- základní úroveň, obsluhuje postřikovač na dně komory
- vyroben z nerez oceli
- kompletní se dvěma uzávěry pro připojení bočního přívodu vody

**Vhodné pro:**

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW7010

GW7010T

CLB310UNIV (č. 904830)**ZÁKLADNÍ STOJAN NA SKLO**

- základní stojan na sklo
- možnost osazení až 3 různých úrovní
- součástí dodávky jsou 3 páry odnímatelných kolejniček
- šroubované kolejnice (bez svařování)
- nastavitelná poloha kolejnic (na pěti úrovních)
- vložky nejsou součástí dodávky
- vyroben z nerez oceli

**Vhodné pro:**

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

CLB315UNIV (č. 905071)

ZÁKLADNÍ VOZÍK PRO MYTÍ SKLA

- základní vozík na mytí skla
- kompletní se 3 páry odnímatelných kolejniček pro upevnění k rámu pomocí závitových otvorů v 5 různých výškách
- možnost použití maximálně 3 mycích polic současně
- kompletní se 3 čepelemi pro blokování nepoužívaných výtoků vody a 2 zátkami pro uzavření nepoužívaných úrovní
- inserty nejsou součástí dodávky
- vyroben z nerez oceli

Vhodné pro:

GW7015

GW7015T



INSL6010R (č. 905042)


MYCÍ INSERTY

- insert vhodný pro modely řady GW6010ML a GW6010MLX
- police, která se používá jako základ pro sprejovací mytí
- základní úroveň, obsluhovaná postřikovačem na dně komory
- vyroben z nerez oceli

Vhodné pro:

GW6010ML

GW6010MLX

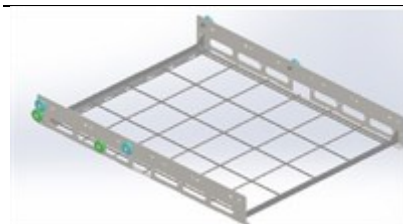

INSPLAV10 (č. 903545)

JEDNOÚROVŇOVÉ MYTÍ

- střední úroveň s integrovaným ostříkovačím ramenem
- vyroben z nerez oceli



Vhodné pro:

GW6010L

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

INSPLAV10R (č. 904903)**JEDNOÚROVŇOVÉ MYTÍ**

- střední úroveň s integrovaným ostřikovacím ramenem
- úroveň s kolejkami kompatibilními s myčkami skla "ML"
- vyroben z nerez oceli

**Vhodné pro:**

GW6010ML

GW6010MLX

INSPLAV15 (č. 904568)**INSERT MYCÍ ÚROVNĚ S DVOJITÝM SPREJOVACÍM RAMENEM**

- střední úroveň s integrovaným dvojitým ostřikovacím ramenem
- vyroben z nerez oceli

**Vhodné pro:**

GW7015

GW7015T

LCB6010 (č. 903883)**ZÁKLADNÍ STOJAN NA SKLO**

- základní stojan na skleněné nádoby
- vybaven jedním patrem pro umístění až 2 kolektorů (jeden pro každou jednotlivou poloviční úroveň)
- vyroben z nerez oceli

**Vhodné pro:**

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

LCB6010R (č. 905004)**ZÁKLADNÍ STOJAN NA SKLO**

- základní stojan na skleněné nádoby
- vybaven jedním patrem pro umístění až 2 kolektorů (jeden pro každou jednotlivou poloviční úroveň)
- vyroben z nerez oceli

Vhodné pro:

GW6010ML

GW6010MLX

**LCB7015** (č. 904312)**ZÁKLADNÍ STOJAN NA SKLO**

- základní stojan na skleněné nádoby
- vybaven jedním patrem pro umístění až 2 kolektorů (jeden pro každou jednotlivou poloviční úroveň)
- vyroben z nerez oceli

Vhodné pro:

GW7015

GW7015T



Vozíky se vstřikováním pro sklo s úzkým hrdlem *pro velkokapacitní přístroje*

COBE63 (č. 954383)

KOLEKTOR PRO BAŇKY

- vhodný pro mytí 3 baněk do 3 litrů (max. průměr: 188 mm) nebo 6 skleněných nádob do 2 litrů (max. průměr: 140 mm)
- vybaven následujícími tryskami: 6 x U4180 (180 mm)
- 2 dlouhé přepážky
- 2 krátké přepážky
- k použití na vozících LCB6010
- celkový rozměr rovný polovině mycí plochy




Vhodné pro:

GW6010L	GW6010LX	GW6010T	GW6010TM	GW7010
GW7010M	GW7010T	GW7010TM		

COBE6315 (art. 955036)

KOLEKTOR PRO BAŇKY

- vhodný pro mytí 6 lahví do 3 litrů (max. průměr: 188 mm) nebo 8 skleněných nádob do 2 litrů (max. průměr: 140 mm)
- vybaven následujícími tryskami: 13 x U4180 (180 mm)
- 2 dlouhé přepážky
- 2 krátké přepážky
- k použití na vozících LCB7015
- celkový rozměr rovný polovině mycí plochy

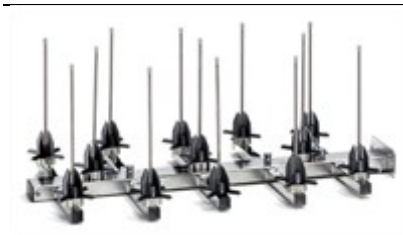

Vhodné pro:

GW7015	GW7015T
--------	---------

COBE63R (č. 955785)

KOLEKTOR PRO BAŇKY

- vhodný pro mytí 3 lahví do 3 litrů (max. průměr: 188 mm) nebo 6 skleněných nádob do 2 litrů (max. průměr: 140 mm)
- vybaven následujícími tryskami: 6 x U4180 (180 mm)
- 2 dlouhé přepážky
- 2 krátké přepážky
- k použití na vozících LCB6010R
- celkový rozměr rovný polovině mycí plochy



Vhodné pro:

GW6010ML

GW6010MLX

INS12U4180DV (č. 903954)

UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 12 POZICEMI

- vhodný pro mytí 12 lahví do 1 litru nebo 6 baněk do 2 litrů
- vybaven následujícími tryskami: 12 x U4180 (180 mm), 6 x U6260 (260 mm)
- vybaven 12 uzávěry pro konfiguraci
- vybaven drátěnými přepážkami (nastavitelná poloha) a obvodovou podpěrrou
- trysky s podpěrrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vhodný pro vozíky CLB210 / CLB310 / CLB510
- vyroben z nerez oceli



Vhodné pro:

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

INS12U4180DVR (č. 904892)

UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 12 POZICEMI

- vhodný pro mytí 12 lahví do 1 litru nebo 6 baněk do 2 litrů
- vybaven následujícími tryskami: 12 x U4180 (180 mm), 6 x U6260 (260 mm)
- vybaven 12 uzávěry pro konfiguraci
- vybaven drátěnými přepážkami (nastavitelná poloha) a obvodovou podpěrrou
- trysky s podpěrrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vyroben z nerez oceli



Vhodné pro:

GW6010ML

GW6010MLX

INS1548BX (č. 905039)**MYCÍ INSERT 48 TRYSEK – VŠEOBECNÉ POUŽITÍ**


- vhodný pro mytí 48 kusů středního a malého skla
- může být vybaven 48 tryskami (nepoužité pozice musí být zakryty uzávěry č. TAPPOUG)
- vhodné pro vozíky CLB215 / CLB515 / CLB315UNIV
- s obvodovou opěrou vhodnou pro mytí až 48 lahví o max. průměru 86 mm
- vyroben z nerez oceli
- pro konfiguraci trysek se obraťte na dodavatele

**Vhodné pro:**

GW7015

INS1596U390 (č. 904567)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 96 POZICEMI**

- vhodný pro mytí 96 kusů středního a malého skla
- vybaven následujícími tryskami: 96 x U390 (90 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vhodný pro vozíky CLB215 / CLB315 / CLB515 / CLB315UNIV
- vyroben z nerez oceli

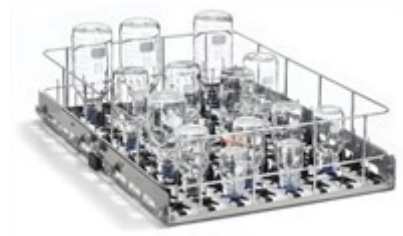**Vhodné pro:**

GW7015

GW7015T

INS1596U4140 (č. 904695)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 96 POZICEMI**

- vhodný pro mytí 96 kusů středního a malého skla
- vybaven následujícími tryskami: 96 x U4140 (140 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vhodný pro vozíky CLB215 / CLB315 / CLB515 / CLB315UNIV
- vyroben z nerez oceli

**Vhodné pro:**

GW7015

GW7015T

INS20U4180DV (č. 903918)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 20 POZICEMI**

- vhodný pro mytí 20 lahví do 1 litru
- vybaven následujícími tryskami: 20 x U4180 (180 mm)
- vybaven drátěnými přepážkami (nastavitelná poloha) a obvodovou podpěrou
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vhodný pro vozíky CLB210 / CLB310 / CLB510
- vyroben z nerez oceli

**Vhodné pro:**

GW6010L
GW7010M

GW6010LX
GW7010T


GW6010T
GW7010TM

GW6010TM

GW7010

INS20U4180DVR (č. 904905)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 20 POZICEMI**

- vhodný pro mytí 20 lahví do 1 litru
- vybaven následujícími tryskami: 20 x U4180 (180 mm)
- vybaven drátěnými přepážkami (nastavitelná poloha) a obvodovou podpěrou
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vyroben z nerez oceli

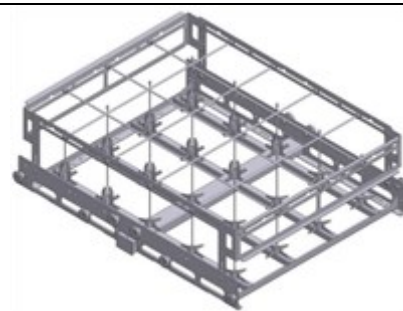
**Vhodné pro:**

GW6010ML

GW6010MLX

INS28U4140 (č. 904276)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 28 POZICEMI**

- vhodný pro mytí 28 kusů středního a malého skla
- vybaven následujícími tryskami: 28 x U4140 (140 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vhodný pro vozíky CLB210 / CLB310 / CLB510
- vyroben z nerez oceli

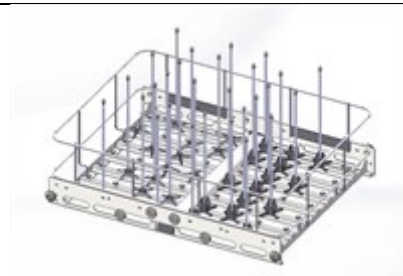**Vhodné pro:**

GW6010L
GW7010T

GW6010T
GW7010TM

GW6010TM

GW7010

GW7010M


INS28U4140R (č. 904893)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 28 POZICEMI**

- vhodné pro mytí 28 kusů středního a malého skla
- vybaven následujícími tryskami: 28 x U4140 (140 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vyroben z nerez oceli

Vhodné pro:

GW6010ML

GW6010MLX

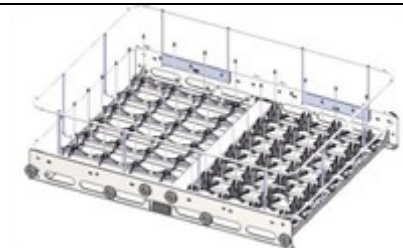**INS28U6260** (č. 903546)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 28 POZICEMI**

- vhodný pro mytí 28 kusů středně velkého skleněného nádobí
- vybaven následujícími tryskami: 28 x U6260 (260 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vhodný pro vozíky CLB210 / CLB310 / CLB510
- vyroben z nerez oceli

Vhodné pro:

GW6010L

GW6010LX

GW6010T


GW6010TM

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

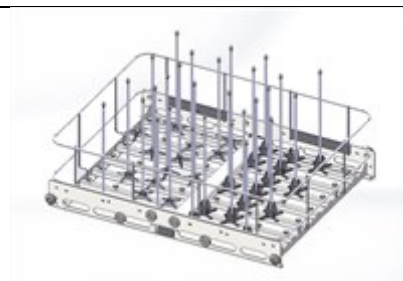**INS28U6260R** (č. 904894)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 28 POZICEMI**

- vhodný pro mytí 28 kusů středně velkého skleněného nádobí
- vybaven následujícími tryskami: 28 x U6260 (260 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vyroben z nerez oceli

Vhodné pro:


GW6010ML

GW6010MLX



INS42U4180 (č. 904096)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK SE 42 POZICEMI**

- vhodný pro mytí 42 kusů středního a malého skla
- vybaven následujícími tryskami: 42 x U4180 (180 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vhodný pro vozíky CLB210 / CLB310 / CLB510
- vyroben z nerez oceli

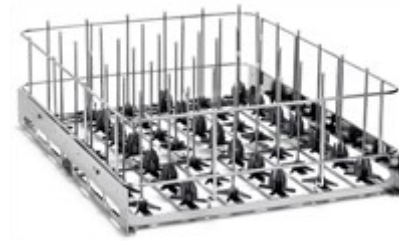**Vhodné pro:**

GW6010L	GW6010LX	GW6010T	GW6010TM	GW7010
GW7010M	GW7010T	GW7010TM		

INS42U4180R (č. 904897)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK SE 42 POZICEMI VHODNÝ PRO JEDNODVEŘOVÉ PŘÍSTROJE ŘADY „L“**

- vhodný pro mytí 42 kusů středního a malého skla
- vybaven následujícími tryskami: 42 x U4180 (180 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vyroben z nerez oceli

**Vhodné pro:**

GW6010ML	GW6010MLX
----------	-----------

INS56BX (č. 904575)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 56 POZICEMI**


- vhodný pro mytí 56 kusů středního a malého skla
- může být vybaven 56 tryskami (nepoužité pozice musí být zakryty uzávěry č. TAPPOUG)
- vhodný pro vozíky CLB210 / CLB310 / CLB510
- vyroben z nerez oceli
- pro konfiguraci trysek se obraťte na dodavatele

**Vhodné pro:**

GW6010L	GW6010LX	GW6010T	GW6010TM	GW7010
GW7010M	GW7010T	GW7010TM		

INS56BXR (č. 904895)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 56 POZICEMI**

- vhodný pro mytí 56 kusů středního a malého skla
- může být vybaven 56 tryskami (nepoužité pozice musí být zakryty uzávěry č. TAPPOUG)
- vyroben z nerez oceli
- pro konfiguraci trysek se obraťte na dodavatele

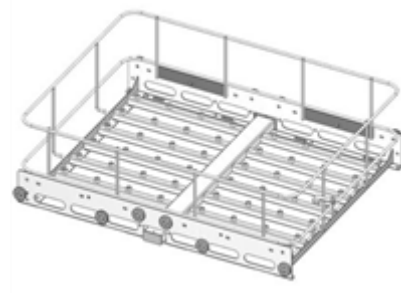**Vhodné pro:**

GW6010ML

GW6010MLX

INS56U390 (č. 903547)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 56 POZICEMI**

- vhodný pro mytí 56 kusů středního a malého skla
- vybaven následujícími tryskami: 56 x U390 (90 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vhodný pro vozíky CLB210 / CLB310 / CLB510
- vyroben z nerez oceli

**Vhodné pro:**

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

INS56U390R (č. 904904)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 56 POZICEMI**

- vhodný pro mytí 56 kusů středního a malého skla
- vybaven následujícími tryskami: 56 x U390 (90 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vyroben z nerez oceli

**Vhodné pro:**

GW6010ML

GW6010MLX

INS56U4140 (č. 903543)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 56 POZICEMI**

- vhodný pro mytí 56 kusů středního a malého skla
- vybaven následujícími tryskami: 56 x U4140 (140 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vhodný pro vozíky CLB210 / CLB310 / CLB510
- vyroben z nerez oceli

**Vhodné pro:**

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

INS56U4140R (č. 904898)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 56 POZICEMI**

- vhodný pro mytí 56 kusů středního a malého skla
- vybaven následujícími tryskami: 56 x U4140 (140 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vyroben z nerez oceli

**Vhodné pro:**

GW6010ML

GW6010MLX

INS56U4180 (č. 903544)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 56 POZICEMI**

- vhodný pro mytí 56 kusů středního a malého skla
- vybaven následujícími tryskami: 56 x U4180 (180 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vhodný pro vozíky CLB210 / CLB310 / CLB510
- vyroben z nerez oceli

**Vhodné pro:**

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM


INS56U4180R (č. 904896)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 56 POZICEMI**

- vhodný pro mytí 56 kusů středního a malého skla
- vybaven následujícími tryskami: 56 x U4180 (180 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vyroben z nerez oceli

Vhodné pro:

GW6010ML

GW6010MLX

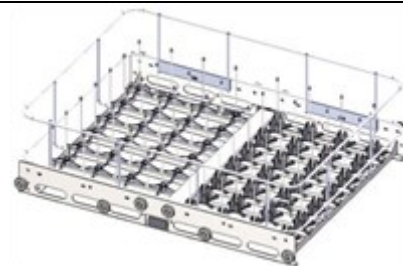**INSM28U4140** (č. 903782)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 28 POZICEMI - POLOPOLICE**

- vhodný pro mytí 28 kusů středního a malého skla
- vybaven následujícími tryskami: 28 x U4140 (140 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vhodný pro vozíky CLB210 / CLB310 / CLB510
- vyroben z nerez oceli

Vhodné pro:

GW6010L

GW6010LX

GW6010T


GW6010TM

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

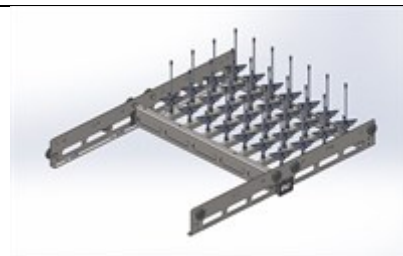**INSM28U4140R** (č. 904902)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 28 POZICEMI - POLOPOLICE**

- vhodný pro mytí 28 kusů středního a malého skla
- vybaven následujícími tryskami: 28 x U4140 (140 mm)
- trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- vyroben z nerez oceli

Vhodné pro:


GW6010ML

GW6010MLX



L680 (č. 900782)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK SE 76 POZICEMI**

- vhodný pro mytí 76 kusů skla středních a malých rozměrů
- vybaven následujícími tryskami: 70 x U4140 (140 mm) + 6 x U3110 (110 mm)
- výškově nastavitelné trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- umístěn na úrovni I nebo II
- ve spojení s podpěrami C61 (úroveň I) nebo C63 (úroveň II)
- vyroben z nerez oceli

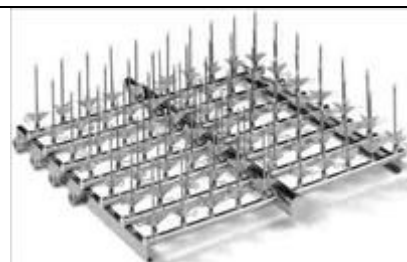
**Vhodné pro:**

GW6290DS

GW6290DSG

L680-LP6 (č. 902616)**KOMBINOVANÝ UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK - MAX. 75 POZIC NEBO PIPETY - MAX. 100 POZIC**

- vhodný pro mytí 75 kusů skla středních a malých rozměrů
- vybaven následujícími tryskami: 70 x U4140 (140 mm) + 5 x U3110 (110 mm)
- výškově nastavitelné trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- umístěný v úrovni I nebo II
- ve spojení s podpěrami C61 (úroveň I) nebo C63 (úroveň II)
- dodáváno s adaptérem LP6 (LP6 není součástí dodávky)
- vyroben z nerez oceli

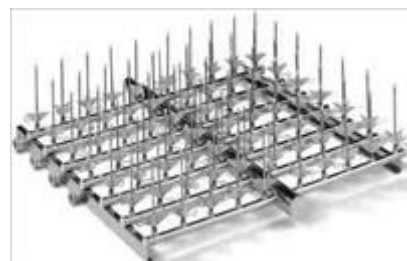
**Vhodné pro:**

GW6290DS

GW6290DSG

L685 (č. 900743)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK SE 76 POZICEMI**

- vhodný pro mytí 76 kusů skla středních a malých rozměrů
- vybaven následujícími tryskami: 6 x U390 (90 mm), 14 x U3110 (110 mm), 28 x U4140 (140 mm), 14 x U4180 (180 mm), 14 x U6240 (240 mm)
- výškově nastavitelné trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- umístěn na úrovni I nebo II
- ve spojení s podpěrami C61 (úroveň I) nebo C63 (úroveň II)
- vyroben z nerez oceli

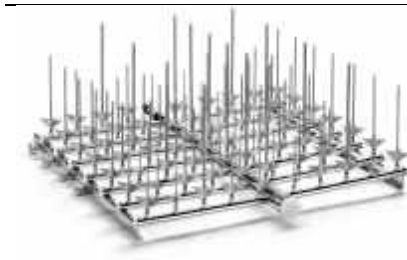
**Vhodné pro:**

GW6290DS

GW6290DSG

L685-LP6 (č. 902617)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK SE 75 POZICEMI**

- vhodný pro mytí 75 kusů skla středních a malých rozměrů
- vybaven následujícími tryskami: 5 x U390 (90 mm), 14 x U3110 (110 mm), 28 x U4140 (140 mm), 14 x U4180 (180 mm), 14 x U6240 (240 mm)
- výškově nastavitelné trysky s podpěrou pro hrdlo skleněného nádobí
- umístěný na úrovni I nebo II
- ve spojení s podpěrami C61 (úroveň I) nebo C63 (úroveň II)
- dodáváno s adaptérem LP6
- vyroben z nerez oceli

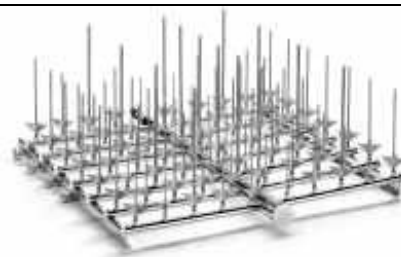**Vhodné pro:**

GW6290DS

GW6290DSG

L685-3KP100 (č. 905585)**VYSOKOKAPACITNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK PRO PIPETY - MAX 300 POZIC**

- složený ze 3 x LP6 speciálních kolektorů (3 x 100 pipet, max. výška 450 mm, max. průměr 8,5 mm)
- umístěný na stroji I nebo II
- ve spojení s podpěrami C61 (úroveň I) nebo C63 (úroveň II)
- vyroben z nerez oceli


**Vhodné pro:**

GW6290DS

GW6290DSG

L690 (č. 900810)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 86 POZICEMI**

- vhodný pro mytí 86 kusů skla středních a malých rozměrů
- vybaven následujícími tryskami: 86 x U3110 (110 mm)
- výškově nastavitelné trysky z polypropylenu
- umístěn na úrovni I, II nebo III
- ve spojení s podpěrami C61 (úroveň I) nebo C63 (úroveň II a III)
- vyroben z nerez oceli

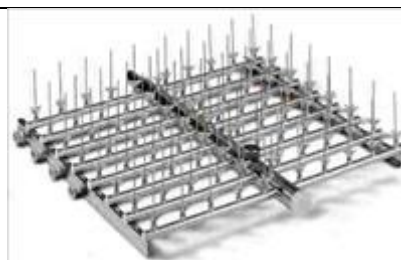**Vhodné pro:**

GW6290DS


GW6290DSG

Vstřikovací vozíky na pipety pro velkokapacitní přístroje

INS152LP (č. 905038)

VSTŘIKOVACÍ MYCÍ POLICE PRO MYTÍ VELKÉHO MNOŽSTVÍM PIPET

- vstřikovací police na mytí velkého množství pipet (2 x 104 = 208)
- vybavena 2 speciálními diskovými kolektory se speciálním zařízením, které umožňuje mytí pipet o max. průměru 18 mm, v max. 550 mm
- vhodná pro vozíky CLB215 / CLB515 / CLB315UNIV - ve kterých lze použít současně pouze s jednou další mycí policí
- vyrobená z nerez oceli

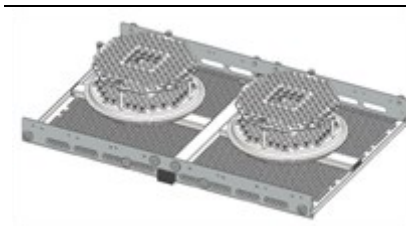

Vhodné pro:


GW7015

GW7015T

INS2LP (č. 904505)

UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK NA PIPETY

- vybaven 208pozicovým stojanem pipet
- pro standardní pipety max. výška 560 mm max. průměr 18 mm
- vhodný pro vozíky CLB210 / CLB310 / CLB510
- vyroben z nerez oceli

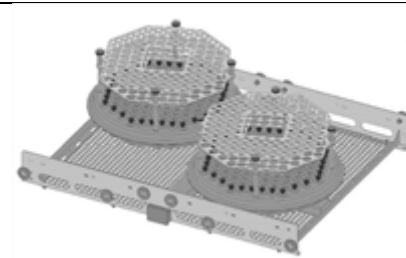

Vhodné pro:

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

INS2LPR (č. 904891)

UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK NA PIPETY

- vybaven 208pozicovým stojanem sběračem pipet
- pro standardní pipety max. výška 560 mm max. průměr 18 mm
- vyroben z nerez oceli



Vhodné pro:

GW6010ML

GW6010MLX

INS56ULB40 (č. 903867)**VSTŘIKOVACÍ VOZÍK NA MYTÍ PIPET S 56 POZICEMI**

- vhodný pro mytí 56 pipet
- vybaven následujícími tryskami: 56 x ULB40 pro pipety max. výška 550 mm
- vhodný pro vozíky CLB210 / CLB310 / CLB510
- vyroben z nerez oceli

**Vhodné pro:**

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

INS56ULB40R (č. 904899)**VSTŘIKOVACÍ VOZÍK NA MYTÍ PIPET S 56 POZICEMI**

- vhodný pro mytí 56 pipet
- vybaven následujícími tryskami: 56 x ULB40 pro pipety max. výška 550 mm
- vyroben z nerez oceli

**Vhodné pro:**

GW6010ML

GW6010MLX

LP6 (č. 900981)**ADAPTÉR NA PIPETY PRO VÍCEPOZICOVÉ SYSTÉMY**

- vhodný pro 100 standardních pipet max. výška 450 mm max. průměr 8,5 mm
- umístění: háčky na odpovídajícím hydraulickém výstupu, který je k dispozici u vstřikovacích systémů L680 a L685

**Vhodné pro:**

GW6290DS

GW6290DSG

Kombinované vozíky se vstřikováním (pipety + úzké hrdlo) pro velkokapacitní myčky

INKLP28U4140R (č. 904890)

INSERT PRO MYTÍ STŘEDNĚ VELKÉHO SKLA

- dvouzónový insert pro současné mytí středně malého skla a pipet / vialek
- vybaven následujícími tryskami: 28 x U4140 (140 mm) pro mytí skla v první oblasti
- speciální kolektor ve druhé oblasti
- vybaven polovičním kolektorem typu LP70 pro pipety s relativní poloviční diskovou podpěrrou, pro mytí 35 standardních pipet výšky max. 450 mm / max. průměr 8,5 mm
- vybaven polovičním sběračem pro vialky typu KP s 35 tryskami U390
- vhodný pro řadu GW6010ML / MLX
- kompletní s 28 plastovými krytkami pro uzavření nepoužitých otvorů
- vyroben z nerez oceli

Vhodné pro:

GW6010ML

GW6010MLX

INS15LP24BX (č. 904607)


UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 24 POZICEMI SE STOJANEM NA PIPETY

- vybaven 70pozicovým stojanem pipet
- pro standardní pipety max. výška 450 mm max. průměr 8,5 mm
- může být vybaven 24 tryskami (nepoužité pozice musí být zakryty uzávěry č. TAPPOUG)
- vhodný pro vozíky CLB215 / CLB315 / CLB515
- vyroben z nerez oceli
- pro konfiguraci trysek se obraťte na dodavatele

Vhodné pro:

GW7015

GW7015T

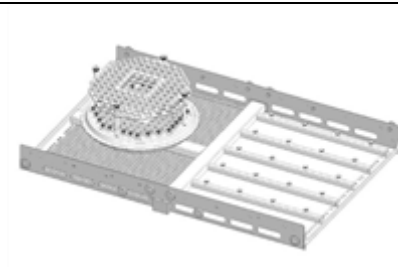

INSLP28U4140 (č. 903780)**UNIVERZÁLNÍ VSTŘIKOVACÍ VOZÍK S 28 POZICEMI SE STOJANEM NA PIPETY**

- vybaven následujícími tryskami: 28 x U4140 (140 mm)
- vybaven 70pozicovým sběračem pipet pro standardní pipety max. výška 450 mm max. průměr 8,5 mm
- vhodný pro vozíky CLB210 / CLB310 / CLB510
- vyroben z nerez oceli

**Vhodné pro:**

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010


GW7010M

GW7010T

GW7010TM

INSLP28U4140R (č. 904901)**DVOUZÓNOVÝ INSERT PRO SOUČASNÉ MYTÍ STŘEDNĚ VELKÉHO SKLA A PIPET**

- dvouzónová vložka pro současné mytí středně velkého skla a pipet
- vybaven následujícími tryskami: 28 x U4140 (140 mm) pro mytí skla v první oblasti
- vybavena stojanem pipet LP70 s příslušnou diskovou podporou ve druhé zóně
- k mytí 70 standardních pipet se speciálním zařízením, které umožňuje mytí pipet o max. průměru 18 mm, výška max. 550 mm
- kompletní s 28 plastovými krytkami pro uzavření nepoužitých otvorů
- vhodný pro přístroje řady GW6010ML / MLX
- vyroben z nerez oceli

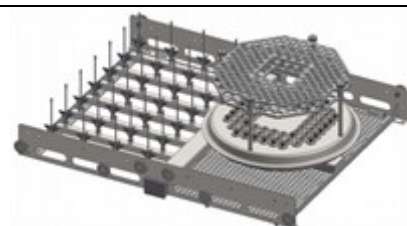**Vhodné pro:**

GW6010ML

GW6010MLX

INSPIPE31R (č. 905037)


INSERT S PODPOROU PRO MYTÍ ZKUMAVEK

- Produkt se skládá z:
- 1 police s manifoldem a podpěrou pro zkumavky
- 1 manifold s 16 tryskami se silikonovými krytkami Ø6mm otvory
- 1 manifold s 12 vstřikovacími tryskami pro zkumavky a 3 závitovými fitinky 3/8"
- může být umístěn pouze na první (spodní) úrovni stroje s vodícími tyčemi v komoře
- Konfigurace a maximální zpracovatelné zatížení:
- max. 16 zkumavek vnější průměr min. 6 mm / max 8. mm max. délka 30 cm
- max. 4 zkumavky vnitřní Ø 10 mm, max. délka 150 cm
- max. 4 zkumavky vnitřní Ø 14 mm, max. délka 150 cm
- max. 4 zkumavky vnitřní Ø 12 mm, max. délka 150 cm
- max. 3 zkumavky z nerez oceli, připojení 3/8" délka 150 cm
- pro přístroje GW6010ML/GW6010MLX

Vhodné pro:

GW6010ML

GW6010MLX

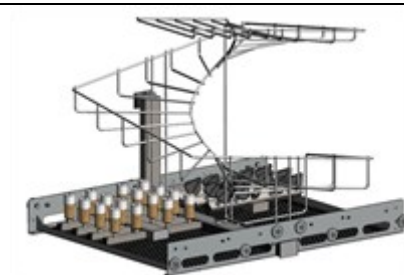

Vozíky se vstřikováním pro velké sklo

C636-I (č. 903569)

VOZÍK SE VSTŘIKOVÁNÍM NA LAHVE SE SYSTÉMEM SUŠENÍ

- vhodný pro mytí a sušení 36 lahví s úzkým hrdlem o objemu 250 - 1000 ml
- maximální rozměr láhve - průměr: 90 mm, výška: 285 mm
- vybaven následujícími tryskami: 36 x U6240 (240 mm)
- umístěný na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli



Vhodné pro:


GW6290DS

GW6290DSG

C624-I (č. 905647)

VOZÍK SE VSTŘIKOVÁNÍM S 24 POZICEMI NA LAHVE, SE SYSTÉMEM SUŠENÍ

- vhodný pro mytí a sušení 20 lahví nebo kádinek o maximálním průměru 110 mm a 4 lahví nebo kádinek o maximálním průměru 140 mm
- vybaven následujícími tryskami: 24 x U6240 (240 mm)
- umístěn na spodní úrovni
- vyroben z nerez oceli

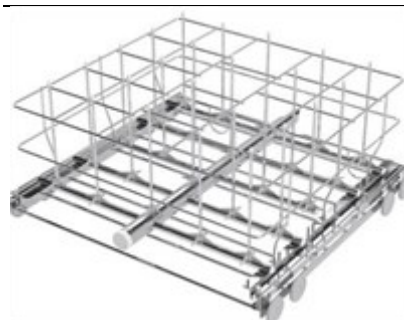

Vhodné pro:


GW6290DS

GW6290DSG

C636-S (č. 903568)

SE VSTŘIKOVÁNÍM NA LAHVE SE SYSTÉMEM SUŠENÍ

- vhodný pro mytí a sušení 36 lahví s úzkým hrdlem o objemu 250 - 1000 ml
- maximální rozměr láhve - průměr: 90 mm, výška: 285 mm
- vybaven následujícími tryskami: 36 x U6240 (240 mm)
- umístěn na horní úrovni
- vyroben z nerez oceli

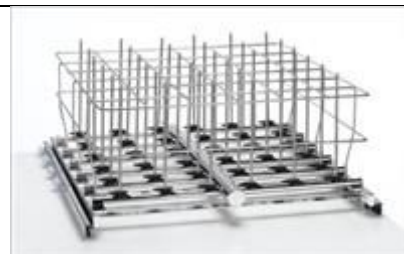

Vhodné pro:


GW6290DS

GW6290DSG

C65-I (č. 901756)

SPODNÍ VOZÍK SE VSTŘIKOVÁNÍM NA VELKÉ LAHVE

- spodní mycí a sušící vstříkovací vozík pro 9 velkých lahví
- maximální rozměry lahve - průměr: 175 mm, výška: 285 mm
- vyroben z nerez oceli

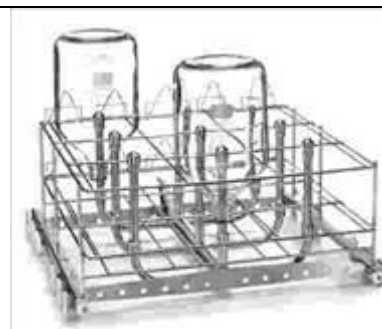

Vhodné pro:


GW6290DS

GW6290DSG

C65-S (č. 901758)

HORNÍ VOZÍK SE VSTŘIKOVÁNÍM NA VELKÉ LAHVE

- horní mycí a sušící vstříkovací vozík pro 9 velkých lahví
- maximální rozměry lahve - průměr: 175 mm, výška: 285 mm
- vyroben z nerez oceli

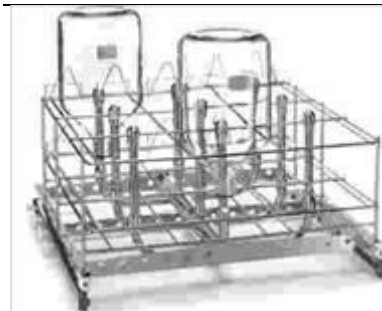

Vhodné pro:

GW6290DS

GW6290DSG

COCI42 (č. 954384)

STOJAN NA ODMĚRNÉ VÁLCE

- vhodný pro mytí 4 válců od 500 ml do 2000 ml (průměr max: 85 mm, výška min: 360 mm, max: 568 mm)
- vybaven následujícími tryskami: 4 x U6370 (370 mm)
- pogumované podpěry pro ochranu hran hrdel válců
- použití na vozících LCB6010
- celkový rozměr rovný polovině mycí plochy



Vhodné pro:

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

COCI42R (č. 955920)**INSERT PRO ODMĚRNÉ VÁLCE**

- ke kombinaci s LCB6010R
- vybaven 4 tryskami U6370 s podpěrou a 4 pryžovými podpěrami 100 mm

**Vhodné pro:**

GW6010ML

GW6010MLX

COCI9215 (č. 955057)**STOJAN NA ODMĚRNÉ VÁLCE**

- vhodný pro mytí 9 válců od 500 ml do 2000 ml (průměr max: 85 mm, výška min: 360 mm, max: 568 mm)
- vybaven následujícími tryskami: 9 x U6370 (370 mm)
- pogumované podpěry pro ochranu hran hrdel válců
- použití na vozících LCB7015
- celkový rozměr rovný polovině mycí plochy

**Vhodné pro:**

GW7015

GW7015T

INS1515BX (č. 904887)**MODULÁRNÍ MYCÍ POLICE VSTŘIKOVÁNÍ**

- modulární polička na mytí vstřikováním
- může být vybavena maximálně 15 vstřikovači, dokonce i navzájem odlišnými, pro mytí skleněného nádobí různých velikostí
- osadíte vložku požadovanými tryskami (nekryté pozice musí být uzavřeny uzávěrem TAPPOUG)
- výškově nastavitelný obvodový rám a nastavitelné přepážky pro nejlepší uložení skla
- vhodná pro vozíky CLB215 / CLB515 / CLB315UNIV
- vyrobena z nerez oceli
- pro konfiguraci trysek požádejte dodavatele


**Vhodné pro:**

GW7015

GW7015T

INS1528BX (č. 904605)**UNIVERZÁLNÍ VOZÍK SE VSTŘIKOVÁNÍM S 28 POZICEMI**

- vhodný pro mytí 28 kusů středního a malého skla
- může být vybaven 28 tryskami (nepoužité pozice musí být zakryty uzávěry č. TAPPOUG)
- vhodný pro vozíky CLB215 / CLB315 / CLB515 a CLB315UNIV
- vyroben z nerez oceli
- pro konfiguraci trysek se obraťte na dodavatele

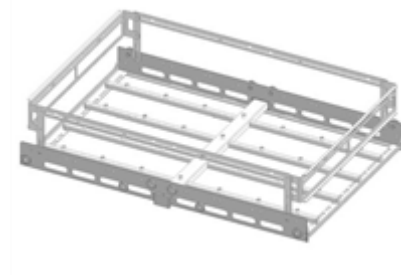**Vhodné pro:**

GW7015

GW7015T

INS28BX (č. 905134)**MODULÁRNÍ MYCÍ POLICE VSTŘIKOVÁNÍ - 28 POZIC**

- modulární polička na mytí vstřikováním
- může být vybavena maximálně 28 vstřikovači, i mezi sebou odlišnými, pro mytí skleněného nádobí různých velikostí
- osadte insert požadovanými tryskami (nekryté pozice musí být uzavřeny uzávěry č. TAPPOUG)
- vhodná pro vozíky CLB210/310/510/CLB310UNIV
- vyrobena z nerez oceli
- pro konfiguraci trysek se obraťte na dodavatele

**Vhodné pro:**

GW6010L

GW6010LX

GW6010T

GW6010TM

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

INS28BXR (č. 905133)

MODULÁRNÍ MYCÍ POLICE VSTŘIKOVÁNÍ - 28 POZIC

- modulární polička na mytí vstřikováním
- může být vybavena maximálně 28 vstřikovači, i mezi sebou odlišnými, pro mytí skleněného nádobí různých velikostí
- osadíte insert požadovanými tryskami (nekryté pozice musí být uzavřeny uzávěry č. TAPPOUG)
- vhodná pro stroje s vedením do komory GW6010ML / GW6010MLX
- vyrobena z nerez oceli
- pro konfiguraci trysek se obraťte na dodavatele



Vhodné pro:


GW6010ML

GW6010MLX

INSLB4R (č. 905055)

MYCÍ INSERT PRO VELKÉ LAHVE

- mycí vložka na velké lahve
- k dispozici pro přístroje řady GW6010ML a GW6010MLX, pro použití pouze na první úrovni
- vhodný pro mytí maximálně 3 lahví o průměru 250 mm a výšce 500 mm (13 litrů), nebo pro maximálně 4 lahví o průměru 230 mm a výšce 500 mm (10 litrů)
- vybaven 4 tryskami ULB6140, 4 držáky na láhve 100 mm, výškově nastavitelným obvodovým rámem a řadou nastavitelných přepážek
- vyroben z nerez oceli

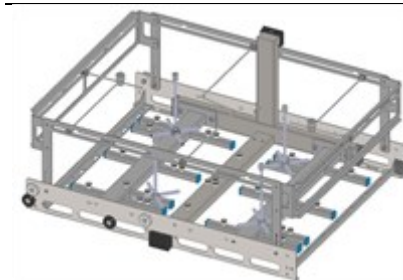

Vhodné pro:

GW6010ML

GW6010MLX

LM6-5 (č. 904766)

VOZÍK NA VELKÉ LAHVE NEBO SOUDKY

- vstřikovací vozík pro mytí a sušení velkých lahví a/nebo sudů
- lze upravit pro mytí až 5 velkých lahví/soudků (od 1 do 5 trysek)
- maximální rozměry soudku D x H x V: 600 x 600 x 800 mm
- podpěry lze nastavit podle výšky láhve / soudku
- vyroben z nerez oceli



Vhodné pro:

GW6290DS

GW6290DSG

L685CIL (č. 903204)**VOZÍK SE VSTŘIKOVÁNÍM PRO 12 ODMĚRNÝCH VÁLCŮ**

- vhodný pro mytí a sušení 12 válců od 500 ml do 2000 ml
- vybaven 12 speciálními tryskami se spirálovým stříkacím efektem pro mytí okrajů a dna
- 6 trysek délky 390 mm a 6 trysek délky 440 mm
- možné konfigurace: 12 x 1000 ml válce nebo 3 x 2000 ml válce + 6 x 1000 ml válce + 3 x válce 500 ml nebo 6 x válce 1000 ml + 6 x válce 1000 ml
- odnímatelné podpěry umožňují různé konfigurace zátěže zaručující značnou flexibilitu
- optimální sklon, aby se zabránilo stagnaci vody na základně a uvnitř válců
- umístění v myčce na první úrovni a zabírá 2/3 mycí komory
- vyroben z nerez oceli

Vhodné pro:

GW6290DS

GW6290DSG

**L690CIL** (č. 903715)**VOZÍK SE VSTŘIKOVÁNÍM PRO 36 ODMĚRNÝCH VÁLCŮ**

- vhodný pro mytí a sušení 36 válců od 350 do 700 mm s maximálním průměrem 85 mm
- vybaven následujícími tryskami: 36 x U6370 (370 mm)
- umístěn v myčce na první úrovni
- vyroben z nerez oceli

Vhodné pro:

GW6290DS

GW6290DSG



Vozíky se vstřikováním pro vialky a konické centrifugační zkumavky *pro velkokapacitní přístroje*

INSKP200 (č. 904232)

VOZÍK SE VSTŘIKOVÁNÍ PRO ZKUMAVKY

- vhodný pro mytí vialek, kónických centrifugačních zkumavek, rotorů centrifug
- vybaven následujícími tryskami: 208 x U390 (90 mm)
- vhodný pro vozíky CLB210 / CLB310 / CLB510
- vyroben z nerez oceli



Vhodné pro:

GW6010L	GW6010LX	GW6010T	GW6010TM	GW7010
GW7010M	GW7010T	GW7010TM		

INSKP200R (č. 904900)

VOZÍK SE VSTŘIKOVÁNÍ PRO ZKUMAVKY

- vhodný pro mytí vialek, kónických centrifugačních zkumavek, rotorů centrifug
- vybaven následujícími tryskami: 208 x U390 (90 mm)
- vyroben z nerez oceli




Vhodné pro:

GW6010ML	GW6010MLX
----------	-----------

L6208 (č. 905162)

INSERT SE SVTRÍKOVÁNÍM S 208 POZICEMI

- vhodný pro mytí 208 vialek, zkumavek / malého skleněného nádobí
- vybaven následujícími tryskami: 208 x U390 (90 mm)
- výškově nastavitelné trysky z polypropylenu
- umístěn v přístroji GW6290DS (nebo kompatibilních předchůdcích) na úrovni I, II nebo III
- ve spojení s podpěrami C61 (úroveň I) nebo C63 (úroveň II a III)
- vyroben z nerez oceli

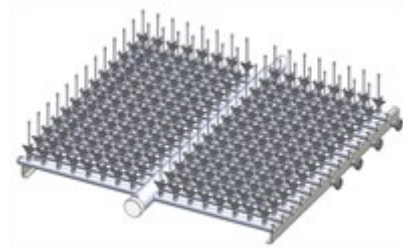

Vhodné pro:

GW6290DS

GW6290DSG

Systémy pro přenos

DIS-WD5 (č. 902411)

ODKLÁDACÍ VOZÍK PRO PŘÍSTROJE 60 - 90 CM S PODSTAVCEM

- pro nakládání a vykládání vozíků myček
- vybaven 4 otočnými a 2 uzamykatelnými kolečky
- vybaven dvojitou rukojetí pro pohyb
- spodní úroveň pro přidržovací podpěry nebo jiné vozíky
- systém pro sběr kapalných zbytků podle požadavků platné normy ISO EN 15883-1
- vyroben z nerez oceli



Vhodné pro:

GW0260-00-00J	GW0260-S0-00J	GW1260-00-000	GW1260-S0-000	GW1260-SC-000
GW3060BX	GW3060BXA	GW3060BXC	GW3060BXCA	GW3060P
GW3060PA	GW3060S	GW3060SA	GW3060SC	GW3060SCA
GW4090	GW4090A	GW4090BXC	GW4090BXCA	GW4090BXP
GW4090C	GW4090CA	GW4090P	GW4090PA	GW4260-00-000
GW4260-S0-000	GW4260-SC-000	GW4290-00-000	GW4290-SC-000	

DIS-WD6010 (č. 903455)

ODKÁDACÍ VOZÍK PRO DVOUDVĚŘOVÉ MYČKY

- odkládací vozík s bezpečnostním blokovacím systémem pro vkládání/vykládání mycích košů do mycího dezinfekčního zařízení
- vana ve tvaru kosočtverce pro zachycování kapaliny odkapávající z náplně
- vybaven 4 otočnými a uzamykatelnými kolečky
- vybaven ergonomickou rukojetí pro přepravu
- bezpečnostní systém pro zamykání mycích vozíků
- systém pro sběr kapalných zbytků podle požadavků platné normy ISO EN 15883-1
- vyroben z nerez oceli AISI 304



Vhodné pro:

GW6010L	GW6010LX	GW6010ML	GW6010MLX	GW6010T
GW6010TM				

DIS-WD7010 (č. 903456)

ODKLÁDACÍ VOZÍK PRO DVOUDVĚŘOVÉ MYČKY

- odkládací vozík s bezpečnostním blokovacím systémem pro vkládání/vykládání mycích košů do mycího dezinfekčního zařízení
- vana ve tvaru kosočtverce pro zachycování kapaliny odkapávající z náplně
- vybaven 4 otočnými a uzamykatelnými kolečky
- vybaven ergonomickou rukojetí pro snadné ovládání
- bezpečnostní systém pro zamykání mycích vozíků
- systém pro sběr kapalných zbytků podle požadavků platné normy ISO EN 15883-1
- vyroben z nerez oceli AISI 304



Vhodné pro:

GW7010

GW7010M

GW7010T

GW7010TM

DIS-WD7015 (č. 903862)

ODKLÁDACÍ VOZÍK

- odkládací vozík s bezpečnostním blokovacím systémem pro vkládání/vykládání mycích košů do mycího dezinfekčního zařízení
- vana ve tvaru kosočtverce pro zachycování kapaliny odkapávající z náplně
- vybaven 4 otočnými a uzamykatelnými kolečky
- vybaven ergonomickou rukojetí pro přepravu
- bezpečnostní systém pro zamykání mycích vozíků
- systém pro sběr kapalných zbytků podle požadavků platné normy ISO EN 15883-1
- vyroben z nerez oceli AISI 304



Vhodné pro:

GW7015

GW7015T

Stojany a košíky

Stojany pro lahve a kádinky

SB14 (č. 901323)

PRUŽINOVÝ STOJAN - 14 POZIC

- pro kádinky / Erlenmeyerovy baňky od 250 do 1000 ml
- rozměry D x H x V: 146 x 422 x 184 mm
- zabírá 1/2 vozíku D-CS1 / D-CS2
- vyroben z nerez oceli



SB15 (č. 900309)

PRUŽINOVÝ STOJAN - 16 POZIC

- pro kádinky / Erlenmeyerovy baňky od 500 do 1000 ml
- rozměry D x H x V: 195 x 400 x 185 mm
- zabírá 1/2 vozíku CS1-1 / CS2
- vyroben z nerez oceli



SB25 (č. 900651)

PRUŽINOVÝ STOJAN - 28 POZIC

- pro kádinky / Erlenmeyerovy baňky od 250 do 500 ml
- rozměry D x H x V: 195 x 400 x 185 mm
- zabírá 1/2 vozíku CS1-1 / CS2
- vyroben z nerez oceli



SB28 (č. 902290)

PRUŽINOVÝ STOJAN - 28 POZIC

- pro kádinky / Erlenmeyerovy baňky od 250 do 1000 ml
- rozměry D x H x V: 195 x 400 x 185 mm
- zabírá 1/2 vozíku CS1-1 / CS2
- vyroben z nerez oceli



SB30 (č. 900652)

30 POZICOVÝ STOJAN PRO KÁDINKY

- pro válce o max. objemu 100 ml a nálevky
- rozměry D x H x V: 195 x 400 x 150 mm
- zabírá 1/2 vozíku CS1-1 / CS2
- vyroben z nerez oceli



SB50 (č. 903673)

50 POZICOVÝ STOJAN PRO KÁDINKY


- pro kádinky o objemu max. 250 ml
- rozměry D x H x V: 255 x 455 x 155 mm
- zabírá 1/2 vozíku INSPLAV10
- vyroben z nerez oceli



SB9 (č. 901324)

9 POZICOVÝ STOJAN PRO KÁDINKY

- pro válce o max. objemu 100 ml a nálevky
- rozměry D x H x V: 145 x 420 x 160 mm
- zabírá 1/2 vozíku D-CS1 / D-CS2
- vyroben z nerez oceli

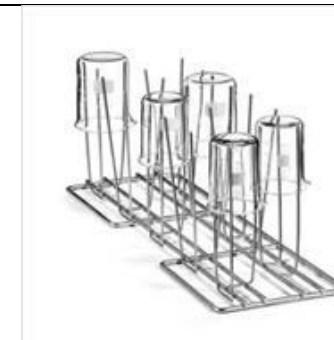

Stojánky na sklíčka a desky

PV105 (č. 900372)

KOŠÍK PRO MIKROSKOPICKÁ SKLÍČKA

- vhodný pro mytí 105 standardních mikroskopických sklíček
- rozměry D x H x V: 220 x 143 x 60 mm
- vyroben z nerez oceli



SL18 (č. 900596)

KOŠÍK SE STOJANEM PRO CHROMATOGRAFICKÉ DESKY

- kapacita: 18 desek 200 x 200 mm
- rozměry D x H x V: 465 x 215 x 130 mm
- zabírá 1/2 vozíku CS1-1 / CS2
- vyroben z nerez oceli



SL9 (č. 900768)

STOJAN PRO CHROMATOGRAFICKÉ DESKY

- vhodný pro mytí až 9 desek s rozměry od 150 x 150 mm do 220 x 220 mm
- rozměry D x H x V: 395 x 195 x 110 mm
- zabírá 1/2 vozíku CS1-1 / CS2
- vyroben z nerez oceli




Stojany na lahve

PB100 (č. 900932)

STOJAN NA 100ML ŠIROKOHRDLÉ LAHVE


- kapacita: 36 x 100 ml širokohrdlých lahví (šroubovací uzávěr GL 45 ISO 4796 nebo DIN 12038 nebo podobné)
- maximální rozměr lahve PRŮMĚR x V: 56 x 100 mm
- umístěn na spodní pozici vozíku CS2
- vyroben z nerez oceli

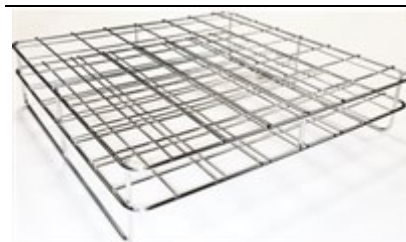

PB1000 (č. 900931)

STOJAN NA 1000ML ŠIROKOHRDLÉ LAHVE


- kapacita: 16 x 1000 ml širokohrdlých lahví (šroubovací uzávěr GL 45 ISO 4796 nebo DIN 12038 nebo podobné)
- maximální rozměr lahve PRŮMĚR x V: 110 x 225 mm
- umístěn na spodní pozici vozíku CS2; horní košík musí být umístěn na vhodné horní pozici
- vyroben z nerez oceli

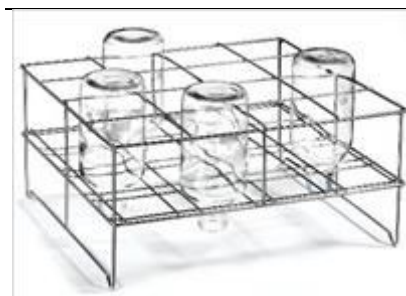

PB250 (č. 900757)

STOJAN NA 250ML ŠIROKOHRDLÉ LAHVE

- kapacita při umístění na spodní pozici vozíku CS2: 25 x 250 ml širokohrdlých lahví (šroubovací uzávěr GL 45 ISO 4796 nebo DIN 12038 nebo podobné)
- kapacita při umístění na spodní pozici vozíku CS1-1: 24 x 250 ml širokohrdlých lahví (šroubovací uzávěr GL 45 ISO 4796 nebo DIN 12038 nebo podobné)
- maximální rozměr lahve PRŮMĚR x V: 70 x 138 mm
- vyroben z nerez oceli

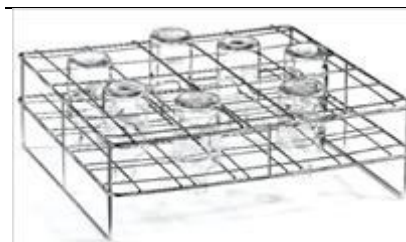

PB50 (č. 900930)**STOJAN PRO 50 ML ŠIROKOHRLÉ LAHVE**

- kapacita: 56 x 50 ml širokohrdlých lahví (šroubovací uzávěr GL 32 ISO 4796 nebo DIN 12038 nebo podobná)
- maximální rozměry lahve PRŮMĚR x V: 46 x 87 mm
- umístěn na základní pozici vozíku CS1-1 / CS2
- vyroben z nerez oceli

**PB500** (č. 900756)**STOJAN NA 500ML ŠIROKOHRLÉ LAHVE**

- kapacita: 21 x 500 ml širokohrdlých lahví (šroubovací uzávěr GL 32 ISO 4796 nebo DIN 12038 nebo podobná)
- maximální rozměry lahve PRŮMĚR x V: 90 x 176 mm
- umístěn na spodní pozici vozíku CS2
- vyroben z nerez oceli

**PB6000** (č. 901662)**STOJAN NA ŠIROKOHRLÉ LAHVE**

- kapacita: 25 kusů Erlenmeyerových baněk od 1000 ml do 5000 ml a/nebo širokohrdlých lahví od 1000 ml (šroubovací uzávěr GL 45 ISO 4796 nebo DIN 12038 nebo podobné)
- síto 80 x 80 mm
- vyroben z nerez oceli

**Vhodné pro:**

GW6290DS

GW6290DSG

Stojany na zkumavky

CP105 (č. 900070)

KOŠÍK NA ZKUMAVKY - V = 75 MM

- kapacita: 160 standardních zkumavek
- vybaven 2 oddělitelnými částmi s víkem
- zabírá 1/2 vozíku D-CS2
- zabírá 1/4 vozíku CS1-1 / CS2
- vyroben z nerez oceli



CP132 (č. 900071)

KOŠÍK NA ZKUMAVKY - V = 105 MM

- kapacita: 160 standardních zkumavek
- vybaven 2 oddělitelnými částmi s víkem
- zabírá 1/2 vozíku D-CS2
- zabírá 1/4 vozíku CS1-1 / CS2
- vyroben z nerez oceli



CP192 (č. 900072)

KOŠÍK NA ZKUMAVKY - V = 165 MM

- kapacita: 160 standardních zkumavek
- vybaven 2 oddělitelnými částmi s víkem
- zabírá 1/2 vozíku D-CS2
- zabírá 1/4 vozíku CS1-1 / CS2
- vyroben z nerez oceli



CP222 (č. 900073)

KOŠÍK NA ZKUMAVKY - V = 200 MM

- kapacita: 160 standardních zkumavek
- vybaven 2 oddělitelnými částmi s víkem
- zabírá 1/2 vozíku D-CS2
- zabírá 1/4 vozíku CS1-1 / CS2
- vyroben z nerez oceli




Stojan na Petriho misky

PD100I (č. 900582)

SPODNÍ STOJAN PRO PETRIHO MISKY 70 - 120 MM


- kapacita: 42 kusů
- rozměry D x H: 456 x 460 mm
- umístěn na spodním vozíku CS2
- vyroben z nerez oceli

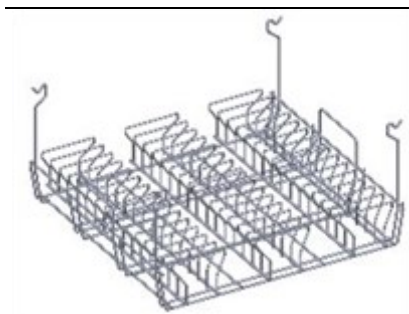

PD100S (č. 900583)

HORNÍ STOJAN PRO PETRIHO MISKY 70 - 120 MM


- kapacita: 38 kusů
- rozměry D x H: 456 x 460 mm
- umístěn na horním vozíku CS1-1 nebo na stojanu PD70I / PD100I
- vyroben z nerez oceli

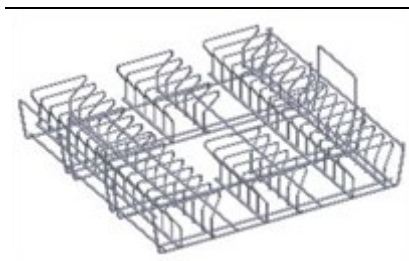

PD70I (č. 900717)

SPODNÍ STOJAN PRO PETRIHO MISKY 50 - 70 mm

- kapacita: 42 kusů
- rozměry D x H: 456 x 460 mm
- umístěn na spodním vozíku CS2
- vyroben z nerez oceli

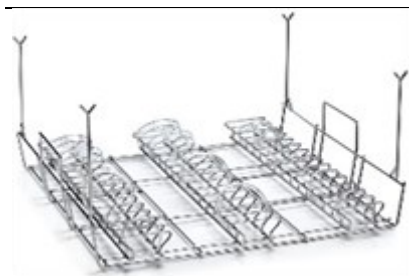

PD70S (č. 900718)

HORNÍ STOJAN PRO PETRIHO MISKY 50 - 70 mm

- kapacita: 40 kusů
- rozměry D x H: 456 x 460 mm
- umístěn na horním vozíku CS1-1 nebo na stojanu PD70I / PD100I
- vyroben z nerez oceli



Spodní přihrádky na malé sklo a síťovina

D-PF1 (č. 901392)

KOMPLETNÍ NEREZOVÉ DNO PRO HORNÍ VOZÍK

- vyrobeno z nerezové síťoviny - síto 10 x 10 mm
- rozměry D x H x V: 305 x 425 x 11 mm
- umístěno na horním vozíku D-CS1



D-PF2 (č. 901393)

KOMPLETNÍ NEREZOVÉ DNO PRO SPODNÍ VOZÍK


- vyrobeno z nerezové síťoviny - síto 10 x 10 mm
- rozměry D x H x V: 305 x 425 x 11 mm
- umístěno na spodním vozíku D-CS2



PF1 (č. 900155)

KOMPLETNÍ NEREZOVÉ DNO PRO HORNÍ VOZÍK


- vyrobeno z nerezové síťoviny - síto 10 x 10 mm
- rozměry D x H x V: 454 x 434 x 11 mm
- umístěno na horním vozíku CS1-1

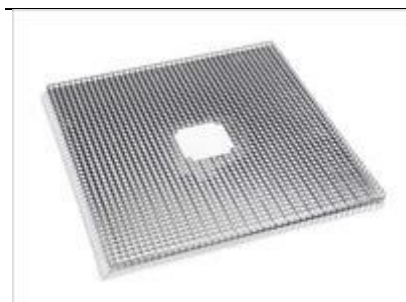

PF1/2 (č. 900154)

POLOVIČNÍ NEREZOVÉ DNO PRO SPODNÍ KOŠÍK

- vyrobeno z nerezové síťoviny - síto 10 x 10 mm
- rozměry D x H x V: 224 x 434 x 11 mm

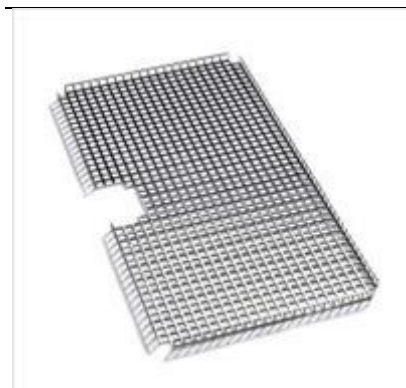

PF10 (č. 903548)**NEREZOVÉ DNO PRO VOZÍK**

- vyrobeno z nerezové síťoviny - síto 10 x 10 mm
- k umístění na vozík CLB310UNIV

**PF10R** (č. 905043)**NEREZOVÁ SPODNÍ DESKA PRO INSL6010R**

- spodní deska z nerez oceli
- k umístění na základnu insertu INSL6010R
- vyrobena z ploché sítě - 10 x 10 mm oka, nerez ocel

**Vhodné pro:**

GW6010ML

GW6010MLX

PF15 (č. 904604)**NEREZOVÉ DNO PRO VOZÍK**

- vyrobeno z nerezové síťoviny - síto 10 x 10 mm
- k umístění na vozík CLB315UNIV

**PF2** (č. 900637)**KOMPLETNÍ NERAZOVÉ DNO PRO SPODNÍ VOZÍK**

- vyrobeno z nerezové síťoviny - síto 10 x 10 mm
- rozměry D x H x V: 454 x 434 x 11 mm
- k umístění na spodní vozík CS2



RC1 (č. 900164)

KOMPLETNÍ UPEVNĚVACÍ SÍTKA NA SKLO

- nylonová síťovina 25 x 25 mm
- rozměry D x H: 474 x 516 mm
- umístěna na spodním vozíku CS



RC1/2 (č. 900163)

UPEVNĚVACÍ SÍTKA NA SKLO

- nylonová síťovina 25 x 25 mm
- rozměry D x H: 456 x 214 mm
- zabírá 1/2 vozíku CS1-1 / CS2



RC1/4 (č. 900165)

UPEVNĚVACÍ SÍTKA NA SKLO

- nylonová síťovina 10 x 10 mm
- rozměry D x H: 204 x 204 mm
- zabírá 1/4 vozíku CS1-1 / CS2




SPECIÁLNÍ STOJANY

CSST (č. 904811)

SPECIÁLNÍ STOJAN


- speciální vlnitý stojan
- pro mytí speciálních výrobků, jako jsou ochranné brýle nebo protézy
- k umístění na CSKDIN
- vyroben z nerez oceli

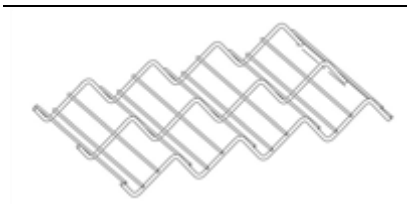

KITDIV1512 (č. 904606)

SADA NEREZOVÝCH DĚLICÍCH TYČÍ

- sada se skládá z tyčí z nerez oceli a příslušných pojistných kroužkových matic
- vytvořena tak, aby zabránila vzájemnému kontaktu skla a jiných předmětů během mycího procesu
- vyrobená z nerez oceli

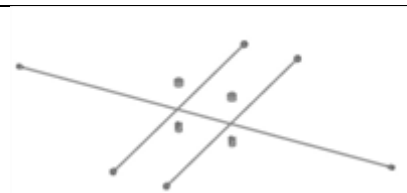

Vhodné pro:


GW7015

GW7015T

SM9I (č. 904742)

STOJAN NA OBLIČEJOVÉ MASKY

- stojan pro umístění na CS2
- určen k mytí obličejových masek a ochranných štítů

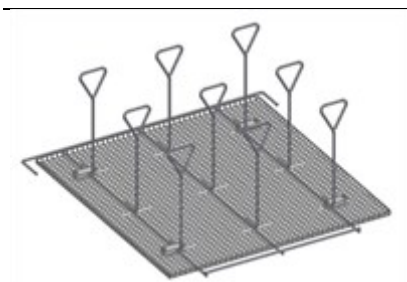

Košíky

CPS20 (č. 900824)

KOŠÍK S VÍKEM

- kovová síťovaná nádoba s víkem
- k umístění na standardním nosiči CS3
- dva koše lze překrýt, aby se zvýšila nosnost pro chirurgické nástroje.
- vyroben z nerez oceli
- potřebné místo: polovina stojanu pro každou úroveň
- rozměry: 430 x 190 x 60 mm (D x H x V)
- síťka 5 x 5 mm



CSK1/3 (č. 900522)

KOŠ NA NÁSTROJE S MADLY

- vhodný pro držení různých středně velkých nástrojů
- rozměry D x H x V: 435 x 160 x 50 mm
- síťovina 5 x 5 mm
- vyroben z nerez oceli



CSK2 (č. 900020)

KOŠ S MADLY


- vhodný pro držení různých středně velkých nástrojů
- rozměry D x H x V: 450 x 225 x 50 mm
- síťovina 5 x 5 mm
- vyroben z nerez oceli



CSM4 (č. 904065)

PODPORA MATRIC

- pevná podpora pro mytí matrice
- rozměry D x H x V: 480 x 245 x 50 mm
- síťovina 5 x 5 mm
- vyrobena z nerez oceli

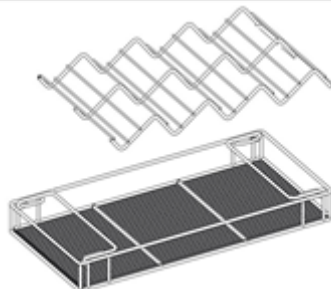

Příslušenství pro vodu

IC3000 (č. 901210)

DIGITÁLNÍ KONDUKTOMĚR PRO WP3000

- ke sledování vodivosti na vstupu vody
- rozsah $0,01 \div 19,99 \mu\text{S} \pm 2 \%$
- teplotní kompenzace a alarm LED s nastavitelnou žádanou hodnotou $1-5 \mu\text{S}$
- vstupní/výstupní konektory $3/4''$
- délka kabelu senzoru 2 m
- napájení 12V



PD50 (č. 900984)

POMOCNÁ NÁDRŽ 50 L

- nádrž 50 litrů
- vhodná pro dodávání demineralizované vody do myčky
- vyrobena z PE-HD
- $3/4''$ BSP kohoutek
- rozměry PRŮMĚR x V: 340 x 640 mm



PDA41 (č. 904235)

NÁDRŽ NA AUTOKLÁVOVANOU VODU 41 L

- 41litrová tlaková membránová nádrž
- vhodná pro dodávání demineralizované vody do myčky
- vnější povrch z oceli lakovaný bílou barvou
- 1" zásuvka BSPP
- vybavena závitovým nástavcem $M1 \times 1/4''$, doplněným kolenovým kulovým kohoutem s $3/8''$ hadicovou přípojkou
- maximální pracovní tlak: 7 bar
- minimální pracovní tlak: 1 bar
- rozměry PRŮMĚR x V: 390 x 575 mm



PDA75 (č. 901578)

NÁDRŽ NA AUTOKLÁVOVANOU VODU 75 L

- nádrž 75 litrů
- vhodná pro dodávání demineralizované vody do myčky
- epoxidový základní nátěr
- vysoce kvalitní butylová membrána
- vložka z čistého polypropylenu
- maximální pracovní tlak: 7 bar
- předběžné naplnění nádrže: 0,5 bar
- rozměry PRŮMĚR x V: 400 x 800 mm



SDA100 (č. 901021)

POMOCNÁ NÁDRŽ 100 L S AUTOMATICKOU KONTROLOU HLADINY

- nádrž 100 litrů
- vhodná pro dodávání demineralizované vody do myčky
- vyrobena z PE-HD
- s automatickým řízením hladiny pro externí přívod vody
- kompatibilní s demivodním čerpadlem PAD / PAD2
- rychlé připojení pro 8 mm hadice z PE
- přípojka pro přívod demineralizované vody
- připojení pro přívod vody pomocným systémem
- 3/4" BSP kohoutek
- rozměry PRŮMĚR x V: 450 x 820 mm



SDA50 (č. 901020)

POMOCNÁ NÁDRŽ 50 L S AUTOMATICKOU KONTROLOU HLADINY

- nádrž 50 litrů
- vhodná pro dodávání demineralizované vody do myčky
- vyrobena z PE-HD
- s automatickým řízením hladiny pro externí přívod vody
- kompatibilní s demivodním čerpadlem PAD / PAD2
- rychlé připojení pro 8 mm hadice z PE
- přípojka pro přívod demineralizované vody
- připojení pro přívod vody pomocným systémem
- 3/4" BSP kohoutek
- rozměry PRŮMĚR x V: 340 x 640 mm



Spotřební materiál

CARTADP24 (č. 901367)

PAPÍR DO TISKÁRNY DP24/3RTC

- balení 10 rolí



INKDP24 (č. 901368)

INKOUST DO TISKÁRNY DP24/3RTC

- jedna kartridž

KTANK (č. 904162)

NÁSTROJ PRO OTEVÍRÁNÍ KANYSTRŮ

- dvojklíč pro otevírání kanystrů Dr. Weigert a SMEG



SACCRES (č. 901378)

PYTEL NA LIKVIDACI PRYSKYŘICE

- sáček na likvidaci využitých pryskyřic

WD-PAPER (č. 901709)

TERMOPAPÍR PRO TISKÁRNY

- balení 10 rolí
- k použití s tiskárnami WD-PRINT, WD-PRINTE



WD-RIBBON (č. 904008)

PÁSKA PRO WD-PRINTEINK

- páska pro WD-PRINTEINK
- rozměry 57 mm x 74 m
- 4 kusy v balení



CL3000 (č. 900186)

PRÁZDNÁ NÁDOBA NA PRYSKYŘICI

- kapacita: 15 l pro WP3000
- vyrobena z nerez oceli AISI 316L
- včetně rychlokonektorů



MI700WP (č. 900166)

NÁPLŇ PRYSKYŘICE - PRO 15LITROVOU NÁDOBU

- kit směsné pryskyřice pro čističku vody WP3000
- dodává se s odpadním pytlíkem na použitý pryskyřičný odpad
- nerezová nádoba z pryskyřice CL3000 není součástí dodávky



980103 (č. 980103)

SPECIÁLNÍ TABLETY SOLI PRO EXTERNÍ ZMĚKČOVAČE VODY

- 25 kg balík



SALE (č. 901358)

SPECIALÁLNÍ SŮL PRO INTERNÍ ZMĚKČOVAČE VODY

- balík 20 kg (20 krabic po 1 kg)

FLT06WO20-30 (č. 904610)

AKTIVNÍ UHLÍKOVÁ FILTR

- aktivní uhlíkový filtr kompatibilní s reverzní osmózou řady WO-20 a WO-30
- filtrační kapacita cca 15 000 litrů
- obsahuje 6 filtrů

Detergenty a aditiva

ACIDGLC2 (č. 901117)

ACIDGLASS C2

- tekutý neutralizátor bez fosfátů
- obsahuje monohydrát kyseliny citronové
- 5litrový kanystr



ACIDGLP2 (č. 901171)

ACIDGLASS P2

- kyselý kapalný neutralizační prostředek pro laboratorní sklo
- obsahuje kyselinu fosforečnou, monohydrát kyseliny citronové
- 5litrový kanystr



DETERGLASS2 (č. 905448)

DETERGLASS2

- univerzální alkalický prášek
- čistící prostředek pro automatické mytí laboratorního skla
- obsahuje hydroxid sodný, pentahydrát metakřemičitanu sodného, pentabazický trifosforečnan sodný, dihydrát sodné soli triclosenu
- 10 kg balení



DETERLQC2 (č. 901116)

DETERLIQUID C2

- silný univerzální tekutý alkalický mycí prostředek bez fosfátů pro mytí oceli do 95 °C
- vhodný i pro mytí pryže a plastu při 60 °C
- obsahuje křemičitan sodný, polyakrylát, hydroxid draselný
- 5litrový kanistr



DETERLQI2 (č. 904541)

DETERLIQUID I2

- tekutý alkalický mycí prostředek
- obsahuje hydroxid sodný, kyselinu fosfonovou-karboxylovou, chlornan sodný
- 5litrový kanistr



DETERLQSP2 (č. 903659)

DETERLIQUID SP2

- tekutý alkalický detergent bez fosfátů pro analýzu vody a farmacii
- obsahuje hydroxid draselný, hydroxid sodný
- 5litrový kanistr



Náhradní díly

IMBUTOLM (č. 900099)

NÁVODNÍK PRO VSTŘIKOVACÍ VOZÍK

- manifold pro průtok vody do vstřikovacího vozíku



KIT-GW1160Y1 (č. 904337)

SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO PREVENTIVNÍ ÚDRŽBU GW1160 – 1 ROK

- 1 kroužek změkčovače vody 80 mm
- 1 kroužek změkčovače vody 61 mm
- 1 horní těsnění sběrače vody
- 2 sací hadice filtru
- 1 hadice na mycí prostředek - návín 5 m
- hadice pro neutralizátor - cívka 5 m
- 2 vnitřní hadice peristaltické pumpy
- pro preventivní údržbu GW1160 – 1 rok

Vhodné pro:

GW1260-00-000

GW1260-S0-000

GW1260-SC-000

KIT-GW1160Y2 (č. 904338)

SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO PREVENTIVNÍ ÚDRŽBU GW1160 – 2 ROKY

- 1 kroužek změkčovače vody 80 mm
- 1 kroužek změkčovače vody 61 mm
- 1 horní těsnění sběrače vody
- 2 sací hadice filtru
- 1 hadice na mycí prostředek - návín 5 m
- 1 hadice k neutralizátoru - cívka 5 m
- 2 vnitřní hadice peristaltické pumpy
- 1 těsnění mycí komory
- 1 filtr mycí komory
- 1 filtr výpusti čerpadla
- 1 past na bubliny
- 1 regulátor průtoku
- pro preventivní údržbu GW1160 - 2 roky

Vhodné pro:

GW1260-00-000

GW1260-S0-000

GW1260-SC-000

KIT-GW1160Y3 (č. 904339)

SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO PREVENTIVNÍ ÚDRŽBU GW1160 – 3 ROKY

- 1 kroužek změkčovače vody 80 mm
- 1 kroužek změkčovače vody 61 mm
- 1 horní těsnění sběrače vody
- 2 sací hadice filtru
- 1 hadice na mycí prostředek - návín 5 m
- 1 hadice pro neutralizátor - cívka 5 m
- 2 vnitřní hadice peristaltické pumpy
- 2 průtokoměr pro přívod vody
- 1 víčko změkčovače vody
- 1 tlakový spínač PLA
- 1 tlakový spínač PAP
- 2 tryska parního kondenzátoru
- 2 držák předních kol
- podpěra a vedení 4 kol
- 1 těsnění rotoru mycího čerpadla
- pro preventivní údržbu GW1160 - 3 roky

Vhodné pro:

GW1260-00-000

GW1260-S0-000

GW1260-SC-000

KIT-GW2145Y1 (č. 904330)

SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO PREVENTIVNÍ ÚDRŽBU GW2145 – 1 ROKY

- 1 kroužek změkčovače vody 80 mm
- 1 kroužek změkčovače vody 61 mm
- 1 horní těsnění sběrače vody
- 2 sací hadice filtru
- 1 hadice na mycí prostředek - návín 5 m
- 1 hadice pro neutralizátor - cívka 5 m
- 2 vnitřní hadice peristaltické pumpy
- pro preventivní údržbu GW2145 – 1 rok

Vhodné pro:

GW1245-S0-100

KIT-GW2145Y2 (č. 904332)

SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO PREVENTIVNÍ ÚDRŽBU GW2145 – 2 ROKY

- 1 kroužek změkčovače vody 80 mm
- 1 kroužek změkčovače vody 61 mm
- 1 horní těsnění sběrače vody
- 2 sací hadice filtru
- 1 hadice na mycí prostředek - návín 5 m
- 1 hadice k neutralizátoru - cívka 5 m
- 2 vnitřní hadice peristaltické pumpy
- 2 průtokoměr čistícího prostředku
- 1 těsnění mycí komory
- 1 filtr mycí komory
- 1 past na bubliny
- pro preventivní údržbu GW2145 – 2 roky

Vhodné pro:

GW1245-S0-100

KIT-GW2145Y3 (č. 904334)

SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO PREVENTIVNÍ ÚDRŽBU GW2145 – 3 ROKY

- 1 kroužek změkčovače vody 80 mm
- 1 kroužek změkčovače vody 61 mm
- 1 Horní těsnění sběrače vody
- 2 sací hadice filtru
- 1 hadice na mycí prostředek - návín 5 m
- 1 hadice k neutralizátoru - cívka 5 m
- 2 vnitřní hadice peristaltické pumpy
- 2 průtokoměr přívodu vody
- 1 víčko změkčovače vody
- 1 tlakový spínač PLA
- 1 tlakový spínač PAP
- 2 tryska parního kondenzátoru
- 2 držák pro přední kola
- podpěra a vedení 4 kol
- 1 těsnění rotoru mycího čerpadla
- pro preventivní údržbu GW2145 – 3 roky

Vhodné pro:

GW1245-S0-100

KIT-GW4060Y1 (č. 904346)**SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO PREVENTIVNÍ ÚDRŽBU GW4060 –
1 ROK**

- 1 kroužek změkčovače vody 80 mm
- 1 kroužek změkčovače vody 61 mm
- 1 horní těsnění sběrače vody
- 2 sací hadice filtru
- 1 hadice na mycí prostředek - návin 5 m
- 1 hadice pro neutralizátor - cívka 5 m
- 2 vnitřní hadice peristaltické pumpy
- pro preventivní údržbu GW4060 – 1 rok

Vhodné pro:

GW4260-00-000

GW4260-S0-000

GW4260-SC-000

KIT-GW4060Y2 (č. 904347)**SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO PREVENTIVNÍ ÚDRŽBU GW4060 –
2 ROKY**

- 1 kroužek změkčovače vody 80 mm
- 1 kroužek změkčovače vody 61 mm
- 1 horní těsnění sběrače vody
- 2 sací hadice filtru
- 1 hadice na mycí prostředek - návin 5 m
- 1 hadice k neutralizátoru - cívka 5 m
- 2 vnitřní hadice peristaltické pumpy
- 1 těsnění mycí komory
- 1 filtr mycí komory
- 1 filtr výpusti čerpadla
- 1 past na bubliny
- 1 regulátor průtoku
- pro preventivní údržbu GW4060 – 2 roky

Vhodné pro:

GW4260-00-000

GW4260-S0-000

GW4260-SC-000

KIT-GW4060Y3 (č. 904348)

SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO PREVENTIVNÍ ÚDRŽBU GW4060 – 3 ROKY

- 1 kroužek změkčovače vody 80 mm
- 1 kroužek změkčovače vody 61 mm
- 1 horní těsnění sběrače vody
- 2 sací hadice filtru
- 1 hadice na mycí prostředek - návín 5 m
- 1 hadice k neutralizátoru - cívka 5 m
- 2 vnitřní hadice peristaltické pumpy
- 2 průtokoměr přívodu vody
- 1 víčko změkčovače vody
- 1 tlakový spínač PLA
- tlakový spínač PAP
- 2 tryska parního kondenzátoru
- 2 držák pro přední kola
- podpěra a vedení 4 kol
- 1 těsnění rotoru mycího čerpadla
- pro preventivní údržbu GW4060 – 3 roky

Vhodné pro:

GW4260-00-000

GW4260-S0-000

GW4260-SC-000

KITPETROL (č. 903400)

SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO PETROCHEMICKÉ APLIKACE

- sada náhradních dílů pro myčku skla používanou v petrochemickém průmyslu
- pro pravidelnou údržbu

KITSCB55 (č. 904608)

PODPORA KRKU LAHVÍ

- 5 x botek podpory krku pro vysoký profil
- 5x botek podpory krku pro nízký profil



KU40 (č. 901038)

NÁHRADNÍ SADA PRO TRYSKY

- 40 nosných trysek na sklo o průměru 3 – 4 - 6 mm
- 80 plastových hrotů průměr 3 – 4 - 6 mm
- speciální klíč pro trysky



LS5000 (č. 970055)

NÁDOBA SE SNÍMAČEM HLADINY

- 2litrová nádoba
- horní část se sací trubicí
- snímač hladiny



LS5010 (č. 970092)

SNÍMAČ HLADINY

- horní část se sací trubicí
- snímač hladiny



PSCN1 (č. 900817)

SACÍ TRUBICE Z NEREZOVÉ OCELI

- nasává tekuté mycí prostředky z 5 a 12litrových nádob



RUOTCS1 (č. 901698)**KONVERZNÍ SADA KOLEČEK**

- slouží k přizpůsobení horního vozíku CS1-1 na staré vodící lišty používané u strojů vyrobených před lednem 2007

RUOTCS1-1 (č. 901697)**KONVERZNÍ SADA KOLEČEK**

- slouží k přizpůsobení horního vozíku CS1 na nové vodící lišty používané u strojů vyrobených po lednu 2007

**TAPPOSALE** (č. 901342)**VRCH NÁDOBY SŮLI**

- integrovaný uzávěr zásobníku soli na změkčování vody

**TAPPOUG** (č. 903297)**UZÁVĚR (KRYTKA) NA TRYSKY VOZÍKU**

- pro uzavření nepoužité trysky
- vyroben z nerezové oceli



TASC (č. 905131)**PŘÍVODNÍ HADICE TEPLÉ VODY SE SYSTÉMEM ACQUASTOP**

- hadice pro přívod teplé vody
- délka 3,2 m
- dodávána se systémem AcquaStop na straně vodovodního kohoutku
- 3/4" připojení

**Vhodné pro:**

GW6010L	GW6010LX	GW6010ML	GW6010MLX	GW6010T
GW6010TM	GW7010	GW7010M	GW7010T	GW7010TM
GW7015	GW7015T			

TASD (č. 905129)**PŘÍVODNÍ HADICE DEMINERALIZOVANÉ VODY SE SYSTÉMEM ACQUASTOP**

- přívodní hadice demineralizované vody
- délka 3,2 m
- dodávána se systémem AcquaStop na straně vodovodního kohoutku
- 3/4" připojení

**Vhodné pro:**

GW6010L	GW6010LX	GW6010ML	GW6010MLX	GW6010T
GW6010TM	GW7010	GW7010M	GW7010T	GW7010TM
GW7015	GW7015T			

TASF (č. 905130)**PŘÍVODNÍ HADICE STUDENÉ VODY SE SYSTÉMEM ACQUASTOP**

- hadice pro přívod studené vody
- délka 3,2 m
- dodávána se systémem AcquaStop na straně vodovodního kohoutku
- 3/4" připojení

**Vhodné pro:**

GW6010L	GW6010LX	GW6010ML	GW6010MLX	GW6010T
GW6010TM	GW7010	GW7010M	GW7010T	GW7010TM
GW7015	GW7015T			

TC40 (č. 900369)

STŘEDOVÁ TRUBKA K VOZÍKU LM40

- manifold pro průtok vody do vstřikovacího vozíku



TC40DS (č. 900221)

STŘEDOVÁ TRUBKA NA VOZÍK LM40DS SE SYSTÉMEM SUŠENÍ

- manifold pro průtok vody do vstřikovacího vozíku
- se sběračem sušícího systému



TC80 (č. 901554)

STŘEDOVÁ TRUBKA K VOZÍKU LM80

- manifold pro průtok vody do vozíku se vstřikováním



TC80DS (č. 900222)

STŘEDOVÁ TRUBKA NA VOZÍK LM80DS SE SYSTÉMEM SUŠENÍ

- manifold pro průtok vody do vozíku se vstřikováním
- se sběračem sušícího systému



U12300 (č. 904004)

TRYSKA Z NEREZ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 12 x 300 mm



U12390 (č. 904005)

TRYSKA Z NEREZ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 12 x 390 mm



U14450 (č. 904006)

TRYSKA Z NEREZ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 14 x 450 mm



U26205 (č. 904007)

TRYSKA Z NEREZ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 26 x 205 mm
- kompatibilní s následujícími vozíky: C65-I, C65-S, LB1-20DS



ADATM20-F1/2 (č. 905667)

ADAPTÉR NA TRYSKU U26205

- adaptér pro použití trysky U26205 na vozíku LM6-5
- celková výška trysky s adaptérem: 230 mm

ADAP4-8 (č. 905609)

PIPETOVACÍ ADAPTÉR 4 - 8 MM

- malý průměr pipetového adaptéru
- k aplikaci na podpěry/rozvody pro mytí pipet typu KPxxx
- umožňující úpravu pipet malého průměru, min. 4 mm
- vyroben z POM



NIPFFM20M8 (č. 905602)

REDUKČNÍ VSUVKA Z M20 NA M8

- redukční vsuvka M20 až M8, která se používá k montáži trysek U6xxx (větší průměr) ke standardním koncovkám trysek

U3110 (č. 900177)

TRYSKA Z NEREZ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 3 x 110 mm



U3215 (č. 900379)

RADIÁLNÍ TRYSKA Z NEREZOVÉ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 3 x 215 mm
- radiální postřikovač
- pro čištění skleněných trubic



U390 (č. 900176)

TRYSKA Z NEREZ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 3 x 90 mm



U4140 (č. 900178)

TRYSKA Z NEREZ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 4 x 140 mm



U4160 (č. 900179)

TRYSKA Z NEREZ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 4 x 160 mm



U4180 (č. 900180)

TRYSKA Z NEREZ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 4 x 180 mm



U4260 (č. 901744)

TRYSKA Z NEREZ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 4 x 260 mm



U490 (č. 904013)

TRYSKA Z NEREZ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 4 x 90 mm



U6170 (č. 902134)

TRYSKA Z NEREZ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 6 x 170 mm



U6220 (č. 900181)

TRYSKA Z NEREZ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 6 x 220 mm



U6240 (č. 900182)

TRYSKA Z NEREZ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 6 x 240 mm



U6260 (č. 900183)

TRYSKA Z NEREZ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 6 x 260 mm



U6300 (č. 904014)

TRYSKA Z NEREZ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 6 x 300 mm



U6370 (č. 900521)

DVOJITÁ ROZSTŘIKOVACÍ TRYSKA Z NEREZ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 6 x 370 mm
- radiální a vertikální postřikovač
- pro čištění i velkých lahví výšky 450 - 500 mm na vozících LM40 - LPM20/20 - LB8 - LB16I



U675 (č. 904015)

TRYSKA Z NEREZ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 6 x 75 mm



U690 (č. 904012)

TRYSKA Z NEREZ OCELI

- rozměry PRŮMĚR x V: 6 x 90 mm



UB05 (č. 902653)

TRYSKA PRO BUTYROMETRY Z NEREZ OCELI

- plochá tryska
- rozměry D x H x V: 2 x 3 x 180 mm
- vhodná pro butyrometry Gerber 0,5%

UB12 (č. 900233)

TRYSKA PRO BUTYROMETRY Z NEREZ OCELI

- rozměry D x H x V: 2 x 3 x 110 mm
- vhodná pro butyrometry Gerber 12%



UB4 (č. 902652)

TRYSKA PRO BUTYROMETRY Z NEREZ OCELI

- plochá tryska
- rozměry D x H x V: 2 x 3 x 120 mm
- vhodná pro butyrometry Gerber 4%

UB6 (č. 900232)

TRYSKA PRO BUTYROMETRY Z NEREZ OCELI

- plochá tryska
- rozměry D x H x V: 2 x 3 x 90 mm
- vhodná pro butyrometry Gerber 6%



UC6 (č. 900174)

ZAHRNUTÁ TRYSKA Z NEREZ OCELI

- míří proudem vody na dávkovač práškového mycího prostředku



ULB40 (č. 900175)

NYLONOVÁ TRYSKA NA PIPETY

- univerzální adaptér pro mytí pipet



ULB6140 (č. 904982)

NEREZOVÁ TRYSKA PRO MYTÍ LAHVÍ

- tryska pro mytí velkých lahví a velkorozměrového skla
- tryska o průměru: 6 mm - délka: 140 mm
- závit M6 s perforovanou koncovkou pro mytí lahví
- vybavena křížovou podpěrrou s ochranným materiálem pro umístění a upevnění skleněného nádobí
- vyrobena z nerez oceli



Zařízení v souladu s platnými evropskými směnicemi

Ilustrace, údaje a popisy uvedené v tomto katalogu mohou být kdykoliv změněny.

Smeg S.p.A. si vyhrazuje právo zavést bez předchozího upozornění všechny úpravy, které považuje za vhodné ke zlepšení svých produktů.

SMEG S.p.A. - Instruments Division

Via Leonardo da Vinci, 4 – 42016 Guastalla (RE) ITALY

Tel. +39 0522 82 11 - Fax +39 0522 – 821 592

Web: www.smeg-instruments.com

e-mail: instruments@smeg.it



Servis a kontakt:

V případě, že je vyžadován servis nebo technická podpora, kontaktujte společnost Altium International s.r.o.: servis.cz@altium.net, vyplněním formuláře: <https://hpst.cz/servisni-pozadavek> nebo telefonicky +420 725 631 863.

Upozornění:

Katalog v českém jazyce je překlad originální anglické verze katalogu. Český překlad katalogu byl vyhotoven bez korekce a proto se mohou objevit drobné nepřesnosti.

Firma Altium International s.r.o. si Vás dovoluje upozornit, že se distancuje od jakýchkoli náhodných či jiných poruch v souvislosti s užíváním českého překladu katalogu a nepřebírá za ně žádnou zodpovědnost.

Servisní služby

servis.cz@altium.net | t: +420 244 001 237 | www.hpst.cz/sluzby | www.hpst.cz/servisni-pozadavek

Hot line servis **+420 725 631 863** od 8:00 do 17:00

Hot line molekulární biologie **+420 244 001 245** od 9:00 do 15:00